

 **FAUTEUIL DE TOILETTES A ROULETTES NOIR**
Notice d'utilisation - DISPOSITIF MEDICAL

 **BLACK WHEELED TOILET SEAT**
Instructions manual - MEDICAL DEVICE

 **SILLA DE RUEDAS PARA WC NEGRA**
Manual de instrucciones - DISPOSITIVO MEDICO

 **SEDILE DEL WC A ROTELLE NERO**
Manuale di istruzioni - DISPOSITIVO MEDICO

REF. 811065.N



SYMBOLE FIGURANT SUR L'ETIQUETTE OU DANS LA NOTICE D'UTILISATION
SYMBOL APPEARING ON THE LABEL OR IN THE INSTRUCTION MANUAL
SIMBOLO EN LA ETIQUETA O EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES
SIMBOLO CHE COMPARE SULL'ETICHETTA O NELLE ISTRUZIONI PER L'USO.

	Adresse du fabricant Manufacturer's address Dirección del fabricante Indirizzo del produttore		Invitation à consulter le manuel d'utilisation Invitation to consult the user manual Invitación a consultar el manual de usuario Invito a consultare il manuale d'uso
	Date de fabrication Date de production Fecha de fabricación Data di produzione		Respecter les consignes de sécurité Follow the safety instructions Observe las instrucciones de seguridad Seguire le istruzioni di sicurezza
	Numéro de lot Batch number Número de lote Numero di lotto		Conformité CE CE conformity Conformidad CE Conformità CE
	Référence du produit Product reference Referencia del product Riferimento prodotto		Dispositif médical Medical Device Dispositivo médico Dispositivo medico
	Poids maximum de l'utilisateur Maximum user weight Peso máximo del usuario Peso massimo dell'utente		Craint l'humidité Protect from moisture Teme la humedad Proteggere dall'umidità

IMPORTANTE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto e conservarle se necessario.

Utente: se non si è in grado di leggere o comprendere le avvertenze, le precauzioni o le istruzioni, rivolgersi al proprio medico o al distributore prima di utilizzare il prodotto, per evitare rischi e danni.

Prima di utilizzare un dispositivo di assistenza, consultare il medico o l'operatore sanitario. Egli o ella vi consiglierà e vi informerà sull'uso più appropriato nel vostro caso.

Distributore: questo foglio deve essere consegnato agli utenti del prodotto.

DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

La carrozzina da toilette nera è un dispositivo medico. È un ausilio tecnico per la toilette di anziani, persone con mobilità ridotta, disabili, feriti o persone che possono perdere facilmente l'equilibrio.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



PRECAUZIONI DI SICUREZZA




La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza può comportare il rischio di gravi lesioni.

- Non superare mai il peso massimo supportato di 165 kg.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano ben fissati prima dell'uso. - Assicurarsi che il prodotto sia in buone condizioni di funzionamento.
- Ispezionare visivamente il prodotto.
- I freni e le ruote devono essere controllati prima di ogni utilizzo.
- Controllare la stabilità della sedia prima dell'uso.
- Utilizzare solo su terreni pianeggianti.
- Quando si è fermi, ricordarsi di azionare i freni a rotella.
- Assicurarsi di rilasciare i freni prima di spostare nuovamente la sedia.
- Per i trasferimenti o quando la poltrona è ferma, azionare anche i freni.
- Sollevare i poggiatesta prima di sedersi o lasciare la sedia.
- Togliere i poggiatesta prima di salire o scendere dalla sedia. Togliere sempre i piedi dai poggiatesta prima di abbassarlo.
- Non piegarsi mai quando si è sulla sedia.
- Fate attenzione a non schiacciarsi le dita quando spostate o togliete il vasino.
- Assicurarsi che il vasino poggi saldamente sulle due guide sotto il sedile.
- Controllare i cuscinetti delle ruote, i freni, il meccanismo di bloccaggio del poggiatesta, i cuscini del sedile e dello schienale, le imbottiture dei braccioli e dello schienale, il vasino e la copertura.
- Se alcune parti sono danneggiate, rotte, usurate o mancanti, contattare il rivenditore.

MONTAGGIO E UTILIZZO

Montaggio del telaio della sedia

1. Allentare le due manopole (1) su entrambi i lati della sedia della toilette ruotando in senso antiorario.
2. Inserire le sezioni dello schienale (2) nei due ricevitori del telaio.
3. Fissare lo schienale stringendo le due manopole (1) in senso orario.

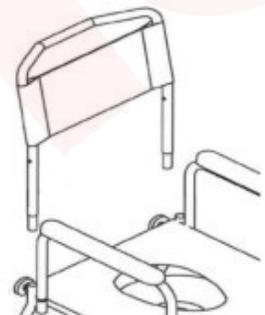


Uso dei braccioli

1. I braccioli possono essere rimossi per il trasferimento laterale e sostituiti se necessario dall'utente.
2. Per sostituire i braccioli, posizionare entrambe le estremità del tubo del bracciolo nei ricevitori del telaio.
3. Per rimuovere i braccioli, è sufficiente sollevarli.

Installazione del poggiatesta

1. Per montare le pedane, inserire i 2 fori del tubo nelle alette quando la pedana è girata verso l'esterno. Ruotare quindi il poggiatesta come indicato nella figura per bloccarlo in posizione d'uso nella parte anteriore della carrozzina.
2. Per ruotare e ritrarre il poggiatesta, premere la leva cromata mentre si spinge indietro il poggiatesta. Il poggiatesta può quindi essere sollevato.

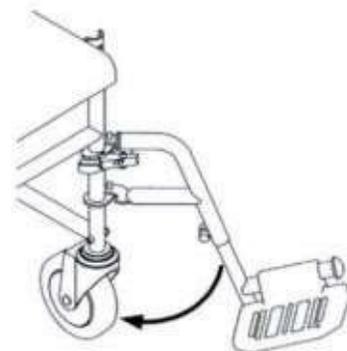

Regolazione del freno ruota

Premere la leva sopra la ruota per inserire il freno di stazionamento (come mostrato). Per sbloccare il blocco, premere la linguetta sporgente sopra la ruota.

Utilizzo della pentola e del coperchio

1. Il vasino e il coperchio sono alloggiati sotto il sedile in plastica. Per aggiungere il vasino, farlo scorrere sotto il sedile dal retro della sedia. Assicurarsi che il vasino sia fissato saldamente alle due guide sotto il sedile.
2. Per rimuovere il vasino, farlo scorrere sotto il sedile. Aggiungere il coperchio e trasportare il vasino in modo sicuro utilizzando la maniglia cromata.



La mancata cura e il mancato controllo del prodotto possono comportare il rischio di gravi lesioni.

- Asciugare il prodotto dopo ogni utilizzo.
- Pulire periodicamente il telaio, le rotelle, i giunti e i fissaggi con un panno umido e un detergente delicato o un disinfettante. Ad esempio, è possibile utilizzare un disinfettante delicato a base di cloruro.
- Asciugare con un panno morbido, pulito e asciutto.
- Controllare che il prodotto non presenti crepe o danni.
- La sedia deve essere revisionata completamente ogni anno, con lubrificazione obbligatoria.
- Si consiglia di eseguire la manutenzione del prodotto almeno una volta all'anno. Se il prodotto è soggetto a un uso intensivo e/o a un utilizzo in un ambiente con più utenti, si consiglia una manutenzione più frequente.
- In caso di malfunzionamento, non riparare il prodotto da soli. Consultare un rivenditore autorizzato. • Lista di contro

Per mantenere il prodotto in buone condizioni, controllarlo prima di ogni utilizzo e controllarlo regolarmente come segue:

Consulta l'articolo	In qualsiasi momento	Settimanale
Controllare le condizioni del sedile (assenza di crepe)		X
Controllare il funzionamento dei freni	X	
Controllare la funzione di ripiegamento dei braccioli	X	

CAMBIO DI PROPRIETÀ

Il prodotto può essere riutilizzato. Deve essere prima pulito e disinfettato secondo le istruzioni igieniche. Quando si trasferisce il prodotto, ricordarsi di consegnare al nuovo utilizzatore tutta la documentazione tecnica necessaria. Il prodotto deve essere preventivamente ispezionato da uno specialista autorizzato.

RICICLAGGIO

Quando il prodotto è diventato inutilizzabile e si deve buttare via: rivolgersi al rivenditore specializzato. Se si desidera riciclare il prodotto da soli, rivolgersi all'azienda locale di smaltimento rifiuti per conoscere le linee guida per lo smaltimento.

IMMAGAZZINAMENTO



La mancata osservanza delle condizioni di conservazione può causare il deterioramento del prodotto e quindi il rischio di gravi lesioni.

Non conservare il prodotto per un periodo prolungato vicino a una fonte di calore o al sole (ad esempio dietro una finestra o vicino a un radiatore) o vicino a una fonte di freddo.

Tenere lontano da fiamme e fonti di scintille.

Rispettare le condizioni di immagazzinamento e stivaggio del prodotto.

In un luogo asciutto e temperato

- Proteggete il vostro prodotto imballandolo dalla polvere, dalla corrosione (ad es. elementi abrasivi, sabbia, acqua di mare, aria salata).

- Conservare tutte le parti smontate insieme nello stesso posto (o localizzarle se necessario) per evitare di mescolarle con altri prodotti al momento del rimontaggio.
- Tutti i componenti devono essere immagazzinati senza alcun carico (non collocare oggetti troppo pesanti sugli elementi del prodotto, non incastrare nulla...).

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni complessive	Larghezza 56 x profondità 63/95 con poggiatesta x altezza 95 cm
Dimensioni del sedile	Larghezza 46 x profondità 45 x altezza 50 cm
Lunghezza tra i braccioli	43 cm
Peso	14 kg
Peso massimo	165 kg

PERIODO D'USO

L'aspettativa di vita di questo prodotto è di 5 anni in condizioni normali di utilizzo, sicurezza e manutenzione. Oltre questo periodo, il prodotto può essere utilizzato finché è in buone condizioni.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. IDENTITIES fornirà parti di ricambio per qualsiasi parte che si sia rotta a causa di un difetto di fabbricazione, progettazione o materiale. Contattare il distributore presso il quale è stato acquistato il prodotto in caso di reclamo. I guasti dovuti a danni accidentali, uso improprio, alterazione o usura non sono coperti dalla presente garanzia. Per l'applicazione della garanzia, rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.



Identités – ZA Pole 49Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU



Poids maximum autorisé
Maximum weight authorized

Peso máximo permitido
165 kg

