



 **SUPPORTO WC LUXEX**
 Manuale di istruzioni
DISPOSITIVO MEDICO

RIF. 811075



SIMBOLO APPARSO SULL'ETICHETTA O NEL MANUALE DI ISTRUZIONI

| | | | |
|---|--------------------------|---|---------------------------------------|
|  | Indirizzo del produttore |  | Invito a consultare il manuale d'uso |
|  | Data di fabbricazione |  | Rispettare le istruzioni di sicurezza |
|  | Numero di lotto |  | Conformità CE |
|  | Riferimento del prodotto |  | Non tollera l'umidità |
|  | Peso massimo dell'utente |  | Dispositivo medico |

ISTRUZIONI ITALIANO

IMPORTANTE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e conservarle se necessario.

Utente: se non si è in grado di leggere o comprendere eventuali avvertenze, precauzioni o istruzioni, contattare il proprio operatore sanitario o il distributore prima di utilizzare questo prodotto per evitare rischi e danni.

Consultare il proprio medico o operatore sanitario prima di utilizzare qualsiasi dispositivo di assistenza. Lui/lei ti consiglierà e ti informerà sull'uso più appropriato al tuo caso.

Distributore: questo manuale di istruzioni deve essere consegnato agli utilizzatori di questo prodotto.

DESTINAZIONE PRODOTTO

A: Piastra di supporto


B: Bracciolo destro

C: Bracciolo sinistro

D: Gambe regolabili

Il supporto wc Lumex è un dispositivo medico. È un ausilio tecnico per la toilette per anziani, disabili, portatori di handicap, feriti o coloro che possono facilmente perdere l'equilibrio. Permette di sedersi e alzarsi in tutta tranquillità appoggiandosi ai braccioli stabili e sicuri. Può essere installato sotto gli occhiali esistenti.

DESCRIZIONE PRODOTTO

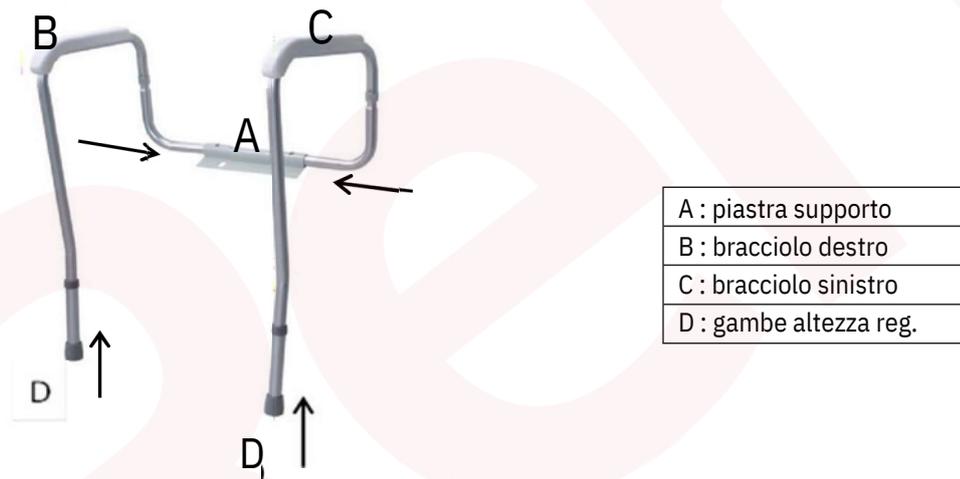

SICUREZZA

La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza può comportare il rischio di lesioni gravi.

- Non superare il limite massimo di peso di 110 kg
- Assicurarsi che tutte le parti siano fornite e in buone condizioni.
- Assicurarsi che il prodotto sia installato e bloccato correttamente sulla toilette prima di utilizzarlo.
- Se qualche parte è danneggiata, rotta, usurata o mancante, contattare il rivenditore.

USO E MONTAGGIO

1. Inserire i braccioli B e C nei piedi D. Regolare all'altezza desiderata.
2. Fissare la piastra di supporto A nella stessa posizione dello sportello. (Utilizzare gli elementi di fissaggio)

CURA E MANUTENZIONE



Failure to care for and maintain your product may result in the risk of serious injury.

- Pulire regolarmente a mano il prodotto con un panno umido e un detergente e disinfettante delicato. Non utilizzare prodotti abrasivi, detersivi o prodotti a base di solventi.
- Asciugare con un panno morbido, pulito e asciutto.
- Se il dispositivo è soggetto a un uso intenso e/o in un ambiente multiutente, si consiglia di sottoporlo a manutenzione più frequentemente.
- In caso di malfunzionamento, non riparare da soli il prodotto. Consultare un rivenditore autorizzato.
- Prima di ogni utilizzo, verificare che le clip a molla siano completamente estese e che la piastra di fissaggio sul retro della toilette sia serrata.
- Controllare regolarmente lo stato dei braccioli e il serraggio dei fissaggi.

RICICLO

Quando il prodotto è diventato inutilizzabile ed è necessario smaltirlo: rivolgersi al proprio rivenditore specializzato. Se desideri effettuare il riciclaggio per conto tuo, chiedi alla tua società locale di gestione dei rifiuti le linee guida per lo smaltimento.

STOCCAGGIO

Failure to observe the storage conditions can lead to deterioration of the product and thus to the risk of serious injury.

- Non conservare il prodotto per un lungo periodo di tempo vicino a una fonte di calore o al sole (ad esempio dietro una finestra o vicino a un radiatore) o vicino a una fonte fredda.
- Tenere lontano da fiamme e fonti di scintille.
- Rispettare le condizioni di conservazione del prodotto:
 - In un luogo asciutto e temperato
 - Proteggi il tuo prodotto da polvere, corrosione (es. elementi abrasivi, sabbia, acqua di mare, aria salmastra).
 - Conservare insieme tutte le parti rimosse nello stesso posto (o localizzarle se necessario) per evitare di mescolarle con altri prodotti durante il rimontaggio.
 - Tutti i componenti devono essere immagazzinati senza alcun carico (non appoggiare oggetti troppo pesanti sugli elementi del prodotto, non incastrare nulla...).

DURATA PRODOTTO

La durata di vita di questo prodotto è di 5 anni in normali condizioni di utilizzo, sicurezza e manutenzione per un utente. Oltre questo periodo il prodotto può essere utilizzato finché è ancora in buone condizioni.

Se il dispositivo viene utilizzato in un ambiente multiutente (come una casa di cura o un ospedale), la durata potrebbe ridursi.

DATI TECNICI

| | |
|--------------------|--|
| Dimensioni totali | larghezza 46/50/54 cm x altezza 66/76 cm |
| Altezza regolabile | Regolabile da 66 a 76 cm |
| peso | 1,6 kg |
| Portata max | 110 kg |

GARANZIA

Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. IDENTITIES fornirà parti di ricambio per qualsiasi parte che si sia rotta a causa di difetti di fabbricazione, progettazione o produzione. Contatta il distributore da cui hai acquistato il prodotto nel caso in cui sia necessario presentare un reclamo. I guasti derivanti da danni accidentali, uso improprio, alterazione o usura non sono coperti da questa garanzia. Contatta il rivenditore da cui hai acquistato il prodotto per applicare la garanzia.