



COPRISEDILE WC SOUPLESS

Manuale di istruzioni – DISPOSITIVO MEDICO

REFERENZE: 811078 - 811126



SIMBOLO CHE APPARE SULL'ETICHETTA O NEL MANUALE DI ISTRUZIONI

	Indirizzo del produttore		Invito alla consultazione del manuale d'uso
	Data di fabbricazione		Rispettare le istruzioni di sicurezza
	Numero di lotto		Conformità CE
	Riferimento del prodotto		Teme l'umidità
	Peso massimo dell'utente		Dispositivo medico

IMPORTANTE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e conservarle se necessario. Utente: se non si è in grado di leggere o comprendere eventuali avvertenze, precauzioni o istruzioni, contattare il proprio medico o distributore prima di utilizzare questo prodotto, altrimenti potrebbero verificarsi rischi e danni. Consultare il proprio medico o il proprio medico prima di utilizzare un ausilio per la deambulazione. Lui/lei vi consiglierà e vi informerà sulla tecnica di deambulazione più appropriata per voi. Distributore: questo opuscolo deve essere consegnato agli utenti di questo prodotto.

DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

Il rialzo per il sedile del water è progettato per facilitare l'accesso al water. Questo dispositivo medico consente l'uso indipendente del water per le persone con mobilità ridotta, che hanno difficoltà di equilibrio e/o difficoltà a sedersi e alzarsi.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



PRECAUZIONI DI SICUREZZA



La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza può comportare il rischio di gravi lesioni.

Non superare il limite di peso massimo di 185 kg. Consultare sempre il rivenditore specializzato per installare questo prodotto e imparare a usarlo correttamente. Evitare di inclinare eccessivamente la parte superiore del corpo verso i lati, in avanti o indietro. Rischio di ribaltamento. Non sedersi sulla copertura (per i modelli dotati di una). Non riporre all'esterno e non lasciare alla luce diretta del sole (attenzione a lasciarlo all'interno di un'auto in pieno sole!). Non utilizzare all'esterno, utilizzare solo sul water. Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti: non inginocchiarsi o salire sul prodotto. Attenersi sempre ai limiti di peso indicati sull'etichetta o nelle istruzioni. Non modificare questo prodotto. Se sono necessarie riparazioni, utilizzare solo parti originali. Solo personale qualificato è autorizzato a riparare questo prodotto. Dopo aver assemblato e installato il prodotto, assicurarsi che sia stabile sul water prima dell'uso. In caso di inutilizzo prolungato, far controllare il prodotto dal rivenditore specializzato. Verificare sempre la stabilità prima dell'uso. Qualsiasi incidente grave correlato al dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova l'utente e/o il paziente.

Non utilizzare in caso di:

- Demenza Disturbi significativi
- dell'equilibrio Incapacità di mantenere
- una posizione seduta

L'installazione di questo prodotto deve essere eseguita solo da personale qualificato. Una regolazione non corretta può causare un uso improprio e incidenti. Questo articolo è destinato ad aumentare l'altezza del water per facilitare l'alzata in piedi (+11 cm).

In nessun caso dovresti usare questo prodotto se ritieni che ci sia un rischio di caduta. Non esitare a chiedere al tuo rivenditore in caso di dubbi.

UTILIZZO

- 1-Sollevare il sedile e il coperchio del water.
- 2-Montare il montante del WC sopra la tazza.
- 3-Controllare che le labbra si estendano sia all'interno che all'esterno della ciotola. Per la vostra sicurezza, non usatela in caso di dubbi.
- 4-Verificare la stabilità prima dell'uso.
- 5-Per rimuovere il prodotto, svtarlo tirandolo verso l'alto. Per rimetterlo a posto, ripetere il passaggio 1.

CURA E MANUTENZIONE



La mancata cura e monitoraggio del prodotto può comportare il rischio di gravi lesioni.

- Pulire regolarmente il rialzo del sedile del water con un disinfettante non clorurato e un panno morbido.
- Non usare abrasivi, prodotti a base di solventi, detersivi o abrasivi.
- Asciugarlo con un panno pulito, asciutto e morbido.
- Assicurarsi che non vi siano accumuli di sporco sul montante.
- In caso di malfunzionamento, rivolgersi a un rivenditore autorizzato.

Lista di controllo:

Per mantenere il prodotto in buone condizioni, controllare prima di ogni utilizzo e controllare regolarmente quanto segue:

Controlla l'articolo	In qualsiasi momento	Settimanale
Condizioni della copertura		X
Condizioni della schiuma e delle grondaie		X
Pulizia	X	

CAMBIO DI PROPRIETÀ

Il prodotto può essere riutilizzato. Deve essere prima pulito e disinfettato secondo le istruzioni igieniche. Quando si trasferisce il prodotto, ricordarsi di consegnare tutta la documentazione tecnica necessaria al nuovo utente. In precedenza, il prodotto deve essere ispezionato da uno specialista autorizzato.

RICICLAGGIO

Se il prodotto è diventato inutilizzabile e dovete smaltirlo: contattate il vostro rivenditore specializzato. Se desideri effettuare autonomamente il riciclaggio, chiedi alla tua azienda locale di gestione dei rifiuti le linee guida per lo smaltimento.

MAGAZZINAGGIO



La mancata osservanza delle condizioni di conservazione può comportare il deterioramento del prodotto e quindi il rischio di gravi lesioni.

Non conservare il prodotto per un periodo di tempo prolungato vicino a una fonte di calore o al sole (ad esempio dietro una finestra o vicino a un radiatore) o vicino a una fonte fredda. Conservare in un luogo asciutto e temperato. Protetto dall'imballaggio, lontano da polvere, corrosione (ad esempio, elementi abrasivi, sabbia, acqua di mare, aria salata). Tutti i componenti devono essere conservati senza alcun carico.

Dimensioni complessive	Larghezza 41 x Profondità 44 x Altezza 16 cm - Apertura centrale: 26 x 21,5 cm
Peso	811078 - 2,5 kg 811126 - 2kg
Carico massimo	185 chili

PERIODO DI UTILIZZO


La durata di vita prevista di questo prodotto è di 3 anni in normali condizioni di utilizzo, sicurezza e manutenzione. Oltre questo periodo, il prodotto può essere utilizzato finché è ancora in buone condizioni.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. IDENTITIES fornirà parti di ricambio per qualsiasi parte che si sia rotta a causa di un difetto di fabbricazione, progettazione o materiale. Contattare il distributore da cui è stato acquistato il prodotto nel caso in cui sia necessario presentare un reclamo. I guasti derivanti da danni accidentali, uso improprio, alterazione o usura non sono coperti da questa garanzia. Contattare il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto per applicare la garanzia.



Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU

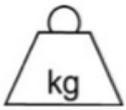

PORTATA MASSIMA
185 kg



GROUP

Prema