


**DEAMBULATORE NEO BALADEO**
**Manuale d'uso**
**DISPOSITIVO MEDICO**
**REF. 828012**

**SIMBOLO SULL'ETICHETTA O NEL MANUALE DI ISTRUZIONI**


	Indirizzo del produttore		Invito a consultare il manuale d'uso
	Data di fabbricazione		Rispettare le istruzioni di sicurezza
	Numero di lotto		Conformità CE
	Riferimento del prodotto		Dispositivo medico
	Peso massimo dell'utente	Grado IP25	Grado di impermeabilità e protezione dalla polvere
	Attenzione al pizzicamento		

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e conservarle se necessario. Utente: se non si è in grado di leggere o comprendere eventuali avvertenze, precauzioni o istruzioni, contattare il proprio medico o distributore prima di utilizzare questo prodotto, altrimenti potrebbero verificarsi rischi e danni. Consultare il proprio medico o il proprio medico prima di utilizzare qualsiasi dispositivo di assistenza. Lui/lei vi consiglierà e vi informerà sull'uso più appropriato nel vostro caso. Distributore: questo manuale di istruzioni deve essere consegnato agli utenti di questo prodotto.

## DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

Il carrello della spesa Neo Baladeo è un ausilio per la deambulazione progettato per persone con mobilità ridotta. Questo prodotto è destinato all'uso all'aperto. È un carrello pieghevole in cui è possibile trasportare la spesa, dotato di sedile e freni di stazionamento.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

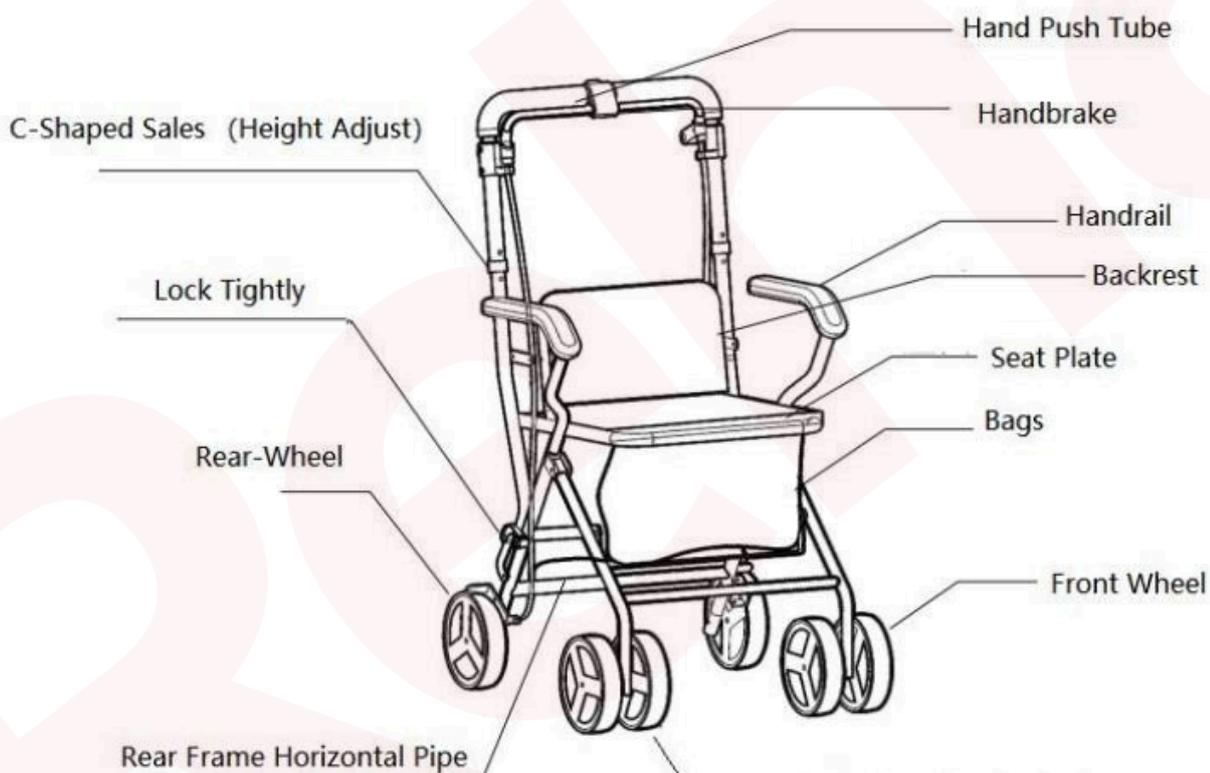

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA





La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza può comportare il rischio di gravi lesioni.

- Non superare il limite massimo di peso di 100 Kg.
- Non superare il limite massimo di carico nel cestino (5 kg). Trasportare solo carichi nel cestino. Non appendere oggetti pesanti al deambulatore poiché ciò potrebbe comprometterne la stabilità.
- Assicurarsi che tutte le parti (ruote, cavi e maniglie) siano fissate saldamente e in buone condizioni di funzionamento.
- Assicuratevi che le ruote siano ben strette e alla stessa altezza.
- Non utilizzare il deambulatore su scale o scale mobili.
- Utilizzare solo accessori e parti forniti dal produttore.
- Il rollator è un ausilio per la deambulazione. Non è una sedia a rotelle. Non è progettato per trasportare una persona seduta su di esso. Tale utilizzo può danneggiare le ruote e la struttura del rollator stesso. Il rollator potrebbe indebolirsi e non soddisfare più le sue caratteristiche meccaniche in un uso futuro. Utilizzare il rollator solo come supporto per la deambulazione.
- Non usare il deambulatore per camminare all'indietro.
- Non apportare alcuna modifica al deambulatore mentre è in uso.
- Prima dell'uso, verificare che i freni funzionino correttamente.
- Tutte le ruote devono essere sempre a contatto con il terreno.
- Quando il rollator è in posizione stazionaria, i freni devono essere bloccati. Non tentare di spostare il rollator se i freni sono bloccati.
- Assicuratevi di appoggiare le mani su ogni maniglia in modo che il deambulatore possa trovarsi nella posizione di forza parallela.
- Prestare attenzione quando si sale sui marciapiedi o si cammina su superfici inclinate, irregolari o scivolose. In caso contrario, si corre un rischio significativo di caduta o infortunio.
- Non utilizzare il deambulatore su pendii bagnati, ghiacciati o innevati.
- Se qualche parte risulta danneggiata, rotta o usurata, contattare il rivenditore.
- Per evitare danni strutturali, il prodotto deve essere posizionato in modo stabile, senza scuoterlo troppo.
- Controllare regolarmente il collegamento del deambulatore per evitare incidenti causati da parti allentate o staccate.

## MONTAGGIO E UTILIZZO

1. Per regolare l'altezza del bracciolo del carrello della spesa, allentare la manopola sul lato del telaio, rimuovere la vite, regolare il bracciolo all'altezza appropriata, quindi rimettere la vite e bloccare la manopola.
2. Per ritrarre il carrello della spesa, basta sollevare il cuscino del sedile per far rientrare la biella e ripiegare il telaio.
3. Funzione di orientamento della ruota anteriore: spingere la freccia verso l'alto per far muovere l'interruttore verticalmente, far scorrere la freccia verso il basso per ruotare l'interruttore di 360 gradi.

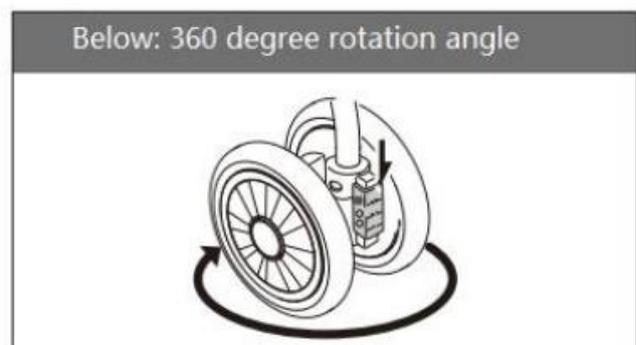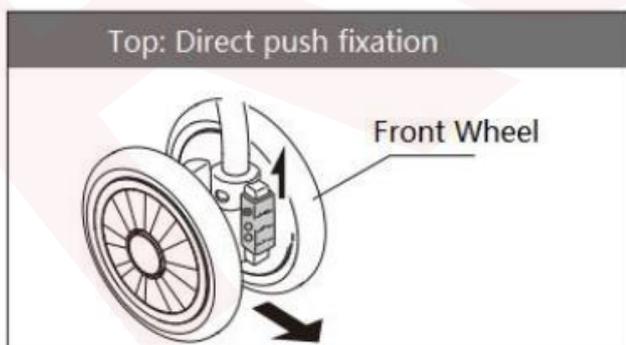

## CURA E MANUTENZIONE



La mancata cura e monitoraggio del prodotto può comportare il rischio di gravi lesioni.

- Pulire regolarmente il deambulatore con acqua calda e un panno morbido. Non utilizzare prodotti abrasivi, detersivi o solventi.

- Asciugare con un panno morbido, pulito e asciutto.
- Assicurarsi che non vi siano accumuli di sporco o detriti attorno all'asse, ai freni o alle ruote.
- Non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti fenolo o cloro, poiché potrebbero danneggiare i materiali in alluminio e poliammide. Lubrificare le ruote con un po' di olio se cigolano. Controllare periodicamente l'usura e la resistenza di tutte le viti e i bulloni.
- Sostituire immediatamente tutte le parti rotte, danneggiate o usurate.
- Controllare che i freni funzionino prima di ogni utilizzo.
- Controllare i freni di stazionamento spingendo le maniglie in posizione di blocco, quindi provare a spingere il deambulatore.
- In caso di malfunzionamento, non riparare il deambulatore da soli. Consultare un rivenditore autorizzato. Lista di controllo: Per mantenere il deambulatore in buone condizioni, controllare prima di ogni utilizzo e controllare regolarmente quanto segue:

Controlla l'articolo	In qualsiasi momento	Settimanale	Mensile
Clip per la regolazione dell'altezza		X	
Saldatura strutturale sulle ruote		X	
Pulizia	X		
Viti e dispositivi di fissaggio		X	
Stabilità del telaio e dello schienale			X
Condizioni del sedile		X	
Freni	X		

## CAMBIO DI PROPRIETÀ

Il prodotto può essere riutilizzato. Deve essere prima pulito e disinfettato secondo le istruzioni igieniche. Quando trasferisci il tuo prodotto, ricordati di consegnare tutta la documentazione tecnica necessaria al nuovo utente. In precedenza, il prodotto deve essere ispezionato da uno specialista autorizzato.

## RICICLAGGIO

Quando il prodotto è diventato inutilizzabile e devi smaltirlo: contatta il tuo rivenditore specializzato. Se desideri effettuare autonomamente il riciclaggio, chiedi alla tua azienda locale di gestione dei rifiuti le linee guida per lo smaltimento.

## MAGAZZINAGGIO



La mancata osservanza delle condizioni di conservazione può portare al deterioramento del prodotto e quindi al rischio di gravi lesioni.

- Non conservare il prodotto per un lungo periodo di tempo vicino a una fonte di calore o al sole (ad esempio dietro una finestra o vicino a un termosifone) o vicino a una fonte fredda.
- Tenere lontano da fiamme e fonti di scintille.
- Rispettare le condizioni di conservazione del prodotto:
- In un luogo asciutto e temperato Proteggere il prodotto da polvere e corrosione (ad esempio agenti abrasivi, sabbia, acqua di mare, aria salata).
- Conservare tutte le parti rimosse insieme nello stesso posto (o individuarle se necessario) per evitare di mescolarle con altri prodotti durante il rimontaggio.
- Tutti i componenti devono essere immagazzinati senza alcun carico (non appoggiare oggetti troppo pesanti sugli elementi del prodotto, non incastrare nulla...).

## PERIODO DI UTILIZZO

La durata di vita prevista di questo prodotto è di 5 anni in normali condizioni di utilizzo, sicurezza e manutenzione per un utente. Oltre questo periodo, il prodotto può essere utilizzato finché è ancora in buone condizioni. Se il dispositivo viene utilizzato in un ambiente multiutente (ad esempio in una casa di cura o in un ospedale), la sua durata potrebbe ridursi.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni complessive	Larghezza 52 cm x Profondità 58 cm x Altezza 89/93 cm
Dimensioni del sedile	Larghezza 37 cm x Profondità 30 cm x Altezza 48 cm
Peso massimo dell'utente	100 chili
Telaio in alluminio leggero e pieghevole	