



MOVI Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 – Milano
Italy


Tel. +39 02 509051
Fax +39 02 5062467
wimedinfo@movigroup.com
www.movigroup.com

R.E.A.: MI 1477333
Capitale €. 7.072.000 i.v.
P. IVA – VAT No: IT 11575580151
Certified Quality System ISO
9001/13485

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MOVI LEMAR SPA – Milano

Materasso Polymulti® 3

Fabbricante	Distributore
<p>SYSTEMAM ZAE route de Casseneuil - Le Lédats – 47300 Villeneuve sur Lot France</p> 	<p>Movi S.p.A- Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia</p> 

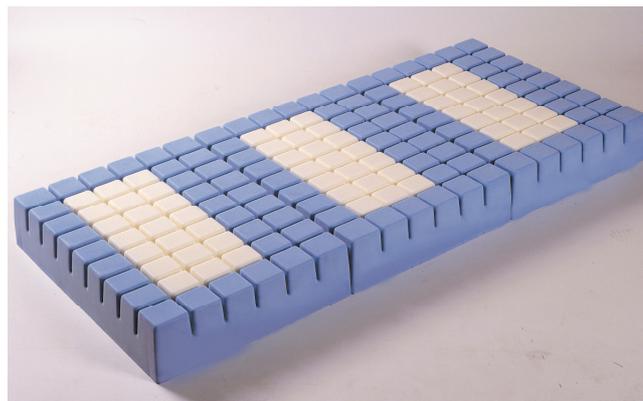

- Destinazione d'uso** Indicati per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito.
- Descrizione** Dispositivi medici destinati alla prevenzione e/o alla coadiuvazione della cura delle Lesioni da Pressione
Materasso a tre sezioni. Grazie alla modularità delle sezioni è ideale per letti a movimentazione. Lo speciale disegno della superficie, a scanalature, permette una migliore areazione e i movimenti del paziente, mantenendo la temperatura corporea costante.
Prodotto in poliuretano espanso composito ad alta densità ed alta resilienza. Realizzato con materiali di diversa densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni. Le schiume ad alta densità (40 Kg/m³) consentono un minor rischio di affossamento permettendo una migliore distribuzione delle pressioni; le zone bianche sono indicate per le zone a maggior rischio di sviluppo di piaghe (talloni, sacro e spalle), mentre quelle blu per le parti a minor rischio (testa tronco e gambe).
Perfettamente articolabile con le articolazioni dei letti; ottimizzazione del microclima con ampi canali di areazione, gli stabilizzatori laterali

permettono il posizionamento centrale del paziente riducendo i rischi di caduta, mentre una solida base permette una migliore stabilità. Le tre sezioni sono diversamente componibili in relazione alla altezza del paziente e al peso.

Forniti completi di copertura integrale bi-estensibile, impermeabile e traspirante Polymaille® che assicura il massimo comfort ed evita l'effetto amaca; riduce le forze di taglio e stiramento e assicura una perfetta ventilazione mantenendo la temperatura corporea costante. Trattamento Anti-microorganismi.

Cerniera su tre lati con lembo di protezione posta al di sotto del materasso. Massima protezione interna. Base antiscivolo.

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni	90x200x17 cm (singoli elementi 65x86x17 cm)
Peso	12 Kg
Densità del poliuretano espanso	40 Kg/m ³
Portata terapeutica consigliata:	fino a 120 Kg in qualsiasi articolazione di utilizzo
Stadio (EPUAP)	I-II (II richiede osservazione e riposizionamento)

Materiali

Materasso	Poliuretano ad alta resilienza ed alta densità
Copertura	Polymaille®

Materasso Polyplot 3 sezioni

Codice	Descrizione	Dimensioni (La x Lu x A, cm)	Materasso sostitutivo (MR) Sovramaterasso (OL)
P141MMPMHI	Materasso Polymulti 3 a 3 sezioni 90x200xh.17 cm. con copertura Polymaille	90x200xh.17 cm	(MR)

Accessori

Descrizione	Codice
Telo Polymaille integrale con angoli per Polyplot 3 e Polymulti 90x200x17 cm.	P421PM

Conformità alla direttiva 93/42/CEE Conforme alle direttiva 93/42/CEE così come modificata dalla Direttiva 2007/47/EEC

Classe di appartenenza

I

CFC

Completamente assente

Latex free

Completamente latex free e Ipoallergenica.

**Pulizia/
decontaminazione/
disinfezione**

Materasso: pulire con acqua e sapone e risciacquare con acqua. Lasciar asciugare all'aria. Disinfettare mediante prodotti applicabili a freddo, quali ammonio quaternario, glutaraldeidi, ecc.

Può essere occasionalmente sterilizzato in autoclave.

Cover: pulire con acqua e sapone e risciacquare con acqua. Lasciare asciugare all'aria. Non utilizzare prodotti corrosivi o abrasivi; disinfezione a freddo

Installazione

Dopo aver aperto la confezione lasciare che gli elementi riprendano la loro forma originaria e posizionarli direttamente sulla base del letto. Non porre alcun corpo estraneo tra il paziente e il materasso, tranne il telo o un lenzuolo. Si consiglia di realizzare l'assemblaggio delle sezioni come mostrato dal foglio di istruzioni, è tuttavia possibile disporre gli elementi diversamente.

**Emissione/Ultimo
aggiornamento**

Data: 11-02-2011