

XFamily²

Generazione² - Grandi funzionalità e design



Breezy non tradisce!

La nuova linea Breezy XFamily² è stata perfezionata per offrire una migliore efficienza.

Breezy è affidabilità.

Materiali resistenti, sicurezza su ogni terreno, uno straordinario rapporto qualità/prezzo.

Funzionalità migliorate per una postura migliore dell'utente e per maggiore sicurezza.

Tutta la XFamily² ha passato il Crash-test secondo la normativa ISO 7176-19.








Breezy XFamily²!

Ottimizzazione della gamma.

Cinque carrozzine – un solo concetto. La presenza di parti comuni permette di effettuare regolazioni personalizzate in poco tempo.

I vantaggi:

- Gamma completa di prodotti per una migliore offerta
- Parti in comune per una riduzione degli stock
- Grande flessibilità di utilizzo
- Facilità di regolazione e di riconfigurazione
- Gestione più facile e più veloce

	Standard	Leggere	Polifunzionali
Prezzo	<p>UniX²</p>  <p>Breezy UniX²</p>	<p>RubiX²</p> <p>BasiX²</p>  <p>Breezy RubiX²</p>  <p>Breezy RubiX² XL</p>  <p>Breezy BasiX²</p>	<p>RelaX²</p>  <p>Breezy Relax²</p>
	XFamily ²		
	Configurazione		

Ottimizzazione dell'utilizzo delle parti comuni per una migliore gestione della gamma.

Sorprendentemente semplice e così geniale: il principio Mini-Max della Breezy XFamily².

L'elevato livello delle parti in comune permette di avere meno magazzino offrendo comunque un'ottima flessibilità.

COMPATIBILITA' DELLE PARTI TRA I VARI MODELLI

	Breezy UniX²	Breezy Basix²	Breezy Rubix²	Breezy Rubix² XL	Breezy Relax²
Angoli pedana	●	●	●	●	●
Pedane elevabili	●	●	●	●	●
Supporto per amputati	●	●	●	●	●
Braccioli regolabili in altezza versione standard	●	●	●	●	-
Braccioli a montante singolo	-	●	●	●	●
Freno	●	●	●	●	-
Prolunga del freno	●	●	●	●	-
Ruote anteriori 6"/8"	●	●	●	●	●
Ruote posteriori 22" / 24"	●	●	●	●	●
Ruote posteriori 22"/24" con freni a tamburo	●	●	●	●	●
Telo seduta con imbottitura in Nylon	-	●	●	●	-
Ruotine antiribaltamento	●	●	●	●	●
Copriraggi	●	●	●	●	●
Cintura pettorale	●	●	●	●	●

● GIALLO = compatibili ma non uguali
 ● VERDE = compatibili e uguali

- Minimo sforzo, massima intercambiabilità.
- Minimi livelli di magazzino per le parti di ricambio, massima personalizzazione.
- Minima complicazione per gli ordini, massima velocità di consegna.

Il principio Mini-Max della Breezy XFamily² piacerà non solo per la gamma disponibile e il design, ma anche per l'efficienza della gestione.



XFamily²





UniX²

Costruita per durare.
Design robusto e affidabile. Assicura mobilità sia in casa che all'aperto.



Braccioli standard ribaltabili con imbottiture corte e lunghe.

Due regolazioni dell'altezza della seduta.

Pedane elevabili (optional).

XFamily²

BasiX²TM

Reglazioni e rigidità
migliorate combinate ad un
look più moderno!



Il nuovo telaio offre una migliore regolazione della profondità di seduta (regolabile da 41 a 46 cm).



Telo schienale a tensione regolabile ora regolabile in altezza da 41 a 46 cm.



Il nuovo supporto più robusto della ruotina anteriore offre una migliore rigidità e un aspetto migliore (0°, 3° e 6°).



RubiX²

Vasta gamma di opzioni compresa una configurazione per emiplegici e schienali regolabili in angolazione e inclinazione; perfettamente compatibile con i sistemi di postura che permettono alla carrozzina di soddisfare le necessità di un'ampia gamma di utenti.



Nuovo look moderno e robusto per la crociera a 3 braccia.



Schienale a tensione regolabile, a 4 fasce di Velcro, regolabile in altezza da 41 a 46 cm.

XFamily²

RubiX² XL

La RubiX² XL amplia la gamma di utenti a coloro che sono in sovrappeso offrendo una larghezza di seduta fino a 60 cm con una portata massima di 170 kg.



Il nuovo supporto più robusto della ruotina anteriore offre una migliore rigidità e un aspetto migliore (0°, 3° e 6°).



Crociera a 4 braccia robusta ed affidabile.



Freno a tamburo (optional).



Relax²TM

Design moderno,
comoda e funzionale.
Una carrozzina che
offre una soluzione
perfetta per la mobilità
ai propri utilizzatori
con la sua flessibilità,
personalizzazione
e ampia gamma di
opzioni.



Schienale reclinabile con continuità per un'ottima postura. Reclinazione da 0° a 35°. Basculamento da -3° a 25°.



Regolazioni della profondità di seduta con continuità per soddisfare le necessità future. Regolabile da 42 a 50 cm.



Nuove pedane elevabili migliorate per una funzionalità e un design migliori.

Accessori e seduta

La XFamily² dispone di un'ampia gamma di opzioni, personalizzazioni e regolazioni.



Maniglie di spinta regolabili in altezza



Schienale reclinabile (regolabile con continuità di 30°)



Schienale abbattibile a metà



Ruotine antiribaltamento (swing away; regolabili)



Freno a tamburo



Braccioli a montante singolo regolabili in altezza con imbottiture corte e lunghe (scorrevoli)



Pedane elevabili



Barra stabilizzatrice pieghevole




Supporto per amputati



La XFamily² è disegnata in modo tale che l'utente possa avere il miglior comfort con sedute e schienali diversi. Con la gamma Jay è possibile ottimizzare la soluzione posturale individuale adattandola all'utente grazie all'ampia scelta di cuscini e schienali.

Cuscini JAY

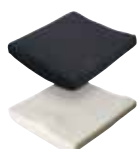

Jay Basic



Jay Soft
Combi P



Jay Easy
Visco



Jay Lite



Jay Care



Jay Duo



Jay Easy
Fluid



Jay Xtreme



Jay Active



Jay J2 Plus



Jay GS



Jay J2



Jay J2 DC



Jay J3

Schienali JAY



Jay Care



Jay J2



Jay J2 Tall



Jay J2 DC




Jay J3

La Breezy XFamily²!

Specifiche tecniche



	Breezy UniX²	Breezy Basix²
Larghezza seduta	38 - 50 cm	38 - 52 cm
Profondità seduta	42 cm	43,5 cm (41 - 46 cm, regolabile)
Altezza seduta	47 - 51 cm	42,5 - 51 cm
Inclinazione della seduta	3°	da 0° a 6°
Altezza schienale	40 - 42 cm	43,5 cm (41 - 46 cm, regolabile)
Inclinazione dello schienale	12°	12° (7° - 30° con schienale reclinabile)
Pendenza massima	10°	10°
Regolazione del Centro di gravità	-	da 5 cm a -5 cm
Telo schienale regolabile	-	sì
Braccioli	imbottiture corte e lunghe	regolabili in altezza con imbottiture corte e lunghe
Colore	Grigio	Grigio
Peso	da 18 kg	da 14,9 kg
Portata massima	125 kg	125 kg



	Breezy RubiX²	Breezy RubiX² XL	Breezy Relax²
	38 - 52 cm	52 - 60 cm	41(37 - 43), 46(42 - 48), 51(47 - 53) cm, 53 cm versione XL)
	41 - 51 cm	41 - 51 cm	42 - 50 cm
	37,5 - 53 cm	37,5 - 51 cm	42,5 - 50 cm
	da 0° a 6°	da 0° a 6°	0° to 25° / -3°- 22°
	43,5 cm (41 - 46 cm, regolabile)	43,5 cm (41 - 46 cm regolabile)	55 - 60 cm
	12° (da -5° a 20° con schienale regolabile in angolazione)	12° (da -5° a 20° con schienale regolabile in angolazione)	da 0° a 35°
	10°	10°	10°
	da 5 cm a -5 cm	da 5 cm a -5 cm	-
	sì	sì	-
	regolabili in altezza con imbottiture corte e lunghe scorrevoli	regolabili in altezza con imbottiture corte e lunghe scorrevoli	regolabili in altezza, profondità, scorrevoli
	Grigio, Blu, Rosso	Grigio, Blu, Rosso	Grigio
	da 15,5 kg	da 16,8 kg	da 34 kg
	125 kg	170 kg	145 kg (170 kg versione XL)



 **Breezy**[®]
Premium products. Quality service.

Tutti i prodotti Breezy XFamily² sono testati secondo la normativa ISO 7176-19 e sono pertanto approvati per il trasporto in auto di una persona mentre è seduta sulla carrozzina.



 **SUNRISE**
MEDICAL.

PB_BREEZY_XFAMILY2_it_IT_REV1

Sunrise Medical s.r.l.

via Riva, 20 - Montale

29122 Piacenza

Tel.: 0523 573111

Fax: 0523 570060

www.SunriseMedical.com