

The logo for QUICKIE, featuring a stylized orange swoosh above the word "QUICKIE" in a bold, white, sans-serif font. Below the brand name is the tagline "Live without limits." in a smaller, white, sans-serif font.**QUICKIE**
Live without limits.

XENON®

La carrozzina pieghevole più leggera del mondo



XENON®

Il telaio minimalista a profilo ovale, unito alla crociera brevettata dal design rivoluzionario, dà alla Quickie Xenon uno stile davvero innovativo ed un aspetto molto attivo.



La carrozzina **PIEGHEVOLE** più leggera **del mondo!** **8,4 Kg*** di altissima tecnologia.



Laura Rampini - La prima paracadutista paraplegica della storia!

Per creare Xenon, **la più leggera carrozzina pieghevole del mondo**, Quickie® ha combinato la più moderna tecnologia per modellare l'alluminio, una grande capacità di progettazione ed un design all'avanguardia.

Con i suoi **8,4 Kg*** ed il nuovo sistema di chiusura, Xenon è molto facile da piegare, sollevare e trasportare. E' stata inoltre disegnata per ottenere quello stile minimalista che ci si aspetta da una carrozzina rigida.

Grazie al design esclusivo ed alla tecnologia innovativa, Xenon offre, oltre alla leggerezza, **una grande maneggevolezza ed un'ottima efficienza di spinta** che permette un grande risparmio di energie.


Xenon sembra una carrozzina rigida con tutti i relativi vantaggi di performance, uniti però ai benefici di una carrozzina pieghevole. E' semplicemente perfetta per uno stile di vita attivo.



* Peso minimo in configurazione: 38 x 40 cm; telaio basso, spondine slim style, ruote Proton da 24" con corrimani in alluminio, ruotine anteriori da 3", schienale regolabile in angolazione, schienale fisso alto 35 cm con rivestimento ultraleggero, freno a forbice compatto superleggero,



Facile da piegare e leggerissima.
Perfetta per uno stile di vita attivo.

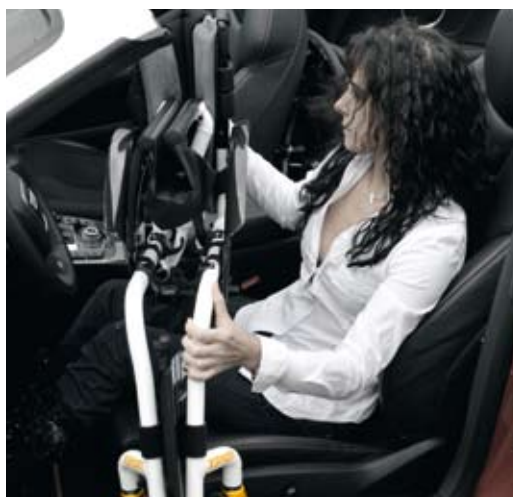

Con un peso minimo di **6 Kg** senza le ruote posteriori, Xenon rivoluziona il modo di trasportare e di sollevare una carrozzina.

Grazie al **nuovo sistema brevettato di chiusura Dynamic Folding System**, Xenon può essere piegata in pochi secondi con una sola mano.

Quando piegata, la crociera si blocca automaticamente grazie al nuovo sistema brevettato **Quickie® Locking System**.

La crociera è stata abilmente posizionata sotto la seduta, in modo da ottenere un telaio aperto ed estremamente pulito, dallo stile minimalista tipico di una carrozzina rigida.



Xenon è protetta legalmente perché rimanga unica per te.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale riservati
1080 618
001 080 733
EP 180 9532 A2

Proprietà intellettuale in attesa di riconoscimento
PCT/ EP2008/ 011015
EP 0915 1773.0
EP2008/ 011017
EP10196521
EP10195017
DE102011 000 030.5

In foto Xenon con schienale abbattibile a metà (optional)

Gli Ambassador di Quickie Laura Rampini e Filippo Landi viaggiano con la loro Xenon in tutto il mondo. Per maggiori informazioni sulla loro vita straordinaria e sulle loro conquiste visitate il sito www.quickiewheelchairs.eu/xenon.



Più liberi ed indipendenti con Xenon...

Live without limits.

XENON®





L'innovativa crociera rende facile piegare la carrozzina ed è stata disegnata per dare tutto lo stile di una carrozzina rigida .

Scegliete tra un'ampia gamma di opzioni per creare la vostra Xenon e tra più di 20 colori per personalizzare ogni componente in ogni combinazione. Scegliete poi tra un ampio range di rivestimenti ultraleggeri e confortevoli per creare la vostra carrozzina, veramente unica.



Sistema di blocco Quickie® Locking System in chiusura della carrozzina

Questo innovativo sistema brevettato rende la Xenon facile da gestire e fa sì che l'ingombro della carrozzina da chiusa sia davvero ridottissimo.



Regolazione dell'angolo dello schienale

Xenon offre eleganti soluzioni per lo schienale che si integrano perfettamente con il telaio. Lo schienale può essere fisso a 90° o regolabile in angolazione da -15° a +18° con incrementi di 3° misurati rispetto al telaio.



Piastra di regolazione superleggera

Allentando solo una vite per parte, ruotando e scambiando i manicotti asimmetrici dalla parte destra alla parte sinistra si ottiene una variazione di 2 cm del centro di gravità.



Piastra di regolazione standard

Offre due posizioni del centro di gravità, campanatura a 0°, 2° e 4° e altezza della ruota regolabile. Leggerissima, composta da un perno unico, si regola velocemente grazie a due sole viti.




Meccanismo di chiusura automatica della pedana

Garantisce all'utente semplicità, infatti la pedana si piega automaticamente a libro insieme alla Xenon. La pedana ha un look moderno ed è arrotondata; è disponibile con la pedana in materiale composito o in fibra di carbonio.



Pedana unica ribaltabile

Disponibile in alluminio (Xenon Performance), in materiale composito ed in carbonio. Oltre ad offrire la massima leggerezza, garantisce il massimo spazio per i trasferimenti grazie al meccanismo di ribaltamento da un lato.

A close-up photograph of a bicycle's front end. The head tube is white with yellow and white curved graphics. The fork is orange with a complex, lattice-like structure. The front wheel is partially visible on the right. The background is dark and out of focus.

L'invisibile sistema di regolazione delle forcelle è un meccanismo brevettato che nasconde la regolazione angolare e di convergenza della forcella all'interno del tubolare di montaggio.

Facile regolazione, prestazioni eccellenti e stile rigoroso!

Scegliete tra tanti teli leggerissimi e confortevoli per creare la vostra carrozzina davvero unica. Visitate il configuratore dei colori per creare la vostra Xenon personalizzata su www.quickiewheelchairs.eu/xenon.



Schienale abbattibile a metà

Ancora più facile da trasportare con lo schienale abbattibile a metà (optional) che rende la carrozzina compattissima.



Innovativa scelta per il telo schienale

Scelta tra il telo ultraleggero per ridurre il peso di 130 g, il rivestimento imbottito traspirante e quello in alcantara. Traspiranti, regolabili, confortevoli ed eleganti!



Sistema dinamico per piegare la carrozzina

Permette di aprire la carrozzina facilmente con una sola mano dopo la pressione di una leva.



Freni ergonomici compatti

Minimalistici e facili da utilizzare, questi freni possono essere fissati direttamente sul telaio (solo per ruote con campanatura a 0° e 2°). Facili anche per tetraplegici.



Ruote Proton ad estrazione rapida

Il peso totale di ruote, corrimani, assi e pneumatici Schwalbe Speedrun è di solo 2,25 Kg al paio, oltre un Kg in meno rispetto alle ruote tradizionali.




Forcelle ammortizzate Frog Legs®

Le forcelle Frog Legs® assorbono le vibrazioni e i colpi che si subiscono continuamente durante l'utilizzo della carrozzina. Garantiscono maggior comfort ed evitano problemi di stanchezza e dolore che nel lungo periodo si potrebbero avere.

XENON®

Dati tecnici

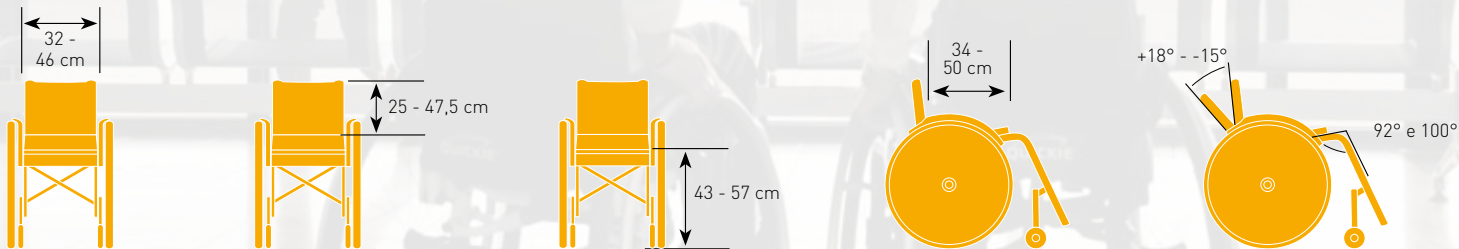

Larghezza seduta	32 - 46 cm	Altezza posteriore della seduta	40 - 50 cm
Profondità seduta	34 - 50 cm	Angolo della seduta	0° - 12°
Altezza schienale	25 - 47,5 cm	Angolo del telaio	92° e 100°
Angolo schienale	da -15° a +18°	Peso	da 8,4 kg
Altezza anteriore della seduta	43 - 57 cm	Portata massima	125 Kg

Pacchetto Neutron

da **10,8 kg**

Include pedana unica "Xenon performance", spondine diritte in alluminio con bordo avvolgente e ruote superleggere

Pacchetto Proton

da **9,1 kg**

Include il pacchetto Neutron più le ruote Proton, freni compatti superleggeri e pedana con chiusura automatica in materiale composito

Pacchetto Electron

da **8,85 kg**

Include ruote Proton, freni compatti superleggeri, spondine diritte in fibra di carbonio con bordo avvolgente, pedana in carbonio con meccanismo di chiusura automatica, schienale ad angolazione regolabile con tubi fissi in fibra di carbonio e telo schienale traspirante



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia

Tel.: +39 0523 573111

Fax: +39 0523 570060

E-Mail: info@sunrisemedical.it

www.SunriseMedical.com