

EMINEO

Il sistema polifunzionale che combina comfort e funzionalità

EMINEO è un sistema polifunzionale con caratteristiche uniche di maneggevolezza, funzionalità e comfort.

Il suo telaio, infatti, risulta essere estremamente scorrevole e stabile grazie ad un innovativo sistema che permette di spostare automaticamente il baricentro a seconda del grado di basculamento, ottimizzando così le potenzialità di autospinta residue dell'utente, lo schienale, inoltre, si regola automaticamente di 8° seguendo il basculamento ed assicurando il massimo comfort nell'arco della giornata.

EMINEO è anche ... autonomia

La particolarità che distingue EMINEO dagli altri sistemi polifunzionali è data dallo speciale meccanismo di basculamento che può essere azionato dall'assistente, ma anche dall'utente stesso che con un semplice gesto può autonomamente decidere il grado di basculamento nei diversi momenti della giornata.

Inoltre, lo schienale a velcro è tensionabile direttamente con l'utente seduto in carrozzina e la particolare conformazione di questa struttura consente di distribuire omogeneamente la tensione dei singoli nastri, distribuendo così anche le pressioni esercitate sulla schiena del paziente. Lo schienale è rivestito da una speciale imbottitura contenitiva che assicura il massimo comfort di seduta.

Ovunque con EMINEO

Con soli 24 kg di peso (seduta 39 cm di larghezza) EMINEO risulta un prodotto versatile, leggero e robusto allo stesso tempo, con una portata massima fino a 135 kg. EMINEO, inoltre, è stata sottoposta a crash test ed è omologata in accordo con la normativa ISO 7176-19 per il trasporto in auto con il paziente seduto sull'ausilio.



**OMOLOGATA
PER IL TRASPORTO
IN AUTO SECONDO
ISO 7176-19**

Caratteristiche

Emineo è un sistema polifunzionale progettato come risposta alle diverse esigenze di utenti ed operatori: terapisti, infermieri, tecnici ortopedici...

Punto di forza di EMINEO è il suo sistema tecnologicamente innovativo ed unico nella sua categoria: l'autobasculamento manuale.

La persona può basculare la carrozzina da sola senza l'intervento dell'assistente! Migliore autonomia minore carico assistenziale.

Con discreta forza di braccia, oppure con un residuo controllo del tronco, l'utente può modificare autonomamente la sua posizione, variando l'inclinazione del piano di seduta (basculamento) ed il reclinamento dello schienale, semplicemente agendo sulla leva posta sotto il bracciolo destro o sinistro. L'utente può così avere la piena autonomia nell'assumere posizioni di rilassamento o posizioni più dinamiche ed attive, senza l'aiuto dell'assistente o dell'accompagnatore. (In ogni caso, è sempre possibile montare la leva che aziona il meccanismo sul maniglione di spinta dell'accompagnatore).

Questo sistema regola automaticamente l'inclinazione dello schienale, aprendo o chiudendo l'angolo di 8°. (Un sistema di regolazione indipendente dello schienale, servoassistito da un pistone a gas, può essere richiesto come optional). Questo sistema assicura massimo comfort per l'utente poichè permette di variare le pressioni di contatto in maniera opportuna, distribuendole su diverse superfici ed assicurando un grande senso di stabilità ed un eccellente confort. Inoltre, l'apertura controllata dell'angolo dello schienale previene quegli atteggiamenti negativi che possono tradursi nello "scivolamento" della persona sul supporto, con retroversione dell'anca ed aumento della cifosi dorsale.



Prevenire e diminuire le forze di taglio e attrito, distribuire e ri-distribuire le pressioni di contatto su una superficie traspirante significa evitare il disagio ed il dolore causati da stiramenti e da compressioni prolungate dei tessuti sotto-cutanei e della pelle e quindi, soprattutto, diminuire il rischio di insorgenza di lesioni da decubito.

La seduta realizzata con il cuscino Contur assicura comfort elevato, buona praticità ed eccellente stabilità grazie ad una forma ergonomica e alla particolare elasticità dei materiali che lo compongono (per maggiori informazioni contattare il nostro Ufficio Formazione).

Lo schienale tensionabile offre in maniera immediata una sensazione di contenimento e benessere grazie alla sua struttura particolare ed all'imbottitura. La facilità di personalizzazione del supporto, anche con il paziente seduto, è una delle caratteristiche di EMINEO maggiormente apprezzata dagli assistenti. Infatti, tutte le regolazioni del sistema sono state semplificate per agevolare al massimo il lavoro degli assistenti senza diminuire l'efficacia di ognuna di esse. La presenza di scale numerate rende più puntuali alcune regolazioni quali quella dell'altezza delle pedane e del sedile. Tutto ciò facilita anche ogni operazione di riadeguamento dell'ausilio rendendo semplice e più efficace il necessario follow up. Altre soluzioni per lo scorrimento continuo ("stepless") possono essere richieste come optional: la regolazione telescopica delle forcelle anteriori, la piastra d'inserrimento delle ruote posteriori.

**Facilmente adattabile,
facilmente sanificabile,
facilmente riutilizzabile
da persone diverse**

Emineo "veste" Contur

Emineo di serie viene fornita con l'unità di seduta realizzata con il cuscino Contur, un supporto in espanso viscoelastico compatto realizzato a stampo con forma anatomica, sfoderabile e traspirante.

Il cuscino Contur ha forma anatomica per seguire le forme della persona, assicurare comfort e stabilità; inoltre, 2 incavi nella parte posteriore permettono l'inserimento nel cuscino senza intralci sui tubi della carrozzina.



Unità posturale tronco/bacino Smart-sit

L'unità posturale tronco/bacino **Smart-sit**, applicabile come optional ad EMINEO, consiste in uno speciale schienale tensionabile con fasce a regolazioni indipendenti che permettono di personalizzare in senso antero posteriore, latero-laterale e obliquo posteriore le spinte ed i sostegni del supporto dorsale.

La personalizzazione è semplice da attuare anche con il paziente seduto sull'ausilio; il supporto dorsale assicura la massima stabilità e contenimento del tronco.

Smart-sit è estremamente adattabile ed offre i sostegni adeguati al tronco in caso di deformità o di patologie già strutturate. Smart-sit previene atteggiamenti posturali scorretti con conseguente fissazione di asimmetrie o deviazioni della colonna in caso di muscolatura ipotonica o di insufficiente controllo posturale del tronco.

L'unità posturale tronco/bacino Smart-sit viene fornita con un sistema di regolazione indipendente dello schienale che può essere servoassistita da un pistone a gas.

Allo scopo di ottimizzare la personalizzazione dell'ausilio e di facilitare l'intervento dell'operatore la configurazione EMINEO Smart-sit viene fornita con una serie di regolazioni particolari denominate ONE-TOOL ovvero regolazioni che richiedono una sola chiave per modificare l'assetto dell'ausilio.

Scale numeriche aiutano a trovare in maniera immediata e sicura l'assetto desiderato.



Fasce a regolazioni indipendenti permettono di personalizzare perfettamente il supporto su misura della persona.



Funzionalità e grande scorrevolezza

Il termine richiama subito l'attenzione sulla facilità di autospinta, anche in assetto neutro (cioè senza anticipare il posizionamento delle ruote posteriori): pur essendo un vero, completo sistema di seduta polifunzionale, dotato di molteplici regolazioni, di imbottiture confortevoli e di un innovativo ed esclusivo sistema di basculamento che consente all'utente di variare anche autonomamente l'inclinazione del piano di seduta e conseguentemente l'assetto posturale complessivo, EMINEO conserva una scorrevolezza propria delle più "agili" e leggere carrozzine. Possiamo a ragione dichiarare che EMINEO è il sistema polifunzionale basculante più "scorrevole" oggi sul mercato. Un ausilio come EMINEO invita la persona che lo utilizza a vivere attivamente tutta la giornata, stimolandone la migliore autonomia possibile. E' certamente un elemento fortemente positivo per i caregiver ma lo è ancora di più per l'utilizzatore che ritrova il gusto di fare da sé.



Il vero obiettivo di EMINEO è favorire l'autonomia.


Autonomia che significa potersi spostare senza nessuna fatica: una delle più stupefacenti caratteristiche di EMINEO è la grande scorrevolezza, che la rende agile come le più scattanti carrozzine leggere, pur essendo un vero e completo sistema di seduta polifunzionale.

Autonomia che significa poter cambiare posizione da soli, senza richiedere l'aiuto dell'assistente. Con grande facilità, azionando una levetta posta sotto ad un bracciolo, basculamento e regolazione dello schienale possono essere modificati per la ricerca di una posizione più attiva o più rilassata, per prevenire le lesioni da decubito o anche, semplicemente per avere maggiore confort.

Autonomia che significa sentirsi più "vivi" e quindi più disponibili a fare da se e a stare con gli altri. Inoltre EMINEO è un prodotto testato ed approvato dai più severi istituti di controllo, in conformità alle normative europee. EMINEO è stato sottoposto al "crash-test" ed omologato per il trasporto di persone in auto, in conformità alle norme ISO 7176-19.



EMINEO: Scheda dimensionale

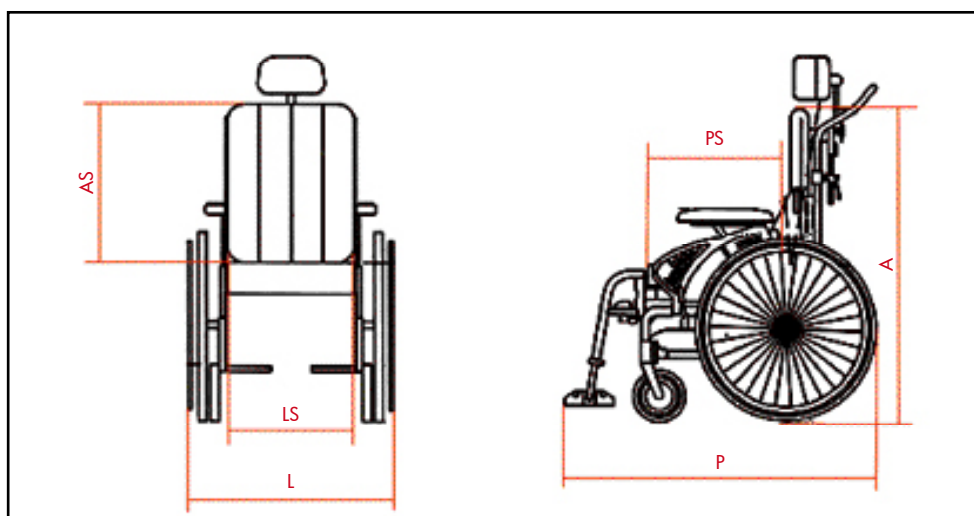

RIFERIMENTI		MISURE	MISURE	MISURE
LS	Larghezza seduta	39, 42, 45, 48, 51	42 SHORT	33, 36
PS	Profondità seduta	39 ÷ 45	34 ÷ 40	34 ÷ 40
	Altezza schienale	50 ÷ 60	50 ÷ 60	50 ÷ 60
	Altezza seduta posteriore	35,5 ÷ 53,5	35,5 ÷ 53,5	35,5 ÷ 53,5
	Altezza seduta anteriore	36 ÷ 48	36 ÷ 48	36 ÷ 48
	Altezza maniglione di spinta	90 ÷ 100	90 ÷ 100	90 ÷ 100
	Altezza bracciolo	23 ÷ 33	23 ÷ 33	23 ÷ 33
A	Altezza totale	115	115	115
L	Larghezza totale "one tool"	Larghezza seduta + 23	Larghezza seduta + 23	Larghezza seduta + 23
L	Larghezza totale "basic"	Larghezza seduta + 20	Larghezza seduta + 20	Larghezza seduta + 20
P	Profondità	100	100	100
L	Larghezza totale ripiegata	Larghezza seduta + 14,5	Larghezza seduta + 14,5	Larghezza seduta + 14,5
	Altezza ripiegata	71	71	71
	Basculamento (standard)	- 5° ÷ 20°	- 5° ÷ 20°	- 5° ÷ 20°
	Inclinazione schienale (standard)	85° ÷ 100°	85° ÷ 100°	85° ÷ 100°
	Peso (kg)	24	24	24
	Peso per trasporto (kg)	17	17	17
	Portata massima (kg)	140	140	140

Misure espresse in centimetri