

Relax²





**Resistente, comoda e dal
design moderno**



Gestione semplice...

- In alluminio resistente ed affidabile.
- Parti di ricambio ed accessori in comune intercambiabili nella famiglia XFamily (UniX, BasiX, RubiX e RelaX²)

Regolabile...

Altezza seduta, profondità seduta e altezza schienale regolabili, braccioli regolabili in lunghezza ed altezza; reclinazione e basculamento regolabili con continuità. La RelaX² si adatta alle esigenze dell'utente permettendo di provarla facilmente e garantendo un grandissimo comfort.



Schienale reclinabile con continuità per un'ottima postura. Reclinazione da 0° a 35°. Basculamento da -3° a 25°.



Regolazioni della profondità di seduta con continuità per soddisfare le necessità future. Regolabile da 42 a 50 cm.



Maniglione di spinta regolabile in altezza: facile da regolare per un migliore comfort dell'accompagnatore e per una maggiore semplicità di gestione.

Confortevole...

Breezy RelaX² mantiene una corretta postura e assicura una equilibrata distribuzione della pressione. Schienale anatomico sagomato con buon contenuto laterale per una posizione seduta sicura e confortevole, anche per utenti con un controllo ridotto della parte superiore del corpo. La seduta anatomica sagomata con lieve abduzione e leggero contenimento laterale offre una seduta profonda e confortevole. La sagomatura del cuscino con l'abduzione centrale e l'avvallamento per le cosce tengono le gambe in una posizione corretta evitando lo scivolamento in avanti.



Tavolino con imbottiture per gomito (opzione).



Appoggiatesta a 3 sezioni estraibile regolabile con possibilità di regolazione laterale (opzione).



Supporto regolabile per il tronco. Facile da gestire (opzione).

Configurabile...

- Ruote piene da 24" e 22"
- Ruote posteriori da 16" (solo con freno a tamburo)
- Freno a tamburo
- Tavolino con imbottiture per gomito

- Cuneo abduttore
- Supporti regolabili per il tronco
- Appoggiatesta a 3 sezioni
- Cintura di posizionamento








- Supporto per amputato
- Distanziali per braccioli
- Bracciolo per emiplegico



Relax²

Resistente, comoda e dal design moderno

Relax²:

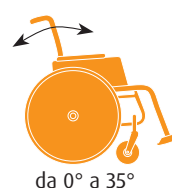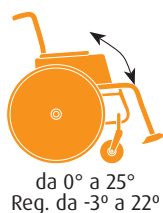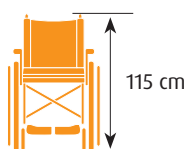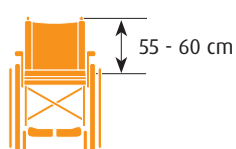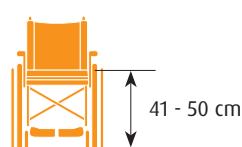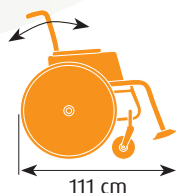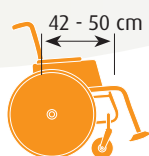

Dati tecnici

Colore telaio:	grigio argento	Peso della parte più pesante:	18 kg
Colore rivestimento:	grigio scuro	Pendenza massima superabile (con antiribaltamento):	10°
Portata massima:	130 kg	Raggio di sterzata massimo:	96 cm
Peso:	da 34 kg		

Per maggiori informazioni su specifiche tecniche, opzioni ed accessori fare riferimento alla scheda d'ordine.
Tutte le informazioni possono essere soggette a modifiche senza notifica. Contattare Sunrise Medical per ogni dubbio.
Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.com.



pb_Relax2_it_IT_REV2

Sunrise Medical S.r.l.

via Riva, 20 - Motale
29122 Piacenza

Tel.: +39 0523 573111

Fax: +39 0523 570060

www.SunriseMedical.com