



Evolution™ PSV

Il cuscino per utenti con un elevato rischio di decubito e con esigenze di posizionamento simmetrico



1. Air-Foam Floatation

Le aree funzionali del cuscino sono create da tre tipi di schiuma: la schiuma morbida per la zona maggiormente sensibile delle tuberosità ischiatiche; schiuma a media densità per l'area di supporto principale; schiuma più resistente per il perimetro e il supporto mediale.

2. Supporto posturali

Il corretto posizionamento migliora la stabilità, molto importante per gli utenti con funzionalità limitata e in caso di trasferimenti frequenti. Il materiale espanso a densità differenziata fornisce ottimo supporto all'utente immerso nel cuscino. I supporti mediali e laterali riducono al minimo l'intra e l'extra rotazione dei femori. La sagomatura aiuta a mantenere l'immersione della pelvi e delle cosce stimolando una posizione neutra dei femori.

3. Rivestimento

Tessuto elasticizzato a quattro vie per seguire la conformazione del bacino durante l'immersione. I tessuti sono resistenti all'acqua e alle forature.

4. Valvola PSV, il sistema automatico per la regolazione del cuscino!

Evolution è completo della rivoluzionaria valvola con sistema PSV.

5. Fodera

Evolution è disponibile con fodera mesh traspirante o con fodera per incontinenza elastica.


6. Cuneo

Un cuneo in schiuma rigida a cellule chiuse è disponibile come accessorio.

Caratteristiche di distribuzione della pressione superiori, stabilità, posizionamento, comodità e la semplicità hanno fatto di Evolution uno dei cuscini per carrozzina più popolari. Con l'aggiunta dell'innovativa valvola PSV di VARILITE è stato creato un prodotto ancora più performante, Evolution PSV. Il sistema di fluttuazione aria-schiuma VARILITE rende il cuscino Evolution PSV molto leggero, senza compromettere le caratteristiche di distribuzione della pressione e di supporto.

I terapeuti consigliano Evolution PSV per gli individui con disfunzione neurologiche dovuta a lesioni midollari, ictus, sclerosi multipla, paralisi cerebrali e traumi cranici. I terapeuti apprezzano le caratteristiche di distribuzione della pressione e il sostegno posturale di Evolution PSV.

Gli utenti e gli operatori sanitari apprezzano il peso ridotto, il comfort e la facilità d'uso. Per l'utilizzo non necessita di pompe per il gonfiaggio o altri accessori. Nessuna necessità di manipolare o rimodellare i materiali.

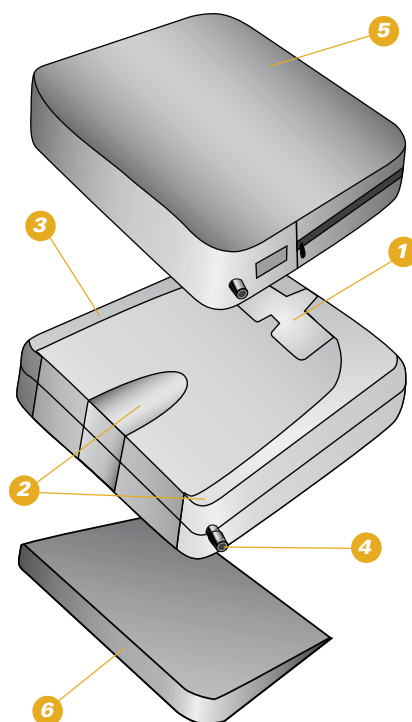

CARATTERISTICHE

		LARGHEZZA cm									
		20	30	35	38	40	43	45	50	55	60
PROFONDITÀ cm	30	*	*	*							
	35			*		*		*			
	38				*		*				
	40					*		*	*		
	43						*				
	45					*		*	*		
50					*		*	*			

• Protezione cutanea:	Medio-Alto
• Posizionamento:	Medio
• Valvola:	PSV
• N° Camere:	Singola
• Altezza:	9,6 cm
• Peso:	1 Kg
• Portata massima:	136 Kg