

## SOLETTA DI SCARICO

### INDICAZIONI:

- scarico localizzato della zona ulcerata;
- copertura in **DIAPOD** dermocompatibile, battericida e fungicida (Gold Standard per rivestimento);
- eccellente complemento per le calzature Stabil-D e Tera Diab.

### CARATTERISTICHE:

- assemblaggio multistrato con tasselli asportabili;
- base in Evaform 167 per assicurare la stabilità ed il trasferimento di pressione;
- EVA a bassa densità per attutire le asperità;
- spessore di soli 15mm.




CODICE	MISURA
<b>PL345</b>	<b>35-48</b> ogni 2 taglie



Indicata per:

**DIABETICO**  
**FASE ACUTA**

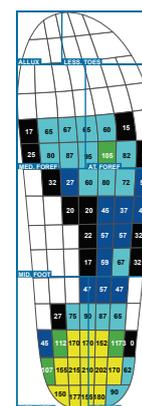

kPa

300.00
220.00
150.00
100.00
60.00
40.00
15.00

## PLANTARE ZERO

### INDICAZIONI:

- messa in talismo (8°) del piede;
- scarico dell'avampiede;
- soluzione semplice e funzionale per lo scarico dell'avampiede senza creare problemi di stabilità;
- eccellente complemento per Tera Diab.

### CARATTERISTICHE:

- permette il trasferimento delle pressioni dall'avampiede al tallone;
- maggiore densità al tallone per assicurare il talismo e la stabilità di marcia;
- avampiede automodellante e personalizzabile.



CODICE	MISURA
<b>PL060</b>	<b>35-48</b> ogni 2 taglie