

I Deambulatori



“Per diventare grandi, a piccoli passi...”

L'esplorazione dell'ambiente circostante è un'attività fondamentale per lo sviluppo del bambino. Per i bambini che non possono muoversi autonomamente lo strumento ideale per stimolarli in questo tipo di attività è il deambulatore *Miniwalk*. Con un ampio range di regolazioni *Miniwalk* è adattabile alle diverse fasi della crescita e favorisce la postura eretta e le facoltà cognitive del bambino.

Disponibile in due misure, può essere utilizzato per bambini di età compresa tra 1 anno e mezzo e 7 anni.

DEAMBULATORI:



Miniwalk

Miniwalk

Il deambulatore ideale per bambini tra i 18 mesi ed i 7 anni

Nel caso in cui il bambino necessiti di un sostegno per camminare *Miniwalk* è la soluzione ideale. Le innovative sospensioni a molle sono in grado di stimolare i muscoli inducendo i movimenti tipici di un'andatura naturale. Grazie a questo sistema di ammortizzatori è dimostrato che il bambino con disabilità mentali è più stimolato a muoversi, tendendo quindi ad avere più consapevolezza del proprio corpo e traendone benefici immediati.

L'anello toracico e l'impugnatura anteriore sono in acciaio rivestito con un'imbottitura morbida ed idrorepellente

Le molle sono disponibili in tre versioni a seconda del peso del bambino e riconoscibili in base al colore

La struttura è resistente e leggera, realizzata in acciaio trattato con polveri epossidiche e galvanizzazione elettrica



Le ruote sono in gomma piena antiforatura, quelle anteriori sono orientabili mentre quelle posteriori sono fisse (con freno)

Un prodotto:

meyland-smith
specialized medical equipment

Distribuito in esclusiva da Medimec International® srl

Caratteristiche principali

- Disponibile in due misure;
- Favorisce un andamento più naturale e corretto del corpo grazie alle sospensioni a molle;
- Per uso sia interno che esterno;
- Freno posteriore;
- Supporto toracico e seduta regolabili in altezza;
- Impugnatura regolabile nell'inclinazione;
- Cresce con il bambino;
- Disponibile nel colore Turchese.




Seduta.

Sostiene il bambino e lo aiuta a tenere la posizione eretta



L'anello toracico.

È disponibile in due misure in base alla circonferenza toracica (70 e 90 cm)

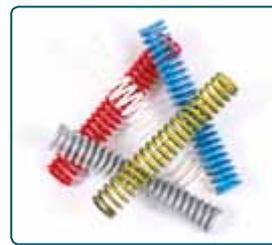

Sospensioni a molle.

Permettono al deambulatore di reagire ai movimenti, i muscoli del bambino vengono così stimolati favorendone lo sviluppo. Da 10 a 15 kg (verdi); da 15 a 20 kg (argento); da 20 kg (nere)

Configurazione base

- Stabilizzatore mobile in posizione eretta;
- Dispositivo di freno;
- Sostegno per arto superiore;
- Divaricatore.

Riconducibilità codici ISO

03.48.21.081; 03.48.21.201; 03.48.21.204; 03.48.21.207.

Attenzione. I codici ISO citati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore.

Dati tecnici

Modello	Misura 1	Misura 2
Larghezza seduta	65 cm	65 cm
Lunghezza	74 cm	74 cm
Altezza seduta da terra	31 - 49 cm	31 - 64 cm
Altezza anello toracico	56 - 73 cm	71 - 88 cm
Portata	40 kg	40 kg
Peso	15 kg	15 kg

Tutte le dimensioni sono espresse in larghezza per altezza per profondità; ant. = anteriore; pos. = posteriore. Tolleranze $\pm 1,5$ cm. La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso

Accessori

Per i prodotti:

meyland-smith
MEYLAND SMITH



Dispositivo anti-retromarcia



Divisorio gambe



Divisorio gambe



Guide esterne per piedi



Guide esterne per piedi



Ruota antiribaltamento



Supporti per anche

