

STABILIZZATORE DI ROTULA - LCM LCL CON FORO

Art. 042

Stabilizzatore di rotula estremamente funzionale ma molto confortevole e pratico da utilizzare, grazie all'utilizzo dell'esclusivo tessuto anallergico e traspirante, 100% cotone sulla pelle e all'innovativa tecnologia di chiusura sviluppata e brevettata da PAVIS. E' dotato di foro rotuleo che racchiude la rotula determinandone la stabilità. Sono incluse due tipologie di ASTE da inserire nelle apposite guaine laterali a seconda delle esigenze: Le ASTE multicentriche di alluminio, sagomate, assicurano una perfetta aderenza all'articolazione e garantiscono un efficace supporto laterale nei casi di associazione della patologia rotulea ad instabilità dei legamenti collaterali mediali e laterali; oppure le semplici ASTE SPIRALATE senza , senza snodo, nei casi in cui non sia necessario un supporto ai legamenti collaterali.




Indicazioni

- Patologie traumatiche: Sublussazione della rotula-Instabilità rotulea- Tendinite, post-fratture - Lievi distorsioni - Lassità articolare.
- Fase post-operatoria: azione contenitiva e protettiva.
- Fase riabilitativa: sostegno passivo alla riabilitazione e protezione nelle attività sportive.

Caratteristiche

Ambidestra. No Neoprene. Color Blu. Due tipi di aste: 1 paio spirilate e 1 paio con snodo multicentrico. Foro rotuleo. Sistema di chiusura a bande New Edge Line.

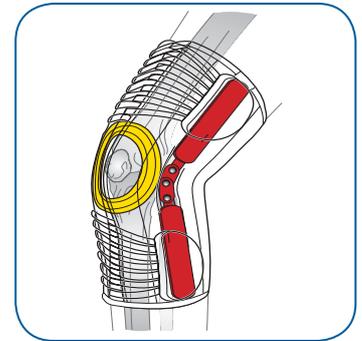

Benefici

Protezione confortevole a lunga durata grazie agli accorgimenti strutturali e al materiali utilizzati.

Particolare sistema di chiusura e regolazione New Edge Line

Componenti specifici

Per la sua realizzazione sono stati utilizzati due tipi di tessuto in abbinamento tra loro: un soffice velluto di cotone nella parte interna, estremamente confortevole e traspirante; all'esterno un particolare tessuto composto da una fitta rete di nylon formante tante asole vicinissime tra loro e molto resistenti al fine di permettere l'ancoraggio del velcro.



100% COTONE SULLA PELLE



New EDGE[®]
LINE

Size	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Circonferenza del ginocchio (10 cm sopra la rotula) CM	32-36	36-40	40-45	44-49	48-54	54-60	60-66

STABILIZZATORE DI ROTULA - LCM LCL CON FORO Art. 042

Come si indossa

Indossare a diretto contatto della pelle seguendo le seguenti istruzioni:

- nel caso in cui siano state inserite le aste multicentriche, assicurarsi che siano state posizionate correttamente: l'asta presagomata va posta nella tasca mediale; l'asta dritta in quella laterale.
- per indossare la stessa ginocchiera sull'altro ginocchio, è sufficiente invertire le due stecche tra loro;
- quindi aprire i velcri del sistema di chiusura;
- infilare la ginocchiera e centrare la rotula nel foro;
- chiudere le due allacciature tirando contemporaneamente le due parti di velcro di ciascuna chiusura applicando la forza desiderata.

