

STABILIZZATORE DI ROTULA E LCL-LCM

Art. 041

Supporto protettivo indicato nei casi in cui a patologie rotulee si associno instabilità dei legami collaterali mediale e/o laterale. L' esclusivo sistema di chiusura sviluppato da Pavis, consente di regolare la pressione distintamente in tre diverse aree. Due speciali cuscinetti a forma di "C" avvicinandosi tra loro durante l'operazione di chiusura delle stringhe centrali, racchiudono la rotula determinandone la stabilità. Questi cuscinetti sono amovibili e posizionabili singolarmente a seconda delle necessità per lateralizzare o medializzare la rotula. Grazie a particolari accorgimenti strutturali, sulla zona poplitea non viene esercitata alcuna pressione elastica. Lateralmente sono inserite due aste anatomiche, in alluminio, super leggere, dotate di uno snodo multicentrico, che danno stabilità all'articolazione, in presenza di lassità dei legamenti collaterali, mediale e laterale.




Indicazioni

- Patologie traumatiche: Sublussazioni della rotula - Instabilità rotulea - Tendiniti post fratture - Lievi distorsioni - Lassità articolare.
- Fase post-operatoria: Azione contenitiva e protettiva.
- Fase riabilitativa: Sostegno passivo alla riabilitazione - Protezione nelle attività sportive.

Caratteristiche

Due tipi di aste, 1 paio spiralate e 1 paio con snodo multicentrico. Cuscinetti a "C" estraibili. Ambidestra. No Neoprene.

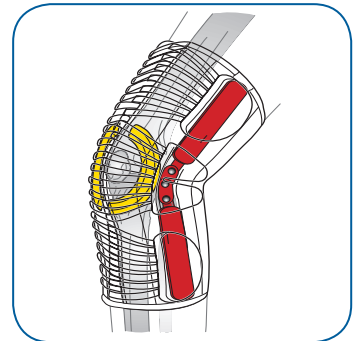


Benefici

Personalizzabile: possibilità di medializzare o lateralizzare la rotula e seconda delle esigenze grazie all' esclusivo sistema di chiusura e regolazione New Edge Line. Possibilità di differenziare il grado di pressione in tre diverse aree, con estrema semplicità.

Componenti specifici

Per la sua realizzazione sono stati utilizzati due diversi tipi di tessuto elastico in abbinamento tra loro: un soffice velluto di cotone nella parte interna, estremamente confortevole e traspirante; all'esterno un particolare tessuto composto da una fitta rete di nylon formante tante asole vicinissime tra loro e molto resistenti al fine di permettere l'ancoraggio del Velcro.

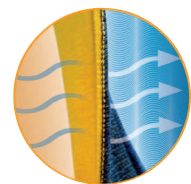

100% COTONE SULLA PELLE



New EDGE
LINE

Size	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Circonferenza del ginocchio (10 cm sopra la rotula) CM	32-36	36-40	40-45	44-49	48-54	54-60	60-66

STABILIZZATORE DI ROTULA E LCL-LCM Art. 041

Come si indossa

Indossare a diretto contatto della pelle seguendo le seguenti istruzioni:

- nel caso in cui siano state inserite le aste multicentriche, assicurarsi che siano state posizionate correttamente: collocare l'asta presagomata nella tasca mediale, l'asta dritta in quella laterale. Per indossare la stessa ginocchiera sull'altro ginocchio, è sufficiente invertire le due stecche tra loro (fig. 1);
- aprire i Velcri del sistema di chiusura;
- infilare la ginocchiera e posizionarla correttamente in modo tale che i cuscinetti a C circondino la rotula;
- chiudere le tre allacciature tirando contemporaneamente le due parti di velcro di ciascuna chiusura applicando la forza desiderata (fig. 2).

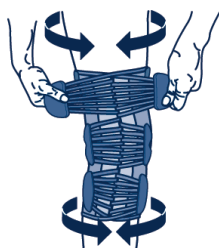


fig. 2

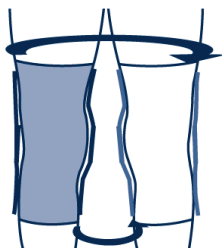


fig. 1

