



Montascale universale


Sicuro e confortevole sulle scale

c-max

www.aat-online.de



Ideen bewegen mehr

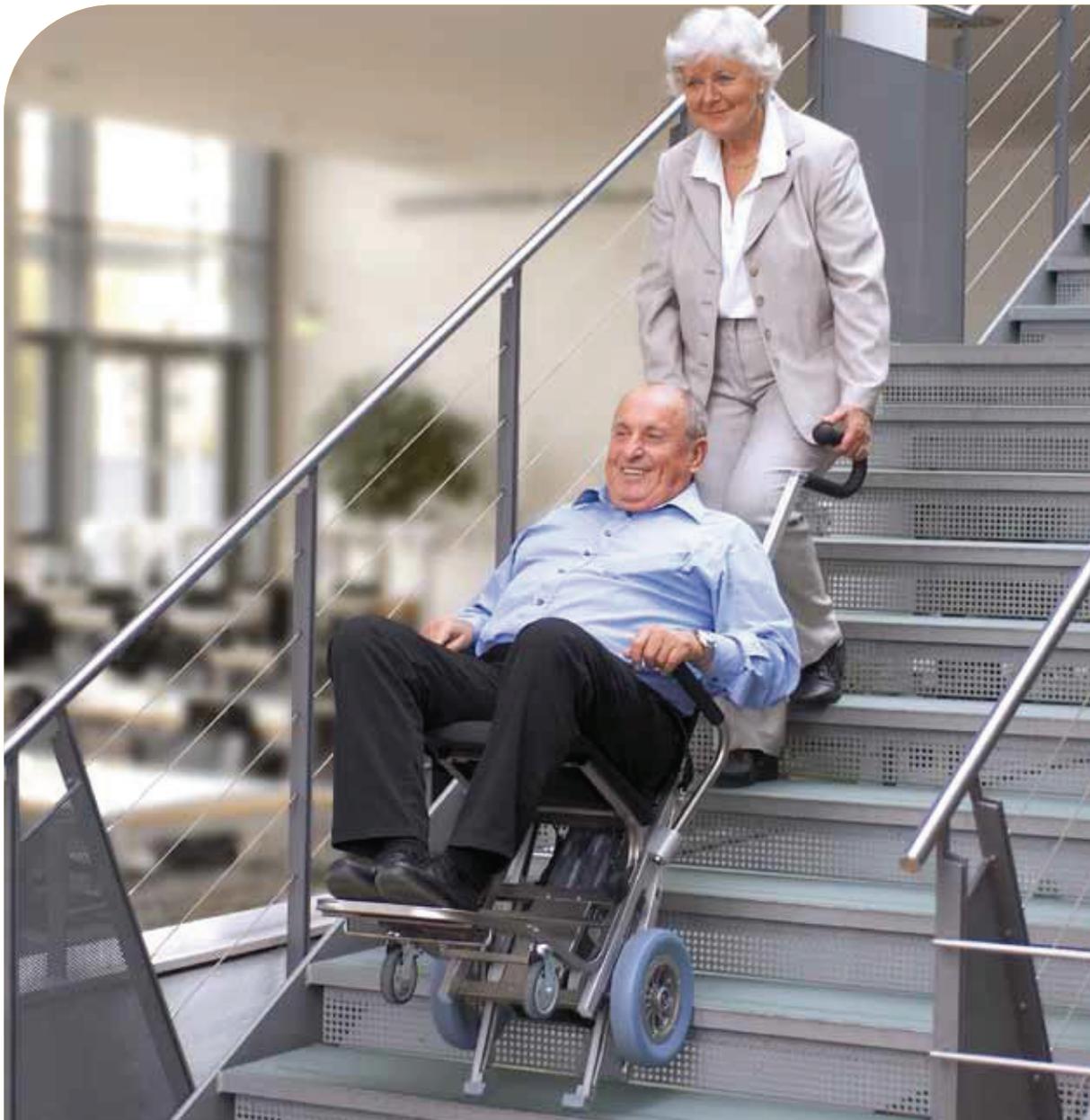

La mobilità è un aspetto molto importante della qualità della vita. Per questo motivo la sua libertà di movimento non deve essere limitata. Il montascale mobile c-max la aiuta ovunque sia a casa che all'esterno a superare le barriere architettoniche.

Il c-max permette facilmente e confortevolmente il superamento di qualsiasi tipo di scala anche stretta e a chiocciola.

L'avanzamento del c-max in fase di salita o discesa della scala, avviene per mezzo di un innovativo cinematismo brevettato che permette all'assistente di non fare alcuna fatica durante la gestione. Il peso contenuto del c-max e la facilità di smontaggio dei singoli componenti, favoriscono un comodo trasporto del montascale in modo da poterlo portare sempre con sé e poter raggiungere ogni meta.



Più mobilità nella vita quotidiana —
il c-max è facile da usare e permette di
superare in sicurezza scale di tutti i tipi,
anche a chiocciola e strette

Il brevettato sistema di avanzamento rende il c-max particolarmente girevole e sicuro.



A suo servizio — una tecnologia brevettata che si adatta a tutte le esigenze

I punti di forza del c-max sono la sicurezza, la versatilità, l'affidabilità e il comfort. Sono state realizzate molteplici ingegnose soluzioni che Le renderanno la vita più felice. Il componente più importante è il brevettato cinematismo di avanzamento che permette praticamente di superare gli scalini senza alcuna fatica ed impegno da parte dell'assistente, sempre in sicurezza.

Il c-max è stato realizzato per una portata di Kg 140. Per utenti di peso superiore proponiamo una versione rinforzata con portata fino a Kg 160.






Scale a chiocciola o molto pendenti non costituiscono alcun problema. Il c-max è molto versatile e nella versione di serie supera scalini alti fino a cm 21.

Una coppia di freni di sicurezza blocca in modo automatico l'apparecchio sul bordo di ogni scalino escludendo la possibilità di uno scivolamento involontario in avanti sulla scala. I puntali di appoggio si posizionano molto vicini allo scalino garantendo stabilità e facilità d'utilizzo poiché il peso rimane sempre distribuito in modo ottimale sul montascale evitando inoltre qualsiasi danno alla scala.

Il c-max è inoltre molto maneggevole e può essere usato senza alcun problema su scale in legno, pietra, metallo, marmo, PVC o ricoperte con tappeto. Si possono perfino percorrere scale esterne di emergenza in acciaio.

Per un maggior comfort la velocità d'utilizzo è regolabile in modo lineare.

Un selettore permette di selezionare la modalità che consente di avanzare interrompendo il moto del c-max in automatico su ogni gradino, rendendone l'utilizzo ancora più facile.

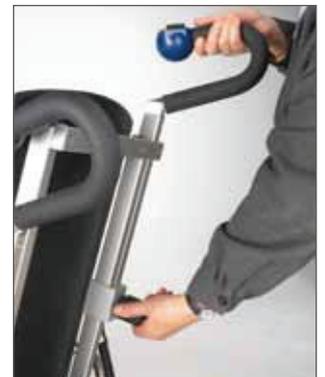

Le maniglie regolabili in altezza garantiscono una guida ottimale senza fatica.



Semplicemente pratico — il c-max in un batter d'occhio è pronto per l'uso



Per il trasporto il c-max viene smontato facilmente.

Con poche prese e senza fatica, il c-max viene smontato e riposto anche in un bagagliaio molto piccolo.

Le maniglie regolabili in altezza e un comando ergonomico consentono una gestione ottimale. Con il regolatore di velocità è possibile selezionare la velocità più indicata per ogni situazione d'utilizzo.

La chiavetta estraibile impedisce l'uso a persone non autorizzate.

Il pacco batterie estraibile può essere ricaricato con il carica batterie automatico fornito di serie, anche per comodità separatamente dal montascale.



Il c-max soddisfa ogni esigenza con una ampia disponibilità di accessori

Il c-max viene fornito di serie con sedile e schienale imbottiti, braccioli, pacco batterie, carica batterie e cintura di sicurezza per bacino. Sono inoltre disponibili alcuni utili accessori.

Applicando una modifica è possibile aumentare l'alzata massima di cm 1,5 rispetto a quella di serie sullo scalino portandola così a cm 22,5. Un apposito inclinometro ad impulsi posto nel manico, aiuta ad individuare la più corretta inclinazione d'uso del montascale. Nel caso in cui l'inclinazione non fosse appropriata, ovvero, l'apparecchio si trovasse troppo inclinato in avanti o indietro, un avvisatore si attiva automaticamente, richiamando l'attenzione.

Accessori* per il c-max



Appoggiatesta



Cavo per la ricarica in auto




Braccioli più larghi




Bretellaggio tronco-bacino



Cintura bacino con bloccaggio

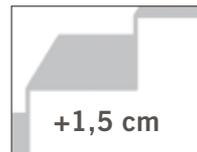

Maggiorazione dell'alzata

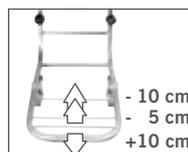

Pedana prolungata o accorciata



Pedana per bambini



Inclinometro ad impulsi nel manico

*ulteriori accessori su richiesta

Tutta la nostra esperienza a servizio del c-max

Il nostro obiettivo è migliorare l'autonomia e l'indipendenza per mezzo di soluzioni tecnologiche innovative.

Il c-max rispecchia completamente questa filosofia contenendo tutte le nostre conoscenze ed esperienze maturate negli anni nel settore dei propulsori per carrozzine e dei sistemi di movimentazione su scale. Il c-max è un montascale sicuro e affidabile che presenta molti vantaggi:

- **Freno automatico di sicurezza**
- **Puntali per la movimentazione anziché ruote per un posizionamento più sicuro**
- **Supera scale strette e a chiocciola**
- **Utilizzabile anche come poltroncina da transito**
- **Facile e sicuro da usare**
- **Non provoca danni a spigoli o superfici dei gradini**
- **Utilizzabile su tutti i tipi di scale**
- **Compatto, leggero e smontabile**
- **Riconducibile al Nomenclatore Tariffario**
- **Maniglie e comando ergonomici**

c-max_i_07_2010



Il c-max rispetta la direttiva 2007/47/EG relativa ai prodotti medici.

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso.



La Ditta AAT Alber Antriebstechnik GmbH è membro del QVH ed ha ottenuto il riconoscimento di qualità secondo gli standard richiesti per le carrozzine per infermi.

Inoltre AAT è certificata secondo la norma DIN EN ISO 9001:2000 e DIN EN ISO 13485:2003.

Dati tecnici

Portata max.	Kg 140 160 (versione rinforzata)
Velocità	8 — 23 scalini minuto (regolabile in modo lineare)
Autonomia con una carica	15 — 30 piani (in relazione al peso)
Larghezza	48,5 cm 44 cm (senza braccioli)
Profondità	91,5 cm 73 cm (pedana reclinata)
Altezza	109 cm
Accumulatori	2 x 12 V / 5 Ah
Motore	24 V
Peso pacco batterie	4,4 Kg
Peso gruppo motore	17,2 Kg
Peso seduta	4,6 Kg
Peso schienale	4,3 Kg
Peso braccioli	1,2 Kg
Peso complessivo	31,7 Kg
Altezza scalino superabile	21 cm 22,5 cm (versione maggiorata)
Garanzia	2 anni



Ideen bewegen mehr

AAT Alber Antriebstechnik GmbH
Postfach 1005 60 · 72426 Albstadt

Tel.: +49.74.31.12.95-0 · Fax: 12.95-35
info@aat-online.de · www.aat-online.de