



Ideen bewegen mehr

SALIRE

Montascale AAT

www.medimec.it



Ideen bewegen mehr

STEIGEN

Treppensteiger von AAT

AAT Alber Antriebstechnik GmbH produce sistemi montascale e unità di propulsione mobili, flessibili e di facile utilizzo per il settore della tecnica di riabilitazione e di trasporto.

Tutti i prodotti AAT sono soluzioni orientate al cliente e molto pratiche, caratterizzate da elevata qualità e tecnologia innovativa allo stesso tempo. Per questo, il marchio AAT è sinonimo di soddisfazione del cliente, flessibilità, elevato valore, innovazione e sicurezza.

Con lo slogan "Ideen bewegen mehr" (Le idee creano più movimento) AAT fa una promessa al mondo esterno, definendo allo stesso tempo standard elevati a livello aziendale.

Gli anni di esperienza nel settore della tecnologia di riabilitazione e di trasporto sono alla base della grande sicurezza dei prodotti. Il personale altamente motivato, con impegno e idee creative, contribuisce in modo essenziale e profondo alla qualità dei prodotti.

La sede in Germania rappresenta per AAT un aspetto essenziale della filosofia aziendale. Per poter soddisfare le esigenze dei clienti in modo rapido e flessibile, AAT si affida soprattutto alla provenienza dei componenti. Infatti la maggior parte dei fornitori ha sede in Germania, in particolare nelle sue immediate vicinanze.

L'obiettivo principale dello sviluppo di nuovi prodotti è quello di aiutare le persone. In questo modo si aprono nuovi scenari per la realizzazione di idee originali e creative che possono essere messe in pratica con nuove conoscenze nel campo della scienza e della ricerca.

I prodotti AAT sono sottoposti a continuo processo di miglioramento per essere mantenuti al passo coi tempi. I prodotti sono caratterizzati da sicurezza, versatilità e comfort.

Nell'ambito della tecnica di riabilitazione, i montascale permettono di eliminare in modo semplice il problema del superamento delle scale. Sia che si tratti di ambiente privato, pubblico o professionale.

Le unità di propulsione supplementari ampliano il raggio di azione e, con la tecnica più moderna, permettono mobilità ed autonomia di movimentato al lavoro, in casa o fuori.

L'apparecchio per la rianimazione animax contribuisce ai progressi nel campo della tecnica medica. A tutti gli assistenti della medicina d'urgenza, animax permette di eseguire un efficace intervento di rianimazione.

I sistemi montascale che rappresentano soluzioni speciali per aeroporti, ambulanze e servizi di pronto soccorso, nonché per il settore alberghiero e della ristorazione, completano l'ampia offerta di ausili montascale mobili AAT.

Infine la gamma di prodotti AAT è completata con montascale personalizzati che permettono di ottenere maggiore mobilità nell'ambiente quotidiano.



c-max

c-max / c-max⁺

Il montascale universale



s-max

s-max

Il montascale per la carrozzina



escalino

escalino

Il pratico montascale



s-max sella

Dati tecnici

Accessori

Assistenza

Consulenza

Forniamo prima di tutto una consulenza individuale e personalizzata. Medimec, in qualità di distributore esclusivo per l'Italia del marchio AAT, possiede a livello nazionale una rete di collaboratori esterni competenti che sono a vostra disposizione per consigliarvi nella scelta dell'ausilio idoneo o per rispondere alle vostre domande.

Inoltre potete ricevere dal nostro servizio assistenza esterno qualificato utili informazioni su come richiedere l'ausilio e sulla gestione dei singoli prodotti. Naturalmente potete rivolgervi anche ai nostri partner certificati.

Sia i rivenditori locali che i nostri assistenti esterni saranno lieti di fornirvi una consulenza a domicilio.

Chiamate il numero telefonico 0546 46870 per fissare un appuntamento non vincolante per una presentazione dei nostri prodotti.



c-max

Il montascale universale

La mobilità è un aspetto molto importante della qualità della vita. Per questo motivo la libertà di movimento deve essere limitata il meno possibile. Il montascale mobile c-max aiuta sia a casa che all'esterno a superare le barriere architettoniche.

c-max permette in modo facile e pratico il superamento di qualsiasi tipo di scala, sia interna che esterna.

L'avanzamento del c-max in fase di salita o discesa della scala, avviene per mezzo di un innovativo cinematismo brevettato che permette all'assistente di non fare alcuna fatica.

Il peso contenuto del c-max e la facilità di smontaggio dei singoli componenti, favoriscono un comodo trasporto del montascale in modo da poterlo portare sempre con sé e poter raggiungere ogni meta

Vantaggi che convincono

- Freno automatico sulo scalino
- Facile da smontare e trasportare
- Non provoca danni agli spigoli dei gradini
- Supera scale strette e a chiocciola
- Utilizzabile anche come poltroncina da transito







Al vostro servizio - tecnologia brevettata che si adatta a tutte le esigenze.

I punti di forza del c-max sono la sicurezza, la versatilità, l'affidabilità e il comfort. Abbiamo realizzato molteplici ingegnose soluzioni che renderanno la vostra vita più felice.

Il componente più importante è il brevettato cinematismo di avanzamento che permette di superare gli scalini senza alcuna fatica ed impegno da parte dell'assistente, sempre in sicurezza.

c-max è disponibile in due varianti – per peso corporeo max. 140 kg e 160 kg.

Una coppia di freni di sicurezza blocca in modo automatico l'apparecchio sul bordo di ogni scalino. I puntali di appoggio si posizionano molto vicini allo scalino garantendo stabilità e facilità d'utilizzo. Il peso rimane infatti sempre distribuito in modo ottimale sul montascale evitando qualsiasi danno alla scala.

c-max è inoltre molto maneggevole e può essere usato senza alcun problema su scale in legno, pietra, metallo, PVC o ricoperte con tappeto.

Le grandi ruote e i solidi puntali di appoggio permettono di percorrere perfino scale esterne di emergenza in acciaio.

Per un maggior comfort la velocità d'utilizzo è regolabile in modo lineare; inoltre può essere selezionata la modalità "singolo gradino".



Le impugnature regolabili in altezza garantiscono una guida ottimale senza fatica.



Scale a chiodo o molto pendenti non costituiscono alcun problema. c-max è molto versatile e nella versione di serie supera scalini alti fino a 21 cm.



Semplicemente pratico
c-max pronto all'uso in
un batter d'occhio

Con poche prese e senza fatica, c-max viene smontato e riposto anche in un bagagliaio molto piccolo.

Le impugnature regolabili in altezza e un comando ergonomico consentono una gestione ottimale. Con il regolatore di velocità è possibile selezionare

la velocità più indicata per ogni situazione d'utilizzo e mantenere sempre la presa sicura del c-max.

Il dispositivo di blocco di serie impedisce l'utilizzo da parte di persone non autorizzate.

Il pacco batterie estraibile può essere ricaricato con il caricabatterie automatico fornito di serie, anche per comodità separatamente dal montascale.

Più mobilità nella vita quotidiana - c-max è facile da usare e permette di superare in sicurezza scale di tutti i tipi, anche a chiocciola e strette

Il brevettato sistema di avanzamento rende c-max particolarmente pratico e sicuro.



Tecnologia sicura c-max garantisce sicurezza e mobilità

- Puntali per la movimentazione anziché ruote per un posizionamento più sicuro
- Utilizzabile su quasi tutti i tipi di scale
- Leggero e facilmente smontabile
- Non provoca danni agli spigoli dei gradini
- Freni di sicurezza integrati
- Elevata mobilità anche con scale strette
- Utilizzabile anche come poltroncina di transito
- Velocità di salita regolabile in modo lineare
- Modalità “singolo gradino”
- SmartStep 2.0 – per una guida confortevole

Dotazione

c-max viene fornito di serie con sedile e schienale imbottiti, pacco batterie, e caricabatterie ed è subito pronto all'uso. Per adattare c-max alle vostre esigenze, sono disponibili alcuni utili accessori. Applicando una modifica è possibile aumentare l'alzata massima di 1,5 cm rispetto a quella di serie sullo scalino portandola così a 22,5 cm. L'inclinometro vibrante permette di trovare l'angolo ottimale. Nel caso in cui l'apparecchio c-max fosse tenuto troppo inclinato verso il basso o l'altro, l'impugnatura vibra.



c-max⁺

L' ausilio robusto per situazioni difficili

Il trasporto di pazienti in sovrappeso sulle scale rappresenta spesso un compito difficile. A volte sono necessarie più persone per spostare con fatica il paziente sulla tromba delle scale: una situazione che nella maggior parte dei casi si rivela spiacevole sia per il paziente che per il personale.

Vantaggi che convincono

- **c-max+** permette il trasporto del paziente dalla tromba delle scale fino all'ambulanza da parte di due persone in modo sicuro e pratico.
- Massimo peso corporeo 300 kg
- Sicurezza grazie alla funzione di frenata automatica
- Utilizzabile su quasi tutte le scale
- Non richiede manutenzione ed è sicuro grazie al sistema di salita testato
- Qualità solida e stabile "Made in Germany"



La variante maggiorata c-max+ è ideale per un peso corporeo fino a 300 kg.



PLUS

XXL-Lösungen von AAT

s-max

Il montascale per la carrozzina

Durante la vita quotidiana, per molte persone, le scale possono rappresentare un problema. Al lavoro, nel tempo libero e a scuola, le barriere architettoniche sono presenti ovunque. Il montascale s-max vi aiuta a superarle in modo pratico e sicuro.

Sentitevi liberi di muovervi nel vostro ambiente senza rinunciare ad alcuna attività. L'utilizzo del montascale s-max, in combinazione con la carrozzina, è possibile sia all'interno che all'esterno in modo molto confortevole.

L'innovativo sistema di avanzamento si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di scala.

La gestione del montascale s-max è semplice e non richiede alcuno sforzo. Grazie alle ridotte dimensioni ed al peso contenuto, il modello s-max può essere trasportato in qualsiasi automezzo.

Vantaggi che convincono

- **SmartStep 2.0** - per una guida confortevole
- **Funzione automatica di frenata** quando si scendono le scale
- **Elevata maneggevolezza** anche su scale strette e a chiocciola
- **Possibilità di usare la carrozzina manualmente** anche con il montascale agganciato







Maggiore qualità della vita e mobilità - Superare le barriere ogni giorno con la propria carrozzina

Per essere al passo coi tempi, idee originali sono state trasformate in soluzioni tecnologiche avanzate per il nuovo montascale s-max.

Il nostro concetto di sicurezza prevede freni automatici che bloccano il montascale s-max sul bordo dello scalino, evitando così una discesa involontaria.

La tecnologia utilizzata per la movimentazione del montascale, ne permette una facile gestione senza alcuna fatica da parte dell'assistente.

L'impiego del montascale s-max in ambienti poco illuminati è agevolato dalla dotazione di due LED che rendono maggiormente visibile la scala.

Per maggiore sicurezza, il dispositivo di blocco di serie impedisce l'utilizzo non autorizzato.

Per far sì che il montascale s-max si adatti ad ogni tipo di scala, la velocità è regolabile in modo lineare. Inoltre, se desiderato, è possibile inserire la modalità "singolo scalino".

Viste le compatte dimensioni del gruppo propulsivo, l'applicazione del montascale s-max alle carrozzine può essere possibile a seconda dei modelli già da una larghezza di seduta di 24 cm.



Le dimensioni compatte del montascale s-max permettono la combinazione anche con carrozzine strette per uso pediatrico.



La variante maggiorata del montascale s-max ha una portata utente di max. 140 kg (versione standard max. 115 kg).



Tecnologia innovativa e idee originali per maggiore sicurezza e comfort

Il comando e le impugnature sono stati realizzati secondo i più moderni criteri ergonomici.

Tecnologia innovativa e
idee originali per maggiore
sicurezza e comfort

L'impiego del montascale s-max in
ambienti poco illuminati è agevolato
dalla dotazione di LED che rendono
maggiormente visibile la scala.



Tecnologia avanzata e nuovo design s-max permette di superare tutte le barriere

- LED per salire le scale in modo sicuro anche con scarsa illuminazione
- Dispositivo di blocco per evitare l'uso da parte di persone non autorizzate
- SmartStep 2.0 - per una guida confortevole
- Modalità "singolo gradino"
- Non vengono danneggiate le scale
- Funzione automatica di frenata quando si scendono le scale
- Elevata mobilità anche con scale strette e a chiocciola

Dotazione

La dotazione di serie del montascale s-max prevede il gruppo propulsivo, l'impugnatura con comando ergonomico, il pacco batterie ed il caricabatterie. Come accessori vengono forniti i dispositivi di aggancio per quasi tutti i tipi di carrozzine.



SDM7

Ideale per tutte le situazioni -
con gli accessori giusti

Il trasporto di persone su carrozzina risulta impegnativo da diversi punti di vista. In numerosi edifici devono essere percorse le scale già all'ingresso.

Grazie al montascale s-max, in combinazione con l'attacco universale SDM7, è possibile trasportare comodamente una persona su carrozzina sulle scale, sia esterne che interne.

La combinazione s-max / SDM7 è disponibile con una portata massima di 135 kg o 160 kg.

Grazie alle opzioni di utilizzo universali, come per esempio per il trasporto di pazienti e persone e negli edifici pubblici, SDM7 rappresenta una soluzione di trasporto ideale ed irrinunciabile.

Vantaggi che convincono

- Applicabile su quasi tutte le carrozzine presenti in commercio
- Utilizzo universale e flessibile
- Nessun montaggio di fissaggi speciali sulla carrozzina
- Ingombri contenuti



SDM7

Pedana universale

s-max sella

Il montascale versatile

Molto spesso gli edifici non sono attrezzati per coloro che hanno difficoltà motorie. In questi casi le scale rappresentano un grande impedimento per molte persone, che deve essere superato.

Con il montascale s-max sella il problema viene risolto in modo elegante e senza fatica.

s-max sella garantisce mobilità in qualsiasi momento e luogo. Il montascale può essere utilizzato per quasi tutte le scale, sia interne che esterne. E' particolarmente versatile e pratico, in quanto la seduta è già fissata al s-max.

Per il trasporto s-max sella può essere ripiegato o semplicemente smontato.

Vantaggi che convincono

- Il montascale può essere utilizzato su quasi tutte le scale
- Per il trasporto s-max sella può essere ripiegato e semplicemente smontato
- Seduta integrata
- Convertibile per l'applicazione alla carrozzina





Sicuro e pratico anche
su scale strette e a
chiocciola





Tecnologia sicura s-max sella garantisce sicurezza e mobilità

- LED per una guida sicura al buio
- Dispositivo di blocco per evitare l'uso da parte di persone non autorizzate
- SmartStep 2.0 - per una guida confortevole
- Modalità "singolo gradino"
- Non vengono danneggiate le scale
- Funzione automatica di frenata quando si scendono le scale
- Adatto in particolare per scale strette e a chiocciola

Dotazione

La dotazione di base di s-max sella include la seduta e lo schienale, il gruppo propulsivo, il pacco batterie e il caricabatterie. Per poter adattare s-max sella in modo ottimale alle vostre esigenze, sono disponibili diversi accessori.



SmartStep 2.0

Guidare in modo sicuro e salire le scale senza sollecitazioni

SmartStep 2.0 è stato ideato per i montascale della serie s-max e c-max e rivoluziona il cinematismo di avanzamento finora utilizzato.

Riduce le sollecitazioni e le vibrazioni durante l'uso rendendo la salita e la discesa sulla scala, più confortevole.

Per la persona che viene trasportata la salita diventa un'operazione estremamente pratica e stabile.

SmartStep 2.0 è fornito di serie con ogni montascale s-max e c-max e funziona sia in modalità "singolo gradino" che in modalità continua.

Un'ulteriore funzione di SmartStep 2.0 permette il graduale adattamento alla diversa altezza dei gradini e quindi ad ogni tipo di scala.

Vantaggi che convincono

- **Permette di salire le scale in modo sicuro e confortevole**
- **Può essere adattato all'altezza dei singoli gradini**
- **Disponibile sia nella modalità "gradino singolo" che nella modalità continua**



artStep 2.0

Steigen neu definiert!



escalino

Il pratico montascale

Con Escalino è possibile raggiungere qualsiasi meta ampliando la mobilità.

Escalino è un pratico montascale utilizzabile ogni giorno sia a casa che all'esterno. Grazie ad un innovativo cinematismo di avanzamento che garantisce la massima sicurezza durante l'uso, Escalino supera facilmente qualsiasi tipo di scala dritta o a chiocciola. La qualità della vita grazie ad una maggiore mobilità aumenta notevolmente.

Grazie all'efficiente funzione di avanzamento l'accompagnatore ha una presa sicura in ogni momento.

Vantaggi che convincono

- **Funzione automatica di frenata** quando si scendono le scale
- **Utilizzabile anche come poltroncina di transito**
- **Non vengono danneggiate le scale**
- **Adatto sia su scale dritte che a chiocciola**





Montascale universale

Escalino supera scale di tutti i tipi

Il sistema di avanzamento, unico nel suo genere, del Escalino ne permette l'utilizzo su scale in legno, pietra, metallo, PVC e ricoperte con tappeto, grazie alla presenza di puntali al posto delle ruote. Non è richiesto durante l'utilizzo alcuno sforzo fisico da parte dell'assistente, poiché l'operazione è assistita completamente dal potente motore elettrico.

Una coppia di freni di sicurezza blocca in modo automatico l'apparecchio sul bordo di ogni scalino, escludendo la possibilità di uno scivolamento involontario in avanti del montascale sulla scala.

Escalino è stato progettato per il trasporto di persone che pesano fino a 120 kg. Con un carico medio, la carica del pacco batterie garantisce un'autonomia di utilizzo di circa 30 piani.

L'innovativo cinematismo di avanzamento permette di superare le scale praticamente da sé. I puntali offrono un appoggio sicuro ed impediscono il danneggiamento degli spigoli dei gradini. Per facilitare la messa in piedi o la seduta dell'utente basta alzare leggermente in avanti la seduta del Escalino. Grazie alle grandi ruote e puntali Escalino è utilizzabile anche su scale esterne di emergenza in acciaio.



Le scale a chiocciola non costituiscono alcun problema ed offrono sicurezza e comfort.



Il comando del Escalino è particolarmente intuitivo.



Facile da utilizzare - Escalino permette più mobilità nella vita quotidiana

L'utilizzo del Escalino è estremamente semplice. Durante lo sviluppo di questo montascale si è particolarmente tenuto conto della necessità di realizzare un apparecchio facile da gestire e con dimensioni compatte. Così sono sufficienti un pulsante acceso/spento e uno salita/discesa.

Un ulteriore vantaggio per l'utente sono i braccioli estraibili che facilitano il trasferimento. Invertendo la posizione dei braccioli è possibile allargare o ridurre la seduta. Escalino è pieghevole e può essere riposto in qualsiasi bagagliaio.



Tutta la nostra esperienza a servizio del Escalino

- Puntali per la movimentazione, anziché ruote, per avere maggiore sicurezza
- Funzione automatica di frenata quando si scendono le scale
- Utilizzabile su quasi tutte le scale
- Impugnature regolabili in altezza
- Utilizzabile anche come poltroncina di transito
- Modalità “singolo gradino”
- Non vengono danneggiate le scale
- Schienale e seduta smontabili

Dotazione

La dotazione di base include il montascale con caricabatterie. Per far fronte ad esigenze speciali Escalino può essere integrato con accessori opzionali.





STEIGEN

Treppensteiger von AAT



I montascale AAT soddisfano i requisiti delle Direttive CE 2006/42/CE, 2007/47/CE e 93/42/CE.



AAT Alber Antriebstechnik GmbH è membro del QVH ed ha ottenuto il riconoscimento di qualità secondo gli standard qualitativi richiesti per i veicoli per il trasporto di infermi.

Inoltre AAT ha ottenuto la certificazione DIN EN ISO 9001:2008 e EN ISO 13485:2012 + AC:2012.

Dati tecnici	235 mm		c-max*	s-max 135	s-max 160	s-max sella 135	s-max sella 160	escalino
	c-max 140	c-max 160						
Peso complessivo consentito	170 kg	190 kg	380 kg	155 kg ⁽¹⁾	180 kg ⁽¹⁾	170 kg	195 kg	155 kg
Portata max. consigliata (peso utente)	140 kg	160 kg	300 kg	115 kg	140 kg	135 kg	160 kg	120 kg
Velocità di avanzamento l gradini al minu- to (regolabile in modo continuo)	8 - 23		3 - 8	5 - 20	8 - 23	5 - 20	8 - 23	14
Autonomia con una carica accumulatore (con carico medio 75 / 150 kg)	ca. 25 Piani (corrispondenti a 375 Stufen)		ca. 20 Piani (corrispondenti a 300 gradini)	ca. 26 Piani (corrispondenti a 390 gradini)	ca. 20 Piani (corrispondenti a 300 gradini)	ca. 26 Piani (corrispondenti a 390 gradini)	ca. 20 Piani (corrispondenti a 300 gradini)	ca. 30 Piani (corrispondenti a 450 gradini)
Max. altezza gradino superabile	210 mm		210 mm	220 mm		220 mm		210 mm
Max. altezza gradino con maggiorazione	225 mm			235 mm		235 mm		
Larghezza l Larghezza senza braccioli	485 l 440 mm		527 mm	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm	518 l 458 mm
Profondità l Profondità con poggiatesta chiusi	915 l 730 mm		1226 l 1079 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm	725 mm
Altezza min. l max.	1090 l 1440 mm		1490 l 1775 mm	1150 l 1550 mm	1200 l 1650 mm	1150 l 1550 mm	1200 l 1650 mm	1255 l 1515 mm
Accumulatori	2 x 12 V / 5 Ah		2 x 12 V / 5 Ah	2 x 12 V / 3,3 Ah		2 x 12 V / 3,3 Ah		2 x 12 V / 5 Ah (A tenuta di gas)
Motore a corrente continua	24 V / 275 W		24 V / 275 W	24 V / 200 W	24 V / 275 W	24 V / 200 W	24 V / 275 W	24 V / 200 W
Peso gruppo motore	18,1 kg		50,2 kg	15,8 kg	16,9 kg	15,8 kg	16,9 kg	22,0 kg
Peso parte C con seduta	5,5 kg		19,8 kg	-		-		3,8 kg
Peso schienale	4,5 kg			-		-		7,5 kg
Peso impugnature	-		4,8 kg	-		-		-
Peso entrambi braccioli	1,2 kg		-	-		1,2 kg		1,5 kg
Peso pacco batterie	4,1 kg		4,5 kg	3,0 kg		3,0 kg		-
Peso complessivo	33,4 kg		79,3 kg	22 kg	23,1 kg	34,8 kg	35,9 kg	34,8 kg

(1) Rispettare la portata massima secondo le indicazioni del costruttore della carrozzina.

Il costruttore si riserva modifiche tecniche nell'ottica di un continuo miglioramento del prodotto.

STEIGEN

Treppensteiger von AAT

Ampia disponibilità di accessori per ogni necessità



Poggiatesta



Braccioli più larghi



Bretellaggio tronco-bacino



Cintura bacino



Rotelline antiribaltamento




Leva per reclinazione



Supporti ruote estraibili



Dispositivo di aggancio

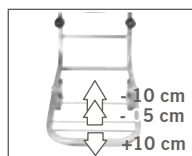


Pedana allungata o accorciata



Pedana per bambini



Inclinometro vibrante

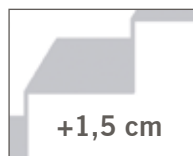

Maggiorazione dell'alzata



Cavo per la ricarica in auto



Invertitore di corrente



Pedana universale SMD7



Seduta U3

Accessori	c-max 140	c-max 160	c-max*	s-max 135	s-max 160	s-max sella 135	s-max sella 160	escalino
Poggiatesta	•	•	•	•	•	•	•	-
Braccioli più larghi	•	-	-	-	-	-	-	-
Bretellaggio tronco-bacino	•	-	-	•	•	•	•	•
Cintura bacino	•	-	-	•	•	•	•	•
Pedana allungata o accorciata	•	-	-	-	-	-	-	•
Pedana per bambini	•	-	-	-	-	-	-	-
Inclinometro vibrante	•	-	-	•	•	•	•	-
Maggiorazione dell'alzata	•	•	•	•	•	•	•	-
Rotelline antiribaltamento	-	-	-	•	•	-	-	-
Leva per reclinazione	-	-	-	•	•	-	-	-
Supporti ruote estraibili	-	-	-	•	•	-	-	-
Dispositivo di aggancio	-	-	-	•	•	-	-	-
Cavo per la ricarica in auto	•	•	•	-	-	-	-	-
Invertitore di corrente	•	•	•	•	•	•	•	•
Pedana universale SMD7	-	-	-	•	•	-	-	-
Seduta U3	-	-	-	•	•	-	-	-

Ulteriori accessori su richiesta



Il nostro concetto di assistenza

Assistenza clienti al massimo livello

Con il concetto di assistenza professionale AAT si soddisfano elevati requisiti di qualità, fornendo al cliente un pacchetto di assistenza completo.

CENTRO ASSISTENZA MEDIMEC

Telefono: 0546 46870

Fax: 0546 46467

E-Mail: assistenza@medimec.it



- Pezzi di ricambio
- Interventi di riparazione
- Informazioni tecniche
- Formazione per rivenditori specializzati
- Ispezioni periodiche
- Riutilizzo
- Revisioni
- Apparecchi di cortesia

