

PRO-FLEX® LP TORSION



Questo piede compatto, capace di immagazzinare energia, offre ammortizzazione rotazionale progettata per ridurre le forze di taglio sul moncone. Il modulo torsionale, in combinazione con il modulo piede Pro-Flex LP, fornisce un elevato ritorno energetico e eccellente dinamicità complessiva, qualità spesso non fruibili dagli utenti con monconi lunghi. Pro-Flex LP Torsion è stato progettato specialmente per fornire questi vantaggi, oltre ad un'eccezionale fluidità del passo. Il modulo torsionale compensa la rotazione fisiologica e ammortizza le forze verticali, salvaguardando le articolazioni residue, fornendo maggior comfort all'utente finale e meno stress sul moncone.

Pro-Flex LP Torsion offre un alto livello dei movimenti tibio-tarsici della caviglia; un significativo miglioramento rispetto ai piedi a basso profilo in fibra di carbonio. È costituito da una nuova tecnologia a "cono rovesciato" che copre tutta la lunghezza del piede, permettendo maggior dorsiflessione.

Con meno carico e più dinamicità gli utenti con un moncone lungo possono godere di maggior comfort in molte attività. La cover piede anatomica, leggera e dal design ricercato include una suola antiscivolo che permette di avere stabilità a piedi nudi su superfici bagnate o scivolose, ed un alluce separato per un'ampia gamma di scarpe, incluse le infradito.

Össur consiglia l'utilizzo di Pro-Flex LP Torsion unitamente al sistema di sospensione sottovuoto senza ginocchiera Unity. Questo aggiunge peso minimo, non altera l'altezza strutturale, e non interferisce con la dinamicità di Pro-Flex LP Torsion. Unity è progettato per fornire sospensione sicura in combinazione con la tecnologia Iceross Seal-In, stabilizzando le oscillazioni di volume e mantenendo la vestibilità dell'invasatura comoda per tutto il giorno.

UNITY
COMPATIBLE



PIEDI ÖSSUR

Informazioni utente

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Livello di amputazione: | Transtibiale e Transfemorale |
| Livello di attività: | Basso - Alto |
| Limite peso: | 147kg |



RISPOSTA
PROPORZIONALE



TALLONE
ATTIVO
CARBON-X®



LEVA PLANTARE
SU TUTTA LA
LUNGHEZZA



PROGRESSIONE
TIBIALE ATTIVA



TUBO VERTICALE
AMMORTIZZANTE



ROTAZIONE/
TORSIONE



LAMINA DIVISA



COSMETICO
INFRADITO



WEATHERPROOF

Informazioni piede

| | |
|--------------------------------|---|
| Categoria: | 1-8 |
| Misure: | 22-30 |
| Peso del piede: (Misura 27) | 960 g con cover piede e calza |
| Altezza (Misura 27): | 147mm con giunto piramidale maschio e kit cover piede |
| Altezza tallone: | 10mm |
| Opzioni adattatore | Giunto piramidale maschio |


Informazioni sul sistema Unity

| | |
|---------------------------------|---|
| Depressione massima: | -23inHg (-600mmHg) |
| Normale pressione di esercizio: | -16-20 inHg |
| Peso aggiuntivo al sistema: | 75g con pompa, valvola dell'invasatura e tubo |

PRO-FLEX® LP TORSION

INFORMAZIONI ORDINI


PER PIEDE COMPLETO

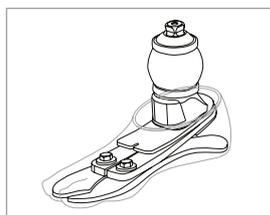

Al momento dell'ordine si prega di selezionare il kit modulo pompa Unity in base alle dimensioni del modulo piede: Unity verrà premontato sul piede. Per maggior comodità e compatibilità di sistema, si consiglia il kit valvola Unity come mezzo di collegamento all'invasatura.

Per la guida alla scelta della categoria della cuffia ed i codici di prodotto si prega di consultare la pagina relativa ad Iceross Seal-In.

PER PIEDE COMPLETO CON UNITY

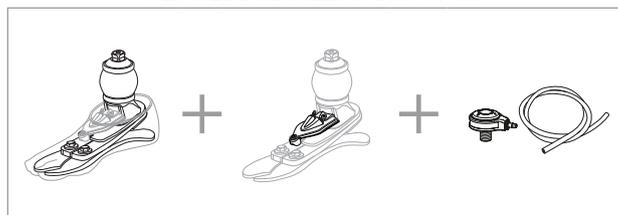


GUIDA PER LA SCELTA DELLA CATEGORIA

| Peso kg | 45-52 | 53-59 | 60-68 | 69-77 | 78-88 | 89-100 | 101-116 | 117-130 | 131-147 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|
| Livello di attività bassa | | | | | | | | | |
| Misura 22-24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A | N/A | N/A |
| Misura 25-27 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Misura 28-30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Livello di attività moderato | | | | | | | | | |
| Misura 22-24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Misura 25-27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N/A |
| Misura 28-30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N/A |
| Livello di attività alto | | | | | | | | | |
| Misura 22-24 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Misura 25-27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N/A | N/A |
| Misura 28-30 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | N/A | N/A |

PRO-FLEX® LP TORSION


INGOMBRO

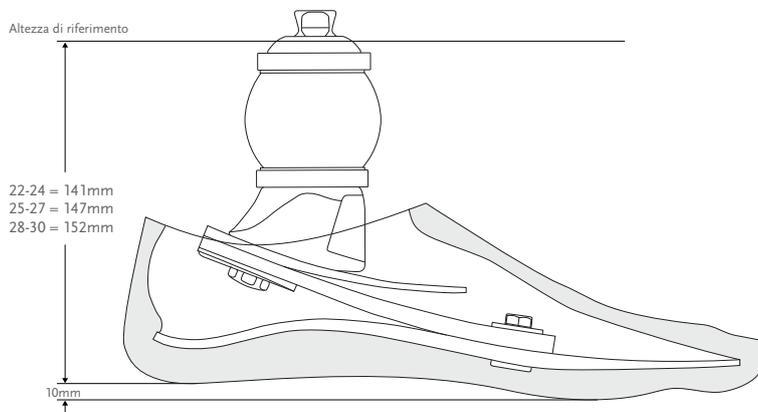

*Nota: Pro-Flex LP Torsion con Unity ha la stessa altezza

KITS


PRO-FLEX LP TORSION CON GIUNTO PIRAMIDALE MASCHIO E KIT COVER PIEDE

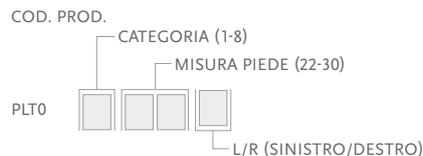

Include:

- Modulo piede
- Giunto piramidale maschio
- Kit cover piede con calza Spectra nera*

*Per ordinare il kit cover piede marrone, aggiungere BR alla fine del codice prodotto.

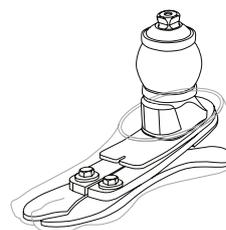

UNITY

KITS UNITY


| Foto | Cod. prod. | Descrizione | Kit piede applicabile |
|------|------------|--|---|
| 1 | UPL0024 | Modulo pompa Unity PLP S22-24 | Pro-Flex LP Torsion 22-24 |
| 1 | UPL0030 | Modulo pompa Unity PLP S25-30 cat. 1-5 | Pro-Flex LP Torsion 25-37 cat. 1-5 |
| 1 | UPL0930 | Modulo pompa Unity PLP S25-27 Cat 6-9 & S28-30 (Tutte le categorie) | Pro-Flex LP Torsion 25-27 Cat 6-9 & 28-30 (Tutte le categorie) |
| 2 | UTT0001 | Kit valvola Unity TT | Tutti |
| 3 | UTF0001 | Kit valvola Unity TF | Tutti |
| 4 | UTF0006 | Kit tubo Unity TF | Tutti |
| 5 | L-5446XX | Kit Icelock 544 | Tutti |



PRO-FLEX® LP TORSION

COMPONENTI DI RICAMBIO

| Cod. prod. | Descrizione |
|------------|--|
| UPL00021 | Componenti Unity PLP 22-24 |
| UPL00022 | Componenti Unity PLP 25-27 cat.1-5 |
| UPL00023 | Componenti Unity PLP 25-27 cat.6-9 & 28-30 |

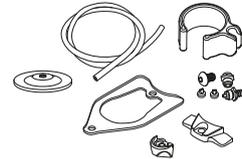


Include:

- Ammortizzatore
- Molla
- Membrana
- Pezzo di montaggio
- Viti
- Tubo
- Morsetto
- Valvole unidirezionali
- Unity porta uscita
- Unity porta entrata

KIT PIEDI PER UNITY

PRO-FLEX LP TORSION

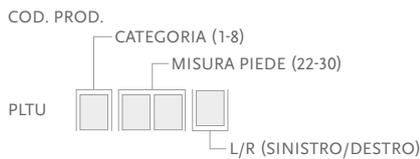

Includes:

- Modulo piede con giunto piramidale maschio
- Kit cover piede con calza Spectra nera*



*Per ordinare il kit cover piede marrone, aggiungere BR alla fine del codice prodotto. Nota: Unity arriverà premontato sul piede se ordinato con PLTU

RIVESTIMENTO COSMETICO

KIT COVER PIEDE, BEIGE E MARRONE*



Include:

- Cover piede*
- Piastra di collegamento
- Calza Spectra nera

*Nota: Per ordinare il kit cover marrone, aggiungi "BR" alla fine del codice prodotto.



CALZA FLEX-FOOT SPECTRA NERA

Utilizzato per coprire il modulo piede in carbonio, per proteggerlo ed eliminare il rumore tra modulo piede e cover piede.

| Cod. prod. | Descrizione | Misura |
|-------------|---|--------|
| FCX63022 | Calza Flex-Foot Spectra nera Small | 22-25 |
| FCX63025 | Calza Flex-Foot Spectra nera Large | 26-30 |
| FCX63022-15 | Calza Flex-Foot Spectra nera Small 15 calze | 22-25 |
| FCX63026-15 | Calza Flex-Foot Spectra nera Large 15 calze | 26-30 |

