

PRO-FLEX® XC



Pro-Flex XC è stato sviluppato per soddisfare le esigenze degli utenti più attivi che praticano attività sportive non agonistiche, ma che allo stesso tempo desiderano avere il massimo del comfort durante tutte le attività quotidiane. Un rivestimento cosmetico anatomico ed un giunto piramidale maschio integrato, rendono il piede esteticamente gradevole.

Pro-Flex è ovviamente compatibile con il sistema Unity. Utilizzato in combinazione con le cuffie Iceross Seal-In®, Unity fornisce una sospensione sottovuoto attiva, senza il vincolo di una ginocchiera esterna. Aggiunge peso minimo alla protesi già esistente ed il suo design meccanico lo rende di semplice utilizzo. Affidabile ed efficace, è progettato per migliorare l'equilibrio e prevenire possibili complicanze cutanee.



FLEX-FOOT®
PRO-FLEX®

Informazioni utente:	
Livello di amputazione:	Transtibiale e Transfemorale
Livello di attività:	Basso ad Alto
Limite peso:	166kg

 RISPOSTA PROPORZIONALE	 TALLONE ATTIVO CARBON-X®	 LEVA PLANTARE SU TUTTA LA LUNGHEZZA	 PROGRESSIONE TIBIALE ATTIVA
 TUBO VERTICALE AMMORTIZZANTE	 LAMINA DIVISA	 COSMETICO INFRADITO	


Informazioni piedi:	
Categoria	1-9
Misure:	22-30
Peso del piede: (misura 27)	670g con cover piede e calza
Altezza: (misura 27)	155mm con giunto piramidale maschio e kit cover piede
Altezza tallone:	10mm
Opzioni adattatori:	Giunto piramidale maschio

Informazioni sul sistema Unity:	
Depressione massima:	-23inHg (-600mmHg)
Normale pressione di esercizio:	-16-20 inHg
Peso aggiuntivo al sistema:	91g con pompa, valvola dell'invasatura e tubo

PRO-FLEX® XC

INFORMAZIONI ORDINI


PER PIEDE COMPLETO

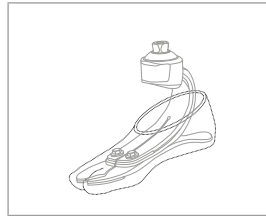

Al momento dell'ordine si prega di selezionare il kit modulo pompa Unity in base alle dimensioni del modulo piede: Unity verrà premontato sul piede. Per maggior comodità e compatibilità di sistema, si consiglia il kit valvola Unity come mezzo di collegamento all'invasatura.

Per le schede di selezione delle cuffie e per i codici prodotto, fare riferimento alle pagine di Icross Seal-In.

PER PIEDE COMPLETO CON UNITY

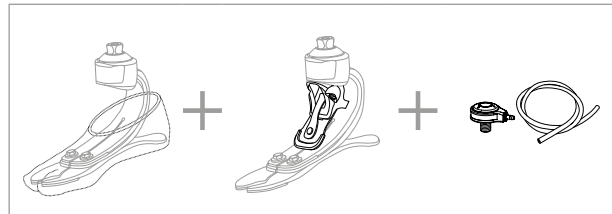


GUIDA PER LA SCELTA DELLA CATEGORIA

Peso kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166
Livello di attività basso	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Livello di attività moderato	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A
Livello di attività alto	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A

PRO-FLEX® XC

INGOMBRO

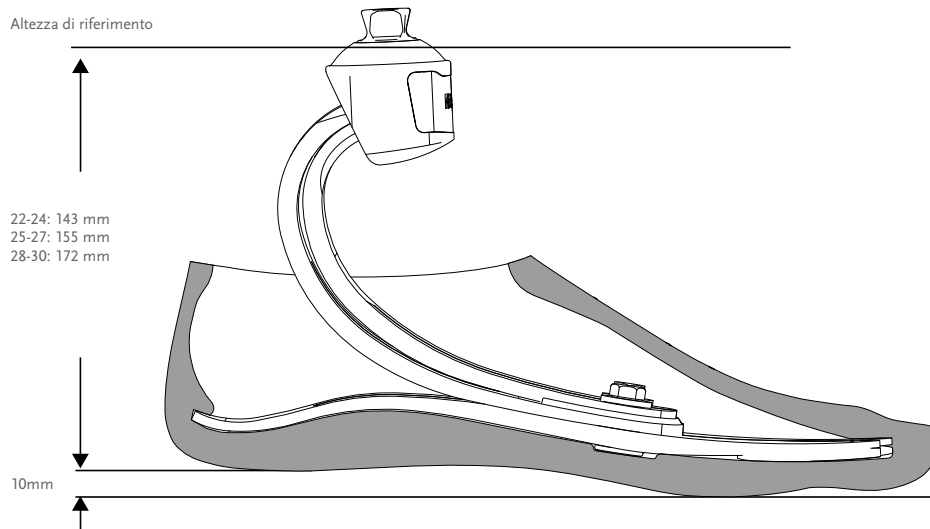


**Nota: Pro-Flex XC con Unity ha la stessa altezza di Pro-Flex XC.

FLEX-FOOT®
PRO-FLEX®

KITS


PRO-FLEX XC CON GIUNTO PIRAMIDALE MASCHIO E KIT COVER PIEDE

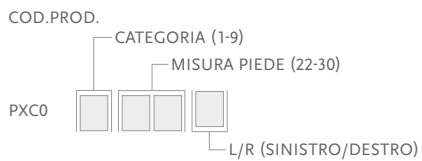

Include:

- Modulo piede
- Giunto piramidale maschio
- Kit cover piede con calza Spectra nera

*Per ordinare il kit cover piede marrone, aggiungere BR alla fine del codice prodotto.

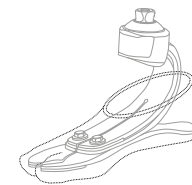

COMPONENTI

KIT CUNEI TALLONE

Per la regolazione della rigidità del tallone e delle caratteristiche roll-over.

Cod. Prod.	Misura piede
CM150011	22-30

Include:

- 3 Cunei
- Adesivo



LOCTITE 495 NERO

Cod. Prod.	Descrizione
CM160015	Loctite 495 nero

PRO-FLEX® XC

UNITY

KITS UNITY

Foto	Cod. Prod.	Descrizione	Kit piede applicabile
1	UPC0024	Modulo pompa Unity PXC 22-24	Pro-Flex XC misura 22-24
1	UPC0027	Modulo pompa Unity PXC 25-27	Pro-Flex XC misura 25-27
1	UPC0030	Modulo pompa Unity PXC 28-30	Pro-Flex XC misura 28-30
2	UTT0001	Kit valvola Unity TT	Tutti
3	UTF0001	Kit valvola Unity TF	Tutti
4	UTF0006	Kit valvola tubo TF	Tutti
	L-5446XX	Kit Icelock 544	Tutti




COMPONENTI DI RICAMBIO UNITY

Cod. Prod.	Descrizione
UPC00021	Componenti UNITY PXC 22-24
UPC00022	Componenti UNITY PXC 25-27
UPC00023	Componenti UNITY PXC 28-30

Include:


- Lama pompa
- Membrana
- Raccordo spinato
- Valvole unidirezionali
- Vite di montaggio
- Tubo
- Loctite
- Chiave esagonale

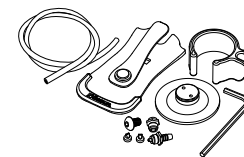

PRO-FLEX® XC

KIT PIEDE PER UNITY

PRO-FLEX XC CON GIUNTO PIRAMIDALE MASCHIO E KIT COVER PIEDE

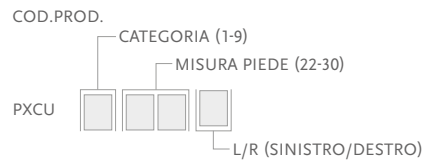


Include:

- Modulo piede con giunto piramidale maschio
- Kit cover piede con una calza Spectra nera
- Kit Cunei


* Per ordinare il kit cover piede marrone, aggiungere "BR" alla fine del codice prodotto.

Nota: Unity verrà premontato sul piede se ordinato con il codice PXPU.

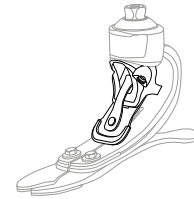

FINITURE COSMETICHE

KIT COVER PIEDE, BEIGE E MARRONE*

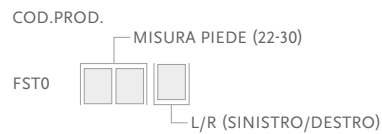

Include:

- Cover piede
- Piastra di collegamento
- Calza Spectra nera

*Per ordinare il kit cover marrone, aggiungere "BR" alla fine del codice prodotto.

