

PRO-FLEX® LP




Grande forza nella caviglia, ritorno energetico e dinamicità sono elementi spesso preclusi a chi hanno un moncone più lungo, in quanto sono costretti ad utilizzare piedi a basso profilo. Per far fronte a ciò è stato progettato Pro-Flex LP il quale fornisce un roll-over davvero fluido.

Pro-Flex LP aumenta e migliora i movimenti tibio-tarsici della caviglia rispetto ad un piede convenzionale in fibra di carbonio di basso profilo. Include inoltre una lamina che copre tutta la lunghezza del piede ed una nuova tipologia "reverse tapered" (la lamina intermedia è più sottile posteriormente e diventa gradualmente più spessa verso la parte anteriore) che permette un'ottima dorsiflessione per maggiore dinamicità.

La cover piede ben progettata, anatomica e leggera è costituita da una suola davvero sicura e stabile che permette di camminare a piedi scalzi su superfici bagnate o scivolose, e da una lamina con alluce separato per indossare una vasta gamma di scarpe tra cui le infradito.

Össur consiglia l'uso di Pro-Flex LP in combinazione con il sistema di sospensione sottovuoto Unity®, il quale non comporta alcun aumento di altezza strutturale e solo un aumento di peso minimo e non interferisce con la sua dinamicità. Unity è progettato per fornire una sospensione ottimale con le cuffie Iceross Seal-In®, stabilizzando le oscillazioni di volume del moncone, conferendo così una maggiore vestibilità dell'invasatura per l'intero arco della giornata.



Informazioni utente	
Livello di amputazione:	Transfemorale e transtibiale
Livello di attività:	Da basso ad alto
Limite peso:	166kg

Informazioni sul sistema Unity:	
Depressione massima:	-23inHg (-600mmHg)
Normale pressione di esercizio:	-16-20 inHg
Peso aggiuntivo al sistema:	75g w con pompa, valvola dell'invasatura e tubo

Informazioni piedi:	
Categoria:	1-9
Misure:	22-30
Peso del piede: (Misura 27)	646g con cover piede e calza
Altezza: (Misura 27)	73 mm con giunto piramidale maschio e cover piede
Altezza tallone:	10mm
Opzioni adattatore	Giunto piramidale maschio



RISPOSTA
PROPORZIONALE



TALLONE ATTIVO
CARBON-X®



LEVA PLANTARE
SU TUTTA LA
LUNGHEZZA



ALLUCE
SEPARATO




LAMINA
SEPARATA

PRO-FLEX® LP

INFORMAZIONI ORDINE


PER UN PIEDE COMPLETO

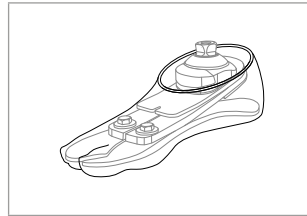

Al momento dell'ordine si prega di selezionare il kit modulo pompa Unity in base alle dimensioni del modulo piede: Unity verrà premontato sul piede. Per maggior comodità e compatibilità di sistema, si consiglia il kit valvola Unity come mezzo di collegamento all'invasatura.

Per la guida alla scelta della categoria della cuffia ed i codici di prodotto si prega di consultare la pagina relativa ad Icross Seal-In.


PER PIEDE COMPLETO CON UNITY

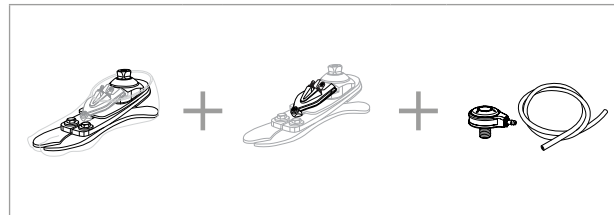

GUIDA PER LA SCELTA DELLA CATEGORIA

Peso kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166
Livello di attività basso	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Livello di attività moderato	1	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A
Livello di attività alto	2	3	4	5	6	7	8	9	N/A	N/A

INGOMBRO

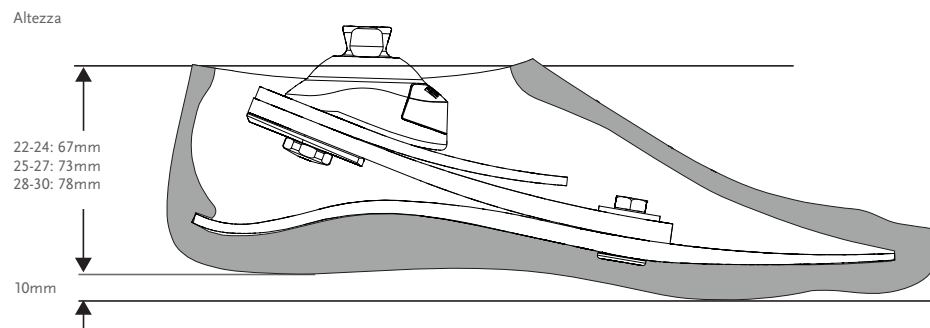


*Nota: Pro-Flex LP con Unity ha la stessa altezza di Pro-Flex LP.

PRO-FLEX® LP

KIT


PRO-FLEX LP CON GIUNTO PIRAMIDALE MASCHIO

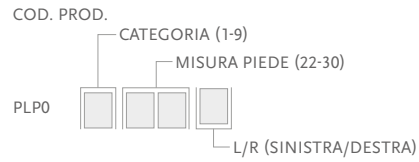

Include:


- Modulo piede
- Cover piede rimovibile* con calza Spectra nera

*Per Pro-Flex LP con cover piede marrone aggiungere "BR" al codice prodotto

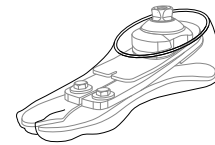

KIT PIEDE PER UNITY


PRO-FLEX LP

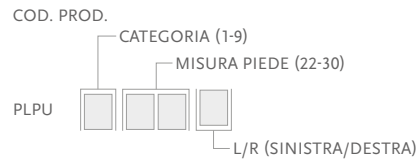

Include:



- Modulo piede
- Cover piede rimovibile* con calza Spectra nera

*Per Pro-Flex LP con cover piede marrone aggiungere "BR" al codice prodotto
Nota: Unity verrà premontato sul piede se ordinato con il codice PLPU

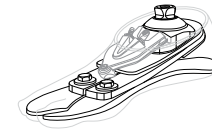

KITS UNITY

Foto	Cod. Prod.	Descrizione	Kit piede applicabile
1	UPL0024	Modulo pompa Unity PLP S22-24	Pro-Flex LP misura 22-24
1	UPL0030	Modulo pompa Unity PLP S25-30	Pro-Flex LP misura 25-30
2	UTT0001	Kit valvola Unity TT	Tutti
3	UTF0001	Kit valvola Unity TF	Tutti
4	UTF0006	Kit valvola tubo TF	Tutti
	L-5446XX	Kit Icelock 544	Tutti

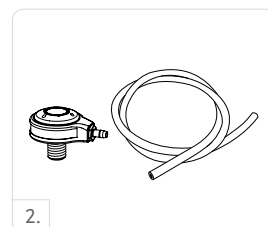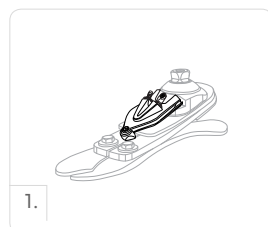


PRO-FLEX® LP

COMPONENTI DI RICAMBIO UNITY

Cod. Prod.	Descrizione
UPL00021	Componenti Unity PLP 22-24
UPL00022	Componenti Unity PLP 25-30

Include:

- Lama pompa
- Vite di montaggio
- Membrana
- Tubo
- Raccordo spinato
- Loctite
- Valvole unidirezionali
- Chiave esagonale

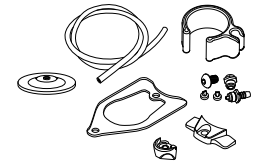

COMPONENTI

KIT CUNEI TALLONE

Per la regolazione della rigidità del tallone e delle caratteristiche del roll-over.

Cod. Prod.	Misura piede
CM150011	22-30

Include:

- 3 Cunei
- Adesivo




LOCTITE 495 NERO

Cod. Prod.	Descrizione
CM160015	Loctite 495 nero

FINITURE COSMETICHE

KIT COVER PIEDE, BEIGE E MARRONE*

COD. PROD.

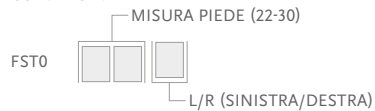

Include:

- Cover Piede*
- Collegamento cover piede
- Calza Spectra nera

*Nota: per ordinare la cover marrone, aggiungere "BR" al codice prodotto