

BALANCE™ KNEE

UNITY
COMPATIBLE



Balance Knee è stato progettato per offrire sicurezza e stabilità agli utenti meno attivi. La sua geometria, un design a quattro assi, è facilmente regolabile per ottimizzare il necessario equilibrio tra stabilità e comportamento dinamico per ciascun utente. L'accorciamento della fase d'oscillazione intermedia (mid-swing) favorisce il movimento di pendolo di ciascun passo, contribuendo a prevenire il sollevamento dell'anca, preservandola.



Balance Knee è semplice da installare e regolare, infatti tutte le impostazioni del ginocchio (inclusa la regolazione del supporto all'estensione) possono essere effettuate esternamente, non è quindi necessario smontare l'intera protesi ed è esente da manutenzione. Balance Knee è ora disponibile con un supporto all'estensione rinforzato o con un dispositivo di bloccaggio manuale.

Profilo utente:

- Deambulazione in ambienti domestici o in spazi pubblici limitati
- Deambulazione a bassa velocità costante
- Attività a basso impatto, utenti con scarso controllo volontario

Informazioni utente	
Livello di amputazione:	Transfemorale e Disarticolazione di ginocchio
Livello di attività:	Basso
Limite peso:	125kg

INGOMBRO

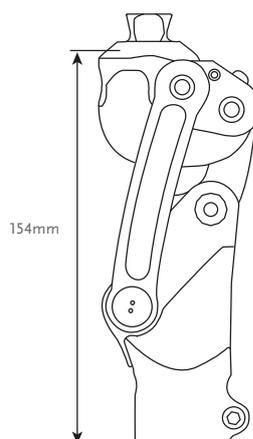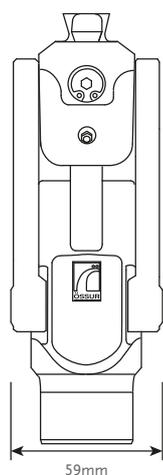

Informazioni sul prodotto	
Altezza ginocchio:	154mm
Peso ginocchio:	0.590kg
Arresto di flessione:	a 180° (165° con il dispositivo con bloccaggio manuale)

BALANCE™ KNEE

KIT

Cod. prod.	Descrizione
BKN12500	Balance Knee
BKN12511	Balance Knee con bloccaggio manuale*

Include:

- Balance Knee
- Rivestimento
- Kit Corda (lanyard)*

Cod. prod.	Descrizione
LKN12590	Dispositivo di sbloccaggio a corda



RIVESTIMENTO COSMETICO

Cod. prod.	Descrizione
BKN12550	Rivestimento per Balance Knee



UNITY

KITS UNITY

Cod. prod.	Descrizione	Kit piedi per Unity
UTF0001	Kit valvola Unity TF	Tutti

