

## MAUCH® KNEE

UNITY®  
COMPATIBLE



Non lasciatevi ingannare dal profilo sofisticato, con il blocco all'estensione, la struttura leggera in alluminio ed i cuscinetti sferici migliorati, il Mauch Knee è in grado di resistere alle condizioni più imprevedibili.


- Sistema di ginocchio idraulico monoassiale con controllo della fase di oscillazione e di appoggio (SNS®)
- Sviluppato per la deambulazione a velocità variabili
- Maggiore durata e movimento più sicuro
- Telaio in alluminio ultra resistente
- Cuscinetti a rulli sui punti d'attacco dell'asse e del cilindro del ginocchio per un'azione scorrevole
- Controllo in fase di appoggio con resistenza proporzionale
- L'interruttore di selezione della modalità aziona le funzioni di bloccaggio manuale e oscillazione libera
- Un profilo liscio aiuta la finitura cosmetica
- Kit per ginocchi a bassa resistenza e a oscillazione sono disponibili su ordinazione speciale



Informazioni utente	
Livello di amputazione:	Transfemorale
Livello di attività:	Moderato - Alto, Sport
Limite peso:	136kg

Informazioni sul prodotto	
Altezza ginocchio:	248mm
Peso ginocchio (con cilindro):	1.14kg
Arresto di flessione:	a 115°

## INGOMBRO

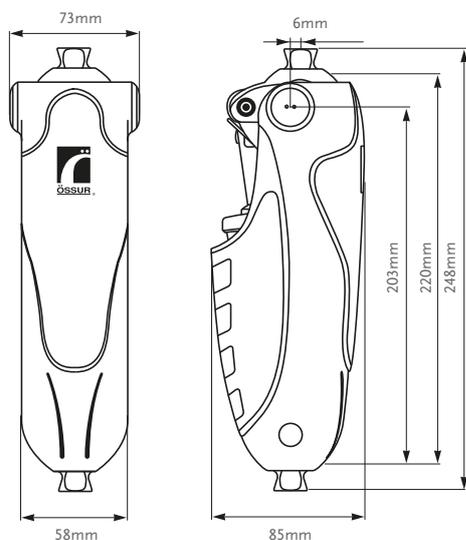

## KITS

Cod. prod.	Descrizione
MKN01360	Mauch Knee Kit SNS - Resistenza regolare
MKN01361*	Mauch Knee Kit - Resistenza bassa
MKN01362*	Mauch Knee Kit - Solo per controllo della fase dinamica
MKN01363	Mauch Knee Kit SNS - Resistenza alta, fase di appoggio ottimizzata

\*Ordine speciale

## COMPONENTI

Cod. prod.	Descrizione
MKA01361	Rivestimento ginocchio
MKA01362	Copertura anteriore
MKA01363	Copertura posteriore
MKA01364	Spina laterale

\*Ordine speciale