

# RHEO KNEE®



## INTRODUZIONE

RHEO KNEE è un ginocchio controllato da microprocessore il quale offre un'ottima combinazione tra stabilità e sicurezza. Permette una deambulazione davvero naturale e facile – anche su terreni difficili. RHEO KNEE è facile da montare, fornendo all'utente risultati affidabili.

## CARATTERISTICHE

- Fase statica autoadattiva in tempo reale e controllo dello swing.
- Avvio dello swing affidabile e facile su tutte le superfici.
- Ripresa automatica in caso di inciampo.
- Blocco all'estensione.
- Il design resistente alle intemperie permette l'esposizione agli spruzzi d'acqua.
- Össur Logic app per dispositivi iOS fornisce:
- Impostazione e regolazione semplice per il tecnico ortopedico, e rapporti di attività dell'utente stampabili.
- Esercizi training funzionale per migliorare la sicurezza dell'utente.
- Scelta delle preferenze dell'utente e controllo del contapassi e del livello di carica della batteria.
- L'Estensione Intelligente permette di alzarsi più facilmente da una posizione seduta con meno resistenza.
- Facilita il superamento degli ostacoli e il camminare all'indietro.



Seal-In® X TF



Pro-Flex®



Pro-Flex® XC



Pro-Flex® XC  
Torsion



Pro-Flex® LP  
Torsion




## RHEO KNEE®




Informazioni utente	
Livello di amputazione:	Transfemorale e Disarticolazione di ginocchio
Livello di attività:	Da basso a moderato
Limite peso:	136kg
Informazioni sul prodotto	
Peso del ginocchio:	Appross. 1.6kg
Altezza strutturale:	236mm
Flessione del ginocchio:	120°
Telaio realizzato in alluminio	
Meccanismo assistenza all'estensione ridisegnato	
Resistente alle intemperie	

## INGOMBRO

### RHEO KNEE

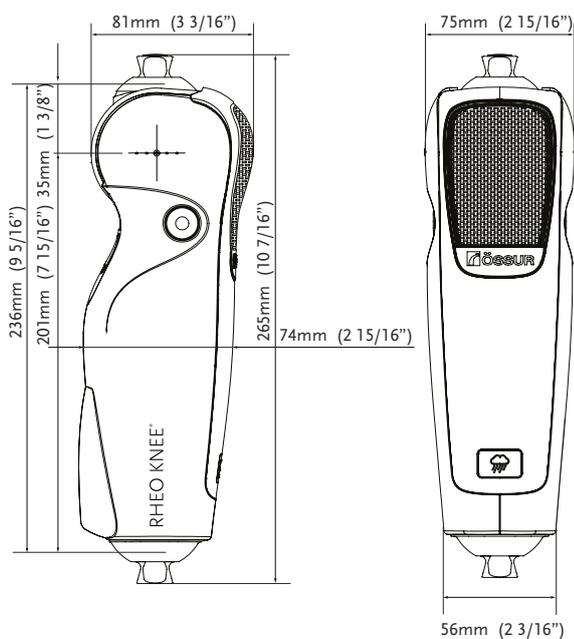

### RHEO KNEE CON ADATTATORE PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO (A - 145310)

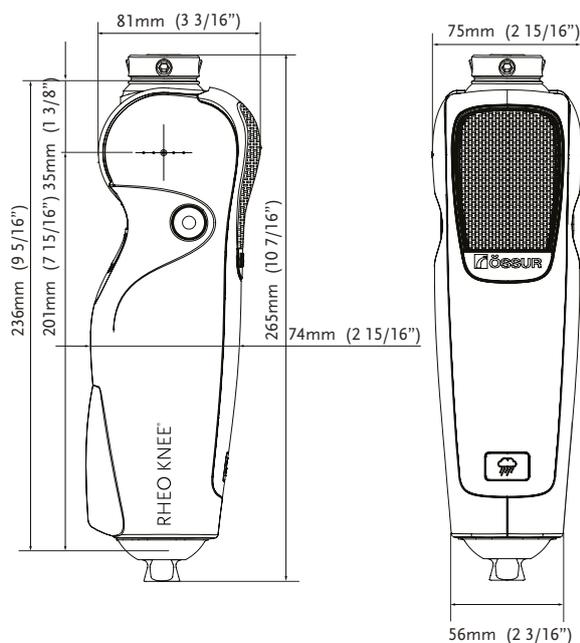

# RHEO KNEE®

## KITS

### KIT RHEO KNEE

Cod. prod.	Descrizione
RKN130003	3 anni di garanzia
RKN130005	5 anni di garanzia (incluso tagliando a 40 mesi)

Include:

- RHEO KNEE
- Caricabatteria RHEO KNEE
- Certificato di garanzia
- Manuale utente



### ESTENSIONE DI GARANZIA

Cod. prod.	Descrizione
RKN3GE3YR	Estensione di garanzia 3 anni - Garanzia totale massima 6 anni (3+3)

### KIT RHEO KNEE CON ADATTATORE PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO:

RHEO KNEE con adattatore per disarticolazione di ginocchio è la soluzione per gli utenti con un'amputazione con disarticolazione di ginocchio e con monconi lunghi. Per ordinare RHEO KNEE con questo tipo di adattatore, ordinare il Kit RHEO KNEE e aggiungere l'adattatore per disarticolazione di ginocchio.

Cod.prod.	Descrizione	Altezza	Peso
A-145310	Adattatore per disarticolazione di ginocchio	9 mm	33g
A-554700	Giunto doppio maschio / Femmina in acciaio	24mm	153g



### RHEO KNEE 3 COMPONENTI

Cod.prod.	Descrizione
RKNLPCWB1	Software RHEOLOGIC Workbench per PC
N/A	L'applicazione ÖSSUR LOGIC per dispositivi IOS è disponibile sul Apple Store

Cod.prod.	Descrizione
PRX00421	Caricabatteria con cavo d'interfaccia



Cod.prod.	Descrizione
BIC00110	Cosmetico di protezione per RHEO KNEE*



\*Garanzia 6 mesi limitata. Esclude danni di normale usura.

## UNITY

### KITS UNITY

Cod.prod.	Descrizione	Kit piedi per Unity
UTF0001	Kit Valvola Unity TF	Tutti

