



QUICKIE
Live without limits.

XENON²
CHIUSURA SEMPLICEMENTE
PERFETTA E STRAORDINARIA.
PERFORMANCE DI GUIDA.

SERIE XENON²

ELEGANZA E ALTE PRESTAZIONI

Che tu stia cercando sia la migliore performance di guida possibile, sia la carrozzina superleggera pieghevole più compatta del mondo, c'è una Xenon² adatta proprio a te.

Forse il design lineare della Xenon² FF?
O la grande praticità della Xenon² SA?
Oppure la rigidità potenziata della Xenon² Hybrid?
Qualunque sia la versione delle tre che sceglierai, la sofisticata eleganza della tua Xenon² sarà sempre al centro dell'attenzione.



” *La musica è la sua passione. La sua voce è espressiva: Monika Kuszyńska ha rappresentato la Polonia all'Eurovision Song Contest 2015 di Vienna eseguendo la sua canzone "In the Name Of Love".
In Polonia Monika è già molto famosa ed ora è riuscita a condividere e trasmettere il suo messaggio anche con moltissime persone di altri Paesi.*



XENON² FF LA PIÙ LEGGERA

La carrozzina a telaio pieghevole più leggera del mondo.
Telaio anteriore fisso.
Design accattivante, pulito e lineare.



XENON² HYBRID LA PIÙ RESISTENTE

Nessun compromesso in termini di rigidità.
Telaio anteriore fisso rinforzato.
140 Kg di portata massima.



XENON² SA LA PIÙ ECLETTICA

Facili trasferimenti dalla carrozzina.
Telaio rinforzato con pedane swing away.
Le dimensioni estremamente compatte, quando ripiegata, consentono un facile trasporto in auto.





LA CARROZZINA PIEGHEVOLE PIÙ LEGGERA DEL MONDO...

Come si ottiene una carrozzina con un peso di soli 8,8 kg? Utilizzando materiali di altissima qualità: nel telaio viene impiegato lo stesso alluminio di alcuni componenti aerospaziali e lo stesso è sottoposto ad un innovativo processo disponibile solo per Quickie: ShapeLoc Technology.

Attraverso il trattamento termico dell'alluminio siamo in grado di aumentare la sua resistenza e questo permette che i tubi della carrozzina siano più sottili, più leggeri ed allo stesso tempo più resistenti di quelli di una normale carrozzina pieghevole. Basta provarla...





... CON IMPAREGGIABILI PRESTAZIONI

Al centro di Xenon² vi è una crociera unica che si posiziona perfettamente appena sotto il telo sedile così da darvi la sensazione di un telaio aperto molto minimalista, come fosse una carrozzina rigida. La crociera quasi non si vede!

Ma le similarità non terminano con le apparenze: la piastra completamente ridisegnata, abbinata alla nuova crociera, fornisce la sensazione di una guida rigida e stabile tipica di un telaio rigido, ma con tutte le caratteristiche tipiche di un telaio pieghevole.

→ **Semplicissimo meccanismo di chiusura**

I nuovi supporti in alluminio applicati sulla crociera manterranno le ruote in parallelo quando la carrozzina verrà piegata, in questo modo Xenon² rimarrà stabile in qualunque situazione.






STILE IN MOVIMENTO

Personalizza la tua Xenon² e renditi riconoscibile scegliendo tra 32 colori di telaio per tutti i gusti. Vi sono anche pacchetti anodizzati tra i quali scegliere per le forcelle e le ruote. Puoi anche sottolineare di più la tua scelta dei colori grazie alla rifinitura del tuo schienale EXO.

→ Personalizza la tua Xenon²
con una selezione di 32
accattivanti colori.

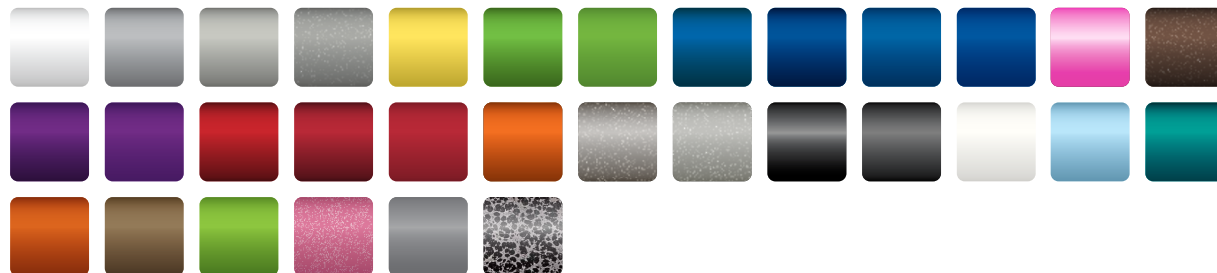

” **Monika Kuszyńska:** mi piace essere al passo con la moda. L'accattivante design di Xenon² completa perfettamente il mio stile creativo.



→ **Aggiungi un tocco di colore al telo schienale**

Per lo schienale EXO, assai comodo ed elegante, si può scegliere tra 5 colori delle bande laterali.



→ **Scegli le ruotine anteriori e le forcelle secondo il tuo stile**

Le ruote anteriori e le forcelle possono essere scelte nei colori anodizzati: grigio argento, blu, rosso, arancione o nero per un look davvero personale.



” **Monika Kuszyńska:** *La mia Xenon² è proprio come la mia musica. È come fosse parte di me. Mi accompagna quando sono in viaggio in tutto il mondo.*

REGOLABILE

SECONDO LE TUE ESIGENZE

Esattamente come dovrebbe essere, progettata per essere adattabile a qualsiasi esigenza, la piastra della Xenon² offre una facile regolazione in altezza.

Desideri cambiare il modo di guidare la tua carrozzina, da meno attivo a più attivo oppure viceversa? Semplicemente cambia la regolazione del centro di gravità riposizionando la piastra. Senza dimenticare di regolare l'angolo dello schienale per una postura ergonomica.

❶ Centro di Gravità

Permette di rendere la guida della carrozzina da molto attiva a meno attiva.

❷ Angolo dello Schienale

La corretta regolazione dell'angolo schienale è importante per una postura ergonomica.

❸ Altezza Posteriore della Seduta

Proprio come dovrebbe essere: è possibile regolare l'altezza di seduta secondo le tue esigenze.





XENON[®] FF
LA PIÙ LEGGERA



XENON[®] HYBRID
LA PIÙ RESISTENTE



XENON[®] SA
LA PIÙ ECLETTICA

XENON²

Una famiglia di carrozzine superleggere con una chiusura semplicemente perfetta ed una straordinaria performance di guida.



Caratteristiche ed opzioni della serie Xenon² – Personalizza la carrozzina secondo le tue esigenze.
Per maggiori informazioni sulle opzioni disponibili consultare le schede d'ordine di Xenon² FF e Xenon² SA.



// SCHIENALE ABBATTIBILE

Questo schienale riducibile a metà si piega in avanti così da ridurre al massimo l'ingombro della carrozzina nel trasporto.



// CORRIMANI SURGE®LT

La striscia in gomma Gripton posizionata sul corrimano ergonomico dalla forma ovale permette la massima presa per la spinta.



// SCHIENALE REGOLABILE IN ANGOLAZIONE

Elegante design integrato nel telaio. Regolazione dello schienale da -15° a +13° con incrementi di 4°.



// BRACCIOLI ESTRAIBILI

Braccioli estraibili e ribaltabili con imbottitura ad altezza fissa o regolabile.



// BRACCIOLI TUBOLARI IMBOTTITI ESTRAIBILI

Questo bracciolo swing away permette di avere il supporto solo quando serve, senza alcuna interferenza durante la propulsione.



// SPONDINE IN FIBRA DI CARBONIO

Spondine assai leggere e molto personali grazie al loro aspetto unico.



// PEDANA CON CHIUSURA A LIBRO AUTOMATICA

Questa pedana è regolabile in profondità ed angolazione ed è disponibile con appoggiapiedi in materiale composito o in fibra di carbonio solo per Xenon² FF e Xenon² Hybrid.



// PREDISPOSIZIONE PER TRASPORTO IN AUTO

Con questa opzione la carrozzina è approvata per il trasporto in auto (crash tested secondo la normativa ISO 7176-19).

DATI TECNICI

	Xenon ² FF	Xenon ² Hybrid	Xenon ² SA
Portata massima utente:	110 kg	140 kg	125 kg
Larghezza seduta:	32 – 46 cm	32 – 50 cm	32 – 50 cm
Profondità seduta:	34 – 50 cm	34 – 50 cm	34 – 50 cm
Altezza anteriore seduta:	43 – 55 cm	43 – 55 cm	43 – 56 cm
Altezza posteriore seduta:	37 – 50 cm	37 – 50 cm	37 – 50 cm
Altezza schienale:	25 – 47,5 cm	25 – 47,5 cm	25 – 47,5 cm
Angolo schienale:	da -15° a +13° con incrementi di 4°	da -15° a +13° con incrementi di 4°	da -15° a +13° con incrementi di 4°
Centro di gravità (COG):	4 – 13 cm	4 – 13 cm	4 – 13 cm
Campanatura:	0° / 2° / 4°	0° / 2° / 4°	0° / 2° / 4°
Versione telaio:	Telaio anteriore fisso	Telaio anteriore rinforzato	Telaio anteriore rinforzato swing away
Peso carrozzina:	da 8,8 kg	da 9,5 kg	da 10,3 kg
Colori:	32	32	32
Crash tested:	si	si	si

Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d'ordine presente sul nostro sito web.
Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical.
Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
E-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it

