



LIFE FAMILY

SCEGLIETE QUELLA PERFETTA
PER IL VOSTRO STILE DI VITA!

LA FAMIGLIA LIFE

**VIVETE LA VITA APPIENO.
LA GRANDE FAMIGLIA LIFE VI DARA' PIÙ LIBERTA'
DI QUANTA NE ABBIATE MAI PROVATA.**

La famiglia LIFE vi rimarrà impressa con le sue carrozzine superleggere, robuste, moderne ed estremamente regolabili.

Potendo scegliere tra le prestazioni di un telaio rigido e la trasportabilità di un telaio pieghevole, troverete facilmente la LIFE perfetta per voi.



LIFE

L'ECCLETTICA

Telaio pieghevole,
pedane integrate o swing-away
(come mostrato in figura)



LIFE R

LA SPORTIVA

Telaio rigido,
pedane integrate (come mostrato
in figura) o swing-away



LIFE

PERFETTA PER
LA VITA MODERNA



EASY LIFE

Vivete la vita appieno. Uscite ed esplorate il mondo.
Quali che siano i vostri progetti, la vostra LIFE è pronta.

Disponibile con telaio anteriore fisso (FF) o swing away (SA), Quickie Life risponde a numerose esigenze degli utenti di carrozzine attive pieghevoli. Quickie Life utilizza un design ben collaudato in grado di offrire una carrozzina robustissima e molto efficiente con una portata massima di 140 kg.

Ma perché fermarsi qui? Personalizzate la vostra LIFE scegliendo tra un'ampia selezione di spondine, braccioli, angoli pedana, appoggiapiedi, ruote e corrimani. Definite il vostro stile scegliendo tra 32 colori per il telaio e tra 3 colori anodizzati per le forcelle e per le piastre dell'asse delle ruote posteriori.



LIFE

L'ECLETTICA

Telaio pieghevole,
con pedane integrate
(FF - come mostrato in
figura) o swing away (SA).



Opzioni e caratteristiche di LIFE: configurate questa carrozzina pieghevole superleggera in base alle vostre esigenze. Per maggiori informazioni sulle opzioni disponibili, consultate la scheda d'ordine di LIFE.



// SEDUTA REGOLABILE IN ALTEZZA IN SETTE POSIZIONI

Con campanatura da 0° a 4° e quattro posizioni per il centro di gravità (da quella molto attiva di 8,3 cm a quella più stabile di 2,3 cm).



// NUOVO DESIGN PER I BRACCIOLI DESK

Maggiore rigidità e design elegante.



// SISTEMA DI BLOCCO DELLA CHIUSURA

Azionabile con una sola mano, evita che la carrozzina si possa aprire inavvertitamente.



// SPONDINE DAL LOOK MODERNO

Le spondine completamente ridisegnate sono disponibili in alluminio o nella elegante versione in carbonio.



// TELAIO ANTERIORE SWING AWAY ATTIVO CON ANGOLO PEDANA A 90°

Gli angoli pedana swing away sono ora disponibili anche nella versione a 90° per un design più compatto e sportivo.



// INGOMBRO RIDOTTO

Opzioni come lo schienale abbattibile e le pedane rimovibili consentono di ridurre al minimo l'ingombro della carrozzina piegata.



// PEDANA UNICA RIBALTABILE

Leggera e regolabile in angolazione e profondità.



// PERSONALIZZAZIONE

Definite il vostro stile scegliendo uno dei colori anodizzati per le forcelle e per le piastre dell'asse delle ruote posteriori.

LIFE R

LE PRESTAZIONI CHE
DESIDERATE PER I MOMENTI
SPECIALI DELLA VOSTRA VITA.

LIFE R, L'ATTIVA

Rigida, durevole e robusta, LIFE R è stata disegnata per rendere più facile la vostra VITA ora e negli anni che verranno.

Qualunque cosa la giornata vi riservi, l'efficiente design di LIFE R vi consentirà di focalizzarvi su ciò che è più importante per voi.

Disponibile sia con telaio anteriore fisso (FF) sia con telaio anteriore swing away (SA), la nuova LIFE R è dotata di un design modulare che consente di cambiare la parte anteriore per aumentare la profondità della seduta o per cambiare il tipo di telaio.

La versione con telaio anteriore fisso (FF) è disponibile con differenti angoli (75°, 85° e 85° con rientro) e quattro profondità di seduta. Il telaio anteriore swing away (SA) è disponibile con tre angoli (70°, 80° e 90°), vari tipi di pedana e tre lunghezze di telaio.



LIFE R

LA SPORTIVA

Telaio rigido,
con pedane integrate
(come mostrato in figura)
e estraibili.



Opzioni e caratteristiche di LIFE R: configurate questa carrozzina rigida in base alle vostre esigenze. Per maggiori informazioni sulle opzioni disponibili, consultate la scheda d'ordine di LIFE R.



// SEDUTA REGOLABILE IN ALTEZZA IN SETTE POSIZIONI

Con campanatura da 0° a 4° e quattro posizioni per il centro di gravità (da quella molto attiva di 8,3 cm a quella più stabile di 2,3 cm).




// NUOVO FRENO A LEVA DRITTA

Freni facili da azionare con leva swing away per facili trasferimenti.



// SCHIENALE REGOLABILE IN ANGOLAZIONE (OPTIONAL)

Leggero e semplice da regolare. Consente 20° di regolazione da -12° a +8° con incrementi di 4°.

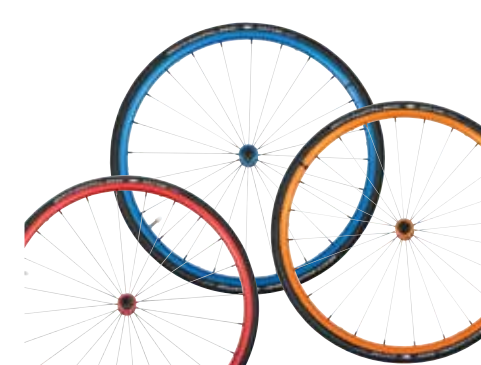

// RUOTE POSTERIORI DA 24" ANODIZZATE

Rendete più vivace la vostra scelta di colori aggiungendo il mozzo e il cerchio delle vostre ruote da 24" grazie alla scelta tra 3 colori anodizzati.



// PERSONALIZZAZIONE

Definite il vostro stile scegliendo uno dei colori anodizzati per le forcelle e per le piastre dell'asse delle ruote posteriori.



// CORRIMANI SURGE® LT

La striscia in gomma Gripton applicata alla parte superiore del corrimano a sezione ovale ergonomica offre la massima trazione.



// BLOCCO PER PEDANA

La pedana rimane sempre in posizione anche qualora doveste percorrere terreni sconnessi.



// ANGOLI PEDANA SWING AWAY (TELAIO SA)

Danno un aspetto moderno e attivo. Disponibili con angolo di 70°, 80° e 90°.

DATI TECNICI

	Life	Life R
Portata massima	140 kg	125 kg
Tipo e angolo del telaio	Telaio FF con pedane integrate: 75°/85°/85° con rientro di 20 mm Telaio SA con pedane swing away: 90°/80°/70°	Telaio FF con pedane integrate: 75°/85°/85° con rientro di 20 mm Telaio SA con pedane swing away: 90°/80°/70°
Larghezza seduta	360 - 540 mm	340 - 480 mm
Profondità seduta	360 - 500 mm	360 - 500 mm
Altezza anteriore seduta	400 - 540 mm	390 - 500 mm
Altezza posteriore seduta	400 - 510 mm	360 - 470 mm
Altezza schienale	250 - 500 mm	250 - 450 mm
Angolo schienale	78° - 102°	78° - 98°
Campanatura	0°/1°/2°/3°/4°	0°/1°/2°/3°/4°
Larghezza // lunghezza // altezza totali	760 mm // 1075 mm // 995 mm	720 mm // 1075 mm // 950 mm
Raggio di sterzata	700 mm	700 mm
Pendenza massima superabile	7° (per utilizzare i freni)	7° (per utilizzare i freni)
Ruote anteriori // Ruote posteriori	4"/5"/6"/7" // 22"/24"/25"	4"/5"/6"/7" // 22"/24"/25"
Peso carrozzina	da 11 kg	da 11 kg
Peso carrozzina smontata	da 6,7 kg	da 6,7 kg
Peso della parte più pesante	2,1 kg	2,1 kg
Parti rimovibili	Ruote posteriori e angoli pedana (per telaio SA) (solo per il trasporto)	Ruote posteriori e angoli pedana (per telaio SA) (solo per il trasporto)
Colori	32	32
Crash test	Sì (approvata per il trasporto in base alla norma ISO 7176-19)	
Trasporto senza utente	Fissare la carrozzina in modo sicuro sul veicolo (ad esempio automobile o aeroplano)	
Destinazione e condizioni d'uso	Per persone dotate di mobilità limitata (bambini e adulti), per spinta autonoma o con l'aiuto di un assistente, per utilizzo al chiuso e all'aperto.	



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it



Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d'ordine presente sul nostro sito web.

Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical.
Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.com

