




POTENZA EXTRA PER LA TUA CARROZZINA



PRESTAZIONI
ELEVATE

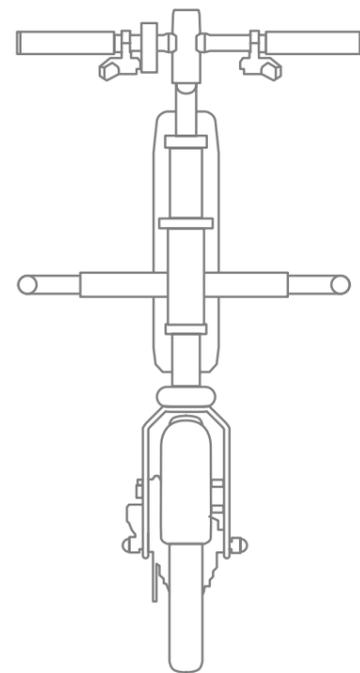

ESPLORA COME MAI PRIMA D'ORA

SEMPRE INSIEME A TE, IN CITTÀ E IN MEZZO ALLA NATURA

**LUOGHI CHE UNA VOLTA ERANO IMPOSSIBILI DA
RAGGIUNGERE**

Progettato in modo intelligente per offrirti ancora più indipendenza e naturalezza, Empulse F55, il nuovo arrivato nella nostra famiglia di e-mobility, ti permette di ampliare i tuoi orizzonti, di ridurre i tuoi sforzi e di goderti il puro piacere della guida.

Ultra compatto e facile da montare, ti permette di aggiungere alla tua carrozzina quella forza in più che ti può essere necessaria in certi momenti. E' la soluzione eco-friendly ideale quando non vuoi utilizzare l'auto, o quando, semplicemente, vuoi uscire a divertirti.



GODITI IL VIAGGIO

DIVERTITI



TI PORTA OVUNQUE TU VOGLIA ANDARE

La vita in città è dinamica e vibrante. Tieni il passo, goditi la mobilità e la flessibilità. Ascensori stretti, viuzze anguste, poco spazio tra i corridoi di un supermercato? Nessun problema grazie ad un ridotto cerchio di rotazione.

Attiva il cruise control e non preoccuparti più di utilizzare continuamente la leva dell'acceleratore. Empulse F55 manterrà la velocità selezionata per renderti tutto più semplice. Vuoi andare più lontano? Non devi preoccuparti, la batteria di F55 è certificata dalla IATA, rendendo così il tuo viaggio aereo più semplice.

Con F55 puoi goderti un caffè al bar o una passeggiata con i tuoi amici senza pensieri.



#EXPLORELIKENEVERBEFORE



Grazie al potente motore elettrico brushless ed all'ottima trazione, potrai affrontare e superare anche terreni difficoltosi.

**NO
LIMITS**

POWERBANK


Batteria agli ioni di litio da 8,1 Ah per un'autonomia massima di 35 km, con un sistema intelligente che migliora i cicli di carica e la durata della batteria.

TRAZIONE

E' l'aspetto più importante quando si affronta una salita. Empulse F55 è completamente regolabile, permettendo così di bilanciare il peso e di favorire la migliore trazione.

DIPENDE DA TE

Puoi scegliere Empulse F55 con la ruota da 8,5", ideale nell'utilizzo urbano oppure puoi sceglierlo con la ruota da 14", perfetto per aumentare il comfort di guida in terreni sconnessi o con lievi asperità.

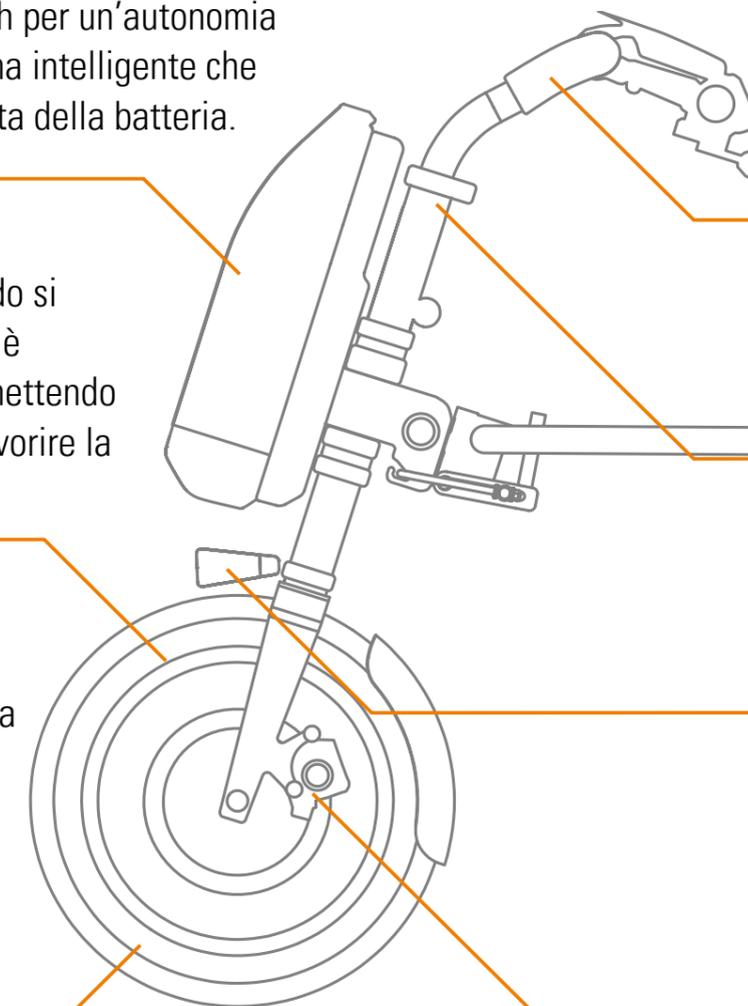

DISPLAY

Controllo completo grazie al display facile da leggere: indicatore di velocità, distanza percorsa nel viaggio, percorrenza totale, carica della batteria, consumo di energia.

GUIDA CONFORTEVOLE

Regolazione rapida della barra del manubrio per garantire sempre il miglior assetto di guida.

ILLUMINA IL TUO PERCORSO

La luce a LED anteriore è standard su Empulse F55.

SI FERMA SOLO SE LO VUOI TU

Due sistemi di frenata indipendenti per una maggiore sicurezza: elettrofreno senza usura e potente freno a disco.

**PORTALO
SEMPRE CON TE,
QUANDO TI OCCORRE.
SMONTALO
FACILMENTE,
QUANDO NON TI
SERVE.**



CON TE, OVUNQUE



SEI A POCHI SECONDI...

... dalle tue avventure in città o in mezzo alla natura. Grazie al suo semplicissimo sistema di montaggio, F55 è applicabile alla maggior parte delle carrozzine in pochi secondi, diventando così il tuo ideale compagno di viaggio.

Ruota di trazione da 8,5", copertone pieno, montato su una carrozzina con telaio anteriore fisso



Ruota di trazione da 14", copertone pneumatico, montato su una carrozzina con telaio anteriore fisso



Ruota di trazione da 8,5", copertone pieno, montato su una carrozzina con telaio anteriore swing-away, con staffe di ancoraggio più lunghe per arrivare sotto il telaio e montante del manubrio a collo di cigno.




Le staffe di ancoraggio al telaio si ripiegano velocemente verso l'alto, permettendo così di ridurre l'ingombro complessivo di Empulse F55. Se necessario, le staffe possono essere anche rimosse così da ridurre ulteriormente l'ingombro e il peso, aspetti fondamentali per spostarsi in completa autonomia in ogni ambiente.



MOSTRA I TUOI COLORI

TI
RAPPRESENTANO

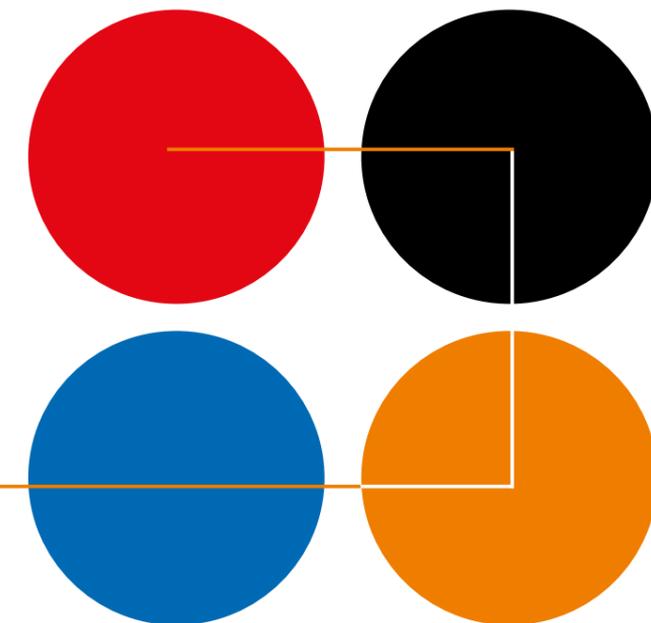

La personalizzazione è molto semplice grazie ai kit di colori facili da montare per la protezione e per le barre laterali. Nero, blu, rosso ed arancione vengono forniti standard con F55 e possono essere cambiati agevolmente.



DATI TECNICI

Empulse F55

Larghezza anteriore del telaio della carrozzina	da 260 a 480 mm ⁽¹⁾
Velocità massima	6 km/h, 10 km/h, 15 km/h in base alle versioni
Autonomia	fino a 35 km
Pendenza superabile	fino a 6° (11%)
Portata massima	110 kg
Dimensione della ruota	8,5" piena morbida o 14" pneumatica in base alle versioni
Motore	520W
Freno	doppio sistema frenante: freno a disco meccanico ed elettrofreno separato
Batteria	agli ioni di litio, 36V, 8.1 Ah
Peso per il trasporto	9 kg (solo per propulsore)
Peso delle staffe di ancoraggio	2 kg
Peso della batteria	2 kg
Peso totale	13 kg
Colore	nero
Colori delle rifiniture (tutti inclusi nella confezione)	nero, rosso, blu, arancione (nero montato in produzione)

(1) La larghezza del telaio è misurata da centro tubo a centro tubo all'altezza del punto di montaggio al telaio. Utilizzare solo questa misura per verificare la compatibilità, non la larghezza di seduta.

Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d'ordine presente sul nostro sito web. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical. Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it



Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia
Tel.: +39 0523 573111

Fax: +39 0523 570060

e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it