

Junior+ by JENX

medimec®



medimec.it

Junior+ by JENX

Una seduta confortevole, anatomica e stabile, disegnata in base alle necessità dei bambini tra i 18 mesi e i 12 anni di età. **Junior+** è l'evoluzione del precedente e molto popolare JUNIOR ma offre maggiori confort:

- I supporti della seduta più confortevoli e flessibili;
- Seduta con imbottitura anatomica super-soft in poliuretano e memory foam per abbinare il confort alla stabilità nella seduta;
- Versatilità nella personalizzazione grazie ai molti tipi di accessori per il capo, il tronco, le gambe e i piedi;
- fodere facilmente esportabili e lavabili consentono di rimuovere facilmente lo sporco e contengono speciali agenti antimicrobici che rendono Junior+ perfetto per gli ambienti multiutente;

Junior+ by JENX

INNOVATIVE
FEATURE

PROTRATTORI PER LE SPALLE regolabili favoriscono il corretto posizionamento delle spalle e del braccio. Prevengono un'eccessiva retrazione e aiutano la mano a stare nella posizione più funzionale per il gioco.

INNOVATIVE
FEATURE

REGOLAZIONE DELLA PROFONDITA' DELLA SEDUTA per assicurare la corretta posizione ad ogni bambino, la seduta è completamente regolabile, senza chiavi.

PEDANA RIBALTABILE E REGOLABILE

per accogliere e incoraggiare la flessione plantare. La regolazione avviene facilmente e rapidamente tramite il pomello. La pedana chiudibile verso l'alto consente trasferimenti facili e sicuri. Le fessure sulla pedana facilitano inoltre l'applicazione e installazione dei sandaletti o altri supporti per i piedi.

INNOVATIVE
FEATURE



INNOVATIVE
FEATURE

SUPPORTI TORACALI IMBOTTITI E FLESSIBILI

Disponibili in diverse dimensioni, questi supporti imbottiti sottili e molto flessibili sono progettati per imitare la sensazione di essere trattenuti. I supporti sono montati su una staffa swing away che può facilmente essere aperta per agevolare i trasferimenti.

INNOVATIVE
FEATURE

CONTENIMENTI LATERALI PER LE GAMBE due o quattro, queste imbottiture laterali per le gambe consentono di controllare la posizione della gambe indipendentemente dalla posizione pelvica, creando abduzione o adduzione. Facili da regolare, con sistema a scomparsa per facilitare i trasferimenti.

INNOVATIVE
FEATURE

Le **CAVIGLIERE** (accessorio) da applicare ai sandaletti, hanno un particolare sistema di aggancio magnetico che consente loro di essere «manovrate» con una sola mano.

Junior+ by JENX

I **LATI APERTI** sulla sedia garantiscono che le regolazioni siano facilmente realizzabili e consentono all'utente di rimanere seduto senza spostamenti.

L'eccezionale sistema di **CONTROLLO PELVICO** è garantito dalla seduta sagomata con imbottitura in memory foam. Regolabili in maniera indipendente, i supporti pelvici e la cintura a 4 punti consentono il massimo controllo del bacino, I **SUPPORTI PELVICI** con sistema di apertura swing away, sono creati con un'imbottitura super soft PU, molto flessibile, facile da pulire e repellente ai fluidi, che li rende igienici e robusti

Le **DIVERSE BASI** disponibili consentono la massima personalizzazione per ogni bambino. E' possibile scegliere fra basi fisse o regolabili in modo che il bambino possa godere sia delle attività a livello del tavolo che a livello del pavimento.

INNOVATIVE
FEATURE

INNOVATIVE
FEATURE

INNOVATIVE
FEATURE



Junior+ by JENX

Qualsiasi posizione adottata dal bambino ha un effetto sul suo sviluppo fisico e funzionale, ora e in futuro

Minimizza la fatica e aiuta
l'attività e la funzionalità



Aiuta la digestione,
l'intestino e lo svuotamento
della vescica



Incoraggia lo sviluppo
muscolare e delle ossa



Una base di seduta
stabile supporta,
sviluppa e favorisce
maggiore
indipendenza e
interazione con amici
e familiari... e più
sorrisi per tutti!



Un adeguato supporto
facilita i bambini a svolgere
le attività quotidiane



La seduta corretta aiuta a
respirare meglio



I supporti pelvici, delle cosce
e dei piedi costituiscono il
fondamento della stabilità



Fornisce opportunità per
incrementare le abilità
sociali

Junior+ by JENX

JUNIOR+ è un prodotto modulare personalizzabile con un'ampia gamma di accessori che lo rendono più confortevole e adatto alle esigenze di ogni bambino.

CONFIGURAZIONE BASE PROPOSTA:

PREZZO DI LISTINO => 2.973,00 EURO

- UNITA' DI SEDUTA completa di:
 - Imbottiture della seduta e dello schienale anatomica in memory foam con fodera antimicrobo
 - Schienale regolabile in altezza e inclinazione
 - Maniglia di spinta
 - Braccioli regolabili in larghezza e inclinazione
 - Basculamento dell'unità di seduta
 - Seduta regolabile in larghezza e profondità
- BASE HI-LOW con 4 ruote piroettanti bloccabili
- CINTURA PELVICA A 4 PUNTI
- SUPPORTI PELVICI regolabili con apertura swing-away
- TAVOLINO
- PEDANA regolabile in altezza e flessoestensione



N.B. L'illustrazione NON corrisponde alla configurazione di base

Accessori => SUPPORTI PER IL CAPO, PER IL TRONCO e PER LE SPALLE


- **POGGIATESTA ANATOMICO** => Un poggiatesta che offre un contenimento adatto ai bambini che hanno un bisogno minimo di supporto per il capo.



- **POGGIATESTA AVVOLGENTE MULTIGRIP** => L'originale e innovativo poggiatesta Jenx Multigrip TM è disponibile in tre differenti misure e ha staffe di aggancio altamente flessibile, regolabili in altezza, profondità e angolazione.



- **PELOTTETORACALI FLESSIBILI** => Un poggiatesta che offre un contenimento adatto ai bambini che hanno un bisogno minimo di supporto per il capo.

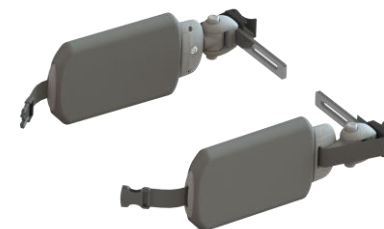

- **POGGIATESTA ANATOMICO** => Un poggiatesta che offre un contenimento adatto ai bambini che hanno un bisogno minimo di supporto per il capo.



- **PROTRATTORI PER LE SPALLE** => Prevengono un'eccessiva retrazione delle spalle e favoriscono la posizione contrale della mani. Regolabili in modo indipendente in larghezza e angolazione. Completamente a scomparsa quando non necessari.



Accessori => SEDUTA

- **CONTENIMENTO LATERALE DELLE GAMBE** => consente di controllare il posizionamento delle gambe indipendentemente dal posizionamento pelvico, creando abduzione o adduzione. La completa apertura laterale dei contenimenti facilita inoltre i trasferimenti.



- **PROLUNGA SEDUTA** => Facilmente installabile con 2 manopole. Può essere utilizzata in modo permanente o al bisogno per l'allungamento del tendine del ginocchio. I blocchi di supporto sono regolabili



- **CUNEO DI ABDUZIONE** => disponibile in 2 misure. Ideale per separare le ginocchia e prevenire l'abduzione.



- **IMBOTTITURE DI RIDUZIONE PER SUPPORTI PELVICI** => Progettato per adattarsi senza fatica tra l'imbottitura dell'anca e la fodera dei supporti pelvici, riducendo di 50 mm la larghezza della seduta.




- **PETTORINA** => Fornisce ulteriore stabilità a tronco e spalle. L'innovativa apertura con zip facilita il posizionamento del bambino.



Accessori => PERTAVOLINO


- **RIDUZIONE PER TAVOLINO** => Studiato per ridurre le aperture sul tavolino per i bambini più piccoli

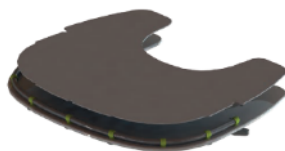

- **MEZZA IMBOTTITURA PER TAVOLINO** => Adatto per fornire una morbida superficie di appoggio per i gomiti.




- **IMBOTTITURA COMPLETA PER TAVOLINO** => Copre l'intera superficie del tavolo. Ideale per i pazienti che tendenzialmente si feriscono alle braccia

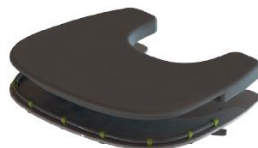


- **BARRA DI PRESA** => Perfetta per i bambini che necessitano un punto in cui aggrapparsi per incrementare le funzionalità



- **TELAIO PER ATTIVITA'** => Utile per incoraggiare la coordinazione di mani e occhi ed il controllo della testa. Facile da attaccare al tavolino e regolare. Dotato di due clips che consentono di appendere giochi.

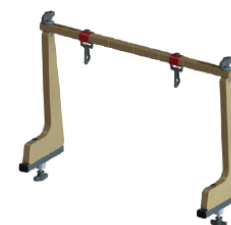

- **BLOCCA GOMITI PER TAVOLINO** => Aiutano le braccia a restare in appoggio sul tavolino e a bloccare un'eccessiva retrazione

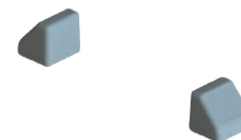


Accessori => SUPPORTI PER I PIEDI

- **SANDALI** => Disponibili in 2 misure, Ideali per posizionare e bloccare i piedi sulla pedana.
- **SUPPORTI PER CAVIGLIE** => Accessorio per sandali che garantisce maggior supporto. Chiudibile con una mano tramite una speciale chiusura a magnete.
- **STIVALETTI** => Offrono un supporto delicato e confortevole per i piedi piccoli o senza scarpe. Morbidi e imbottiti.
- **RIALZI PER SANDALETTI** => Disponibili per ogni misura di sandali, consentono di avere un rialzo extra. Utili per compensare la differenza della lunghezza della gamba o per aumentare l'altezza della pedana.



- **IMBOTTITURA PER PEDANA** => Per rendere più soffice la superficie di appoggio della pedana per coloro che non necessitano di particolare sostegno

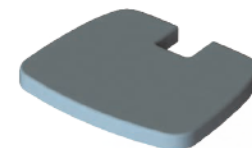

Colori disponibili:



Junior+ by JENX

N.B. Alcune misure minime e massime si possono ottenere solo tramite l'utilizzo di accessori	Misure	U.M.	Junior + mis. 1	Junior + mis. 2	Junior + mis. 3
Età di utilizzo	approx.	mesi-anni	18 mesi - 5 anni	3-8 anni	5-12 anni
Peso utente	max	Kg	50	50	50
Angolazione schienale	Reclinato - prono	Gradi	15° - 15°	15° - 15°	15° - 15°
Altezza schienale (da piano seduta alla parte superiore schienale)	min-max	mm	310 - 410	330 - 430	390 - 520
Larghezza del torace	min-max	mm	185 - 280	185 - 280	210 - 300
Larghezza tra i fianchi (da centro a centro)	min-max	mm	150 - 375	150 - 375	150 - 375
Profondità seduta	min-max	mm	210 - 305	240 - 320	275 - 390
Lunghezza della gamba inferiore (con pedana con flessoestensione)	min-max	mm	195 - 270	250 - 365	250 - 405
Angolazione del basculamento	Dorso-pianta	gradi	30° - 10°	30° - 10°	30° - 10°
Angolo reclinazione pedana	Posteriore - anteriore	gradi	5° - 35°	5° - 35°	5° - 35°
Dimensione della base	Largh.x Lungh.	mm	650 - 780	650 - 780	650 - 780
Altezza seduta da terra con base	min-max	mm	290 - 760	330 - 760	365 - 760

Junior+ by JENX

Per maggiori informazioni contattaci:

medimec[®]

MEDIMEC INTERNATIONAL SRL

Via Proventa n. 52 – 4808 Faenza (RA)

Tel. 0546/46870 Fax 0546/46467

medimec@medimec.it

www.medimec.it

