

# COMMANDER

Thomashilfen



NEW



ECE Group II - III

15 - 36 kg

33.1 - 79.4 lb

Lo specialista - Il seggiolino auto altamente adattabile per bambini con bisogni speciali

# COMMANDER SEGGIOLINO PERSONALIZZABILE by Thomashilfen



Particolarmente indicato per:



- Paralisi cerebrale (CP)
- Trauma cranico-cerebrale fino al II grado
- Spina bifida
- Sindrome di Rett
- Autismo
- Atrofia muscolare spinale (SMA)

- Sempre consigliato per bambini con scarso controllo della parte superiore del corpo

# COMMANDER SEGGIOLINO PERSONALIZZABILE by Thomashilfen

«Il seggiolino auto COMMANDER è in grado di affrontare ogni sfida. Essendo un seggiolino auto con caratteristiche speciali di posizionamento, è ideale per coloro che necessitano di soluzioni altamente personalizzabili. I bambini sono supportati in ogni punto in cui hanno bisogno di sostegno e protezione. Adatto ai bambini con scarso controllo della parte superiore del corpo. I supporti laterali del tronco fissi, offrono un sostegno extra. Tali supporti hanno dimostrato di essere fondamentali anche nei molti anni in cui sono stati utilizzati nei passeggini riabilitativi. Una vasta selezione di accessori ed una facile gestione, rendono il seggiolino perfetto per ogni regolazione.»

La morbida **imbottitura** offre un piacevole comfort senza fastidiosi sudori. La **fodera** traspirante può essere completamente rimossa e lavata a 40°

Il **portabicchieri** di grandi dimensioni può essere posizionato a destra o sinistra e può contenere bevande, snack e piccoli giochi.

Con la regolazione dell'**inclinazione** del sedile di 3° è facile impostare la posizione nanna

Il **poggiatesta** regolabile in altezza in 9 posizioni, cresce passo dopo passo con il bambino

**Imbottiture aggiuntive** si possono inserire sui lati destro e sinistro del poggiatesta per renderlo ancora più confortevole


Il **bretellaggio** cresce con il bambino senza la necessità di rimodellare le cinture

Ampia e robusta **piastra posteriore** con chiusure a strappo per il fissaggio dei supporti superiori – per un'ottimale regolazione individuale.

La **cintura a 5 punti** con regolazione centrale offre una rapida regolazione della lunghezza della cintura. La pratica clip sul torace evita torsioni delle cinture.

# COMMANDER SEGGIOLINO PERSONALIZZABILE by Thomashilfen

## EQUIPAGGIAMENTO REHAB

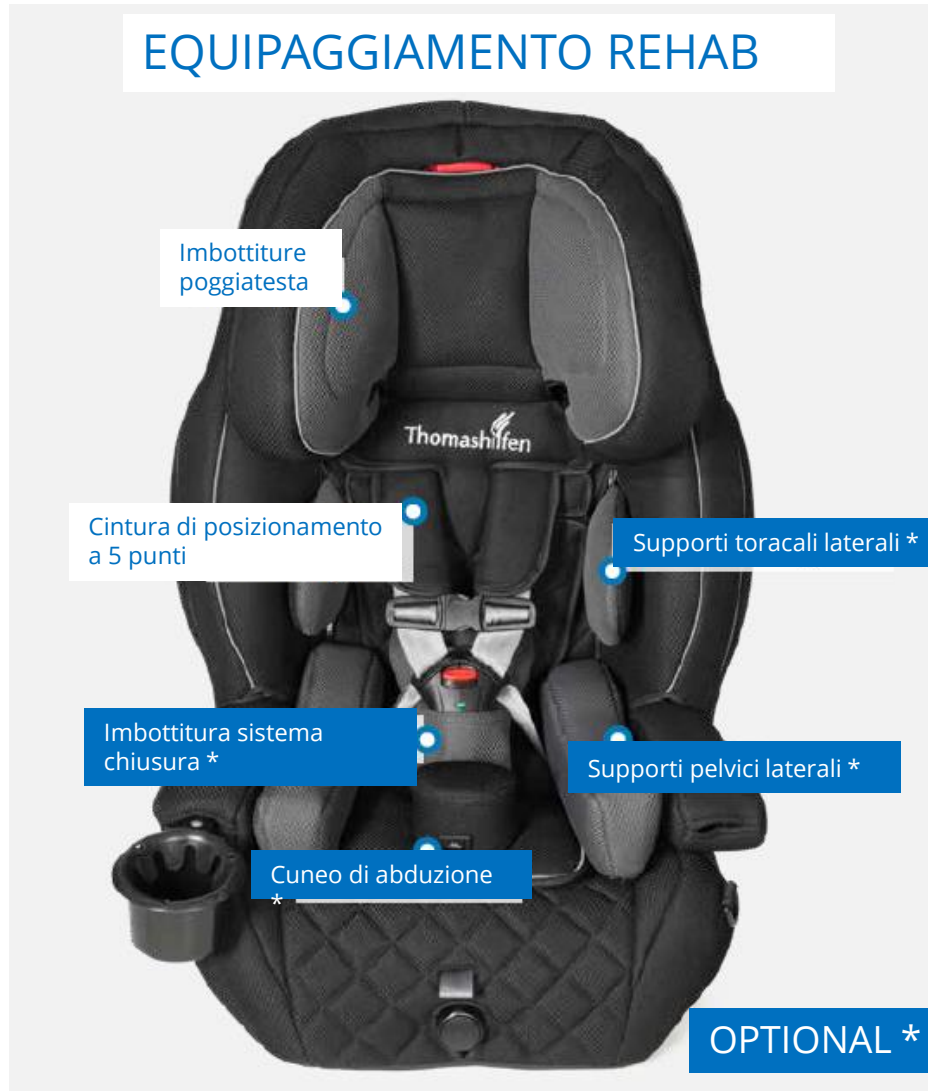



# COMMANDER SEGGIOLINO PERSONALIZZABILE by Thomashilfen

## SUPPORTI LATERALI DEL TRONCO IN DUE VERSIONI

Supporti laterali del tronco in **MORBIDA SCHIUMA** da fissare direttamente sulla fodera con un sistema di aggancio a strappo



Supporti laterali del tronco con **INTERNO RIGIDO IN METALLO** da fissare sulla piastra posteriore con un sistema di aggancio a strappo



# COMMANDER SEGGIOLINO PERSONALIZZABILE by Thomashilfen

## COMBINAZIONE UNICA E MODULABILE CON L' ADATTATORE



La **PIASTRA ADATTATORE** è sempre necessaria per utilizzare i seguenti accessori: **BASE GIREVOLE, BASE PER LA RECLINAZIONE, PEDANA POGGIPIEDI, BARRA STABILIZZATRICE, AGGANCIO ISOFIX, STAND, PROLUNGA SEDUTA, CUNEO ABDUZIONE.**



**BASE GIREVOLE:** facilita i trasferimenti. La leva di sgancio può essere montata sia sul lato destro che sul sinistro



**BASE PER LA RECLINAZIONE:** consente la reclinazione in 3 step (5,5°, 11°, 16°) per ottenere una rilassante posizione nanna.



**POGGIPIEDI CON CUSCINO IMBOTTITO:** garantisce un posizionamento stabile della seduta ed il bambino può supportarsi con i piedi e non scivolare dal seggiolino



**STAND, BARRA STABILIZZATRICE, AGGANCIO ISOFIX:** garantiscono maggiore stabilità del seggiolino nell'auto



**PROLUNGA PROFONDITA' DELLA SEDUTA:** consente al seggiolino di crescere con il bambino e garantisce il corretto posizionamento delle cosce.



**CUNEO ABDUZIONE:** regolabile, assicura una posizione di seduta stabile e impedisce al bambino di incrociare le gambe

# COMMANDER SEGGIOLINO PERSONALIZZABILE by Thomashilfen

## COMBINAZIONE UNICA E MODULABILE CON L' ADATTATORE

La combinazione modulare e unica di **BASE GIREVOLE** + **BASE RECLINABILE** consente la migliore maneggevolezza e il massimo comfort.

Per una gestione più facile, la leva di sgancio (chiusura a scatto) sulla **BASE GIREVOLE** è facile da raggiungere e può essere montata sia sul lato anteriore destro o sinistro della base girevole.



# COMMANDER SEGGIOLINO PERSONALIZZABILE by Thomashilfen

## ULTERIORI ACCESSORI



I **SUPPORTI BACINO** aiutano a mantenere stabile la posizione durante la seduta



**TAVOLINO:** promuove il raddrizzamento e la stabile postura del bambino, fornisce al bambino supporto e sicurezza a 360°



**IMBOTTITURA LARGA PANCIA:** protegge la pancia sensibile del bambino. Il **CUSCINO A CUNEO (INFERIORE)** consente una reclinazione di 10° della seduta



**GIUBBOTTINO ANTIFUGA:** impedisce al bambino di sganciarsi dalla cintura



**CUNEO INTERNO:** sostiene una posizione pelvica eretta. I **SUPPORTI LATERALI PER IL TRONCO IN METALLO** per un ottimo supporto del tronco.



**TAPPETO DI PROTEZIONE SEDILE AUTO CON SCHIENALE:** protegge il rivestimento del sedile e offre 3 pratici scomparti per i giocattoli nella parte anteriore.





## Configurazione base:

- Seduta e schienale con poggiatesta regolabile in 9 posizioni
- piastra posteriore con chiusure a strappo
- Imbottitura seduta, schienale, testa, inguine
- Cintura regolabile a 5 punti con clip di sicurezza sul petto e imbottitura di protezione delle spalle
- Porta bicchieri (installabile a destra o sinistra)
- Fodere removibili e lavabili in lavatrice fino a 40°

# COMMANDER SEGGIOLINO PERSONALIZZABILE by Thomashilfen

Caratteristiche tecniche	
profondità seduta	34 cm
larghezza seduta (con supporti)	anteriore 33,5 cm posteriore 28,5 cm
altezza schienale	55 - 75 cm
altezza spalle (guide della cintura)	25 - 44 cm
Reclinazione schienale (con piastra reclinazione)	3° 5,5°/11°/16°
Lunghezza da cavo popliteo con adattatore	23 - 40 cm
Lunghezza da cavo popliteo con piano rotante e reclinazione	28 - 45 cm
Dimensioni totali (L x H x P)	55 x 65 x 45 cm
Peso	8,5 kg circa
Portata	15 - 36 kg