

Q50R

LA CARROZZINA
ELETTRONICA PIEGHEVOLE
CON **BATTERIA AL LITIO**



Studiata per soddisfare le vostre esigenze
di trasportare la carrozzina in modo pratico e sereno.



LA NOSTRA CARROZZINA ELETTRONICA PIU' TRASPORTABILE

Se avete bisogno di una carrozzina elettronica che abbia il telaio compatto e che possa essere facilmente trasportata in auto, treno o aereo, Q50R è la scelta perfetta.

Semplice da trasportare e facile da piegare, è la compagna di viaggio ideale.



Disponibile con telaio nero e kit di 3 colori per personalizzare i dettagli in base ai propri gusti.



Q50R ha ruote piene da 8" e da 12" con parafanghi, sospensioni a doppio ammortizzatore, braccioli pieghevoli e dotati di sistema di blocco, schienale rimovibile e regolabile in altezza con telo imbottito a tensione regolabile, cuscino, maniglione di spinta imbottito, tasca con cerniera.

Per portarla sempre con voi senza rinunciare a nulla.




FACILE SISTEMA DI CHIUSURA E DI TRASPORTO

Si piega in pochi secondi, come un passeggino per bambini. Semplicemente premendo una leva, senza sforzo, senza attrezzi e senza rimuovere la batteria. Potete portarla dove volete. Grazie alle sue misure compatte da piegata, può essere riposta nel bagagliaio di ogni auto.



Video del sistema di chiusura

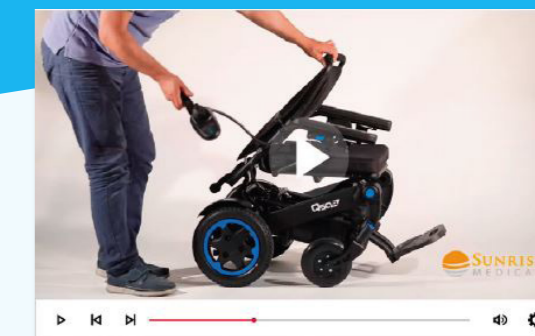

Grazie alle piccole dimensioni ed al peso ridotto, Q50 è facile da caricare nel bagagliaio dell'auto. Rampe e furgone non sono necessari.

ELETTRONICA VSI ORIGINALE E BATTERIA AL LITIO AD ELEVATE PRESTAZIONI

Q50R utilizza l'elettronica originale VSI by Curtiss-Wright, un marchio attivo da anni nel campo degli ausili per la mobilità e ben conosciuto per l'elevata qualità. Il joystick ha la centralina integrata ed è montato su una staffa swing away, la batteria al litio da 30 Ah non richiede manutenzione e assicura un'autonomia fino a 27 km.

Preparatevi a godervi il viaggio.



- 👍 EN12184:2014 approvato da SGS
- 👍 Certificazione CE in base ai requisiti del Regolamento Europeo per i Dispositivi Medici MDR 2017/745
- 👍 Certificati emessi da CNAS (ente di certificazione ufficiale)
- 👍 Batterie con certificazione IEC62133-2-2017 (certificato di sicurezza elettrica per le batterie al litio)
- 👍 Caricabatteria con omologazione ISO 7176-25 e livello di protezione IPX4
- 👍 Materiale della scatola della batteria UL94V0 (materiale ignifugo)
- 👍 EMC - Compatibilità elettromagnetica
- 👍 Tessuti ignifughi - EN1021-I&2014



EFFICIENTI MOTORI BRUSHLESS

Q50R è equipaggiata con motori brushless da 200 watt: sono molto più efficienti dei motori a spazzole e non richiedono manutenzione. In più, la posizione in linea con l'asse delle ruote ne migliora l'efficienza. Inoltre grazie alla modalità "ruote libere", la carrozzina potrà essere spinta a mano con grande facilità.

QUALITA' E SICUREZZA GARANTITE

Per garantire la vostra sicurezza, Q50R è equipaggiata standard con forcelle e pedana unica in alluminio e con cintura pelvica e ruotine antiribaltamento. Anche questo contribuisce ad aumentarne la qualità. Offriamo un prodotto conforme a tutte le normative e linee guida applicabili. **E siamo così sicuri della qualità di Q50R che sul telaio vi offriamo 5 anni di garanzia.**

DATI TECNICI

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Portata massima | 136 kg | Velocità massima | 6 km/h |
| Larghezza da chiusa | 600 mm | Batterie | 1 batteria da 30 Ah al litio (autonomia fino a 27 km) |
| Lunghezza da chiusa | 830 mm | Elettronica | VSI (originale by Curtiss-Wright) |
| Altezza da chiusa | 400 mm | Caricabatteria | 24 V, 5 Amp |
| Larghezza della base | 600 mm | Motori | 200 watt, brushless |
| Lunghezza totale | 1020 mm (865 mm con pedana chiusa) | Pendenza massima superabile | 8° |
| Altezza totale | da 950 mm a 1050 mm | Superamento massimo ostacoli | 50 mm |
| Altezza dello schienale | da 490 mm a 590 mm | Ruote | Motrici: 12" Piene - Anteriori direzionali e piroettanti: 8" piene |
| Altezza della seduta | 485 mm (senza cuscino) | Colori dettagli | Kit di 3 colori: rosso, verde e blu (standard) |
| Larghezza della seduta | 430 mm (larghezza cuscino) | Peso della carrozzina | 37,5 kg (carrozzina completa) |
| Profondità della seduta | 440 mm (profondità cuscino) | Peso delle batterie | 5,5 kg |
| Altezza dei braccioli | 270 mm (dalla base della seduta) | Peso minimo della carrozzina smontata | 29,5 kg (senza batteria, cuscino e schienale) |



Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it

Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d'ordine presente sul nostro sito web. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical.

Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it

