

# Grizzly



# medimec®

Il passeggino per bambini con bisogni speciali **GRIZZLY** è pensato per i bambini che non sono in grado di camminare o sedersi in una posizione corretta a causa di infortuni, malattie o disfunzioni motorie.

Grizzly è dotato del sistema "I GROW WITH YOU" che permette di regolare l'altezza dello schienale e la profondità della seduta man mano che il bambino cresce. Grizzly ti offre inoltre un sistema di stabilizzazione completo per la seduta composto da supporti regolabili per il capo, il tronco ed i fianchi. La pedana poggipiedi è regolabile, il sedile basculante e lo schienale reclinabile.

Con Grizzly avrai un passeggino su misura per soddisfare le esigenze del tuo bambino al 100% e durerà per anni.

Grizzly è sottoposto a crash test e garantisce sicurezza durante il trasporto di bambini in veicoli appositamente adattati



Pratico e leggero adatto a bambini con H 85-140 cm e con peso fino ai 45 kg

# Grizzly



# medimec®

## Indicazioni

- Paralisi e paresi degli arti inferiori di varia origine
- Paralisi e paresi del tronco
- Indebolimento dei muscoli posturali preposti al mantenimento della corretta posizione del corpo
- Paralisi cerebrale
- Mielomeningocele
- Distrofie muscolari



Grizzly



medimec®

COLORI DISPONIBILI



# Grizzly



# medimec®

Caratteristiche → sicurezza e comfort

## BASCULAMENTO DELLA SEDUTA

- 4 posizioni
- Angolazione 0° - 30°



# Grizzly



# medimec®

Caratteristiche => sicurezza e comfort

## RECLINAZIONE DELLO SCHIENALE

- 6 posizioni
- Da 0° a 81°



Grizzly



medimec®

Caratteristiche => sicurezza e comfort



## REGOLAZIONE DELLA PEDANA

- 5 posizioni
- 55° - 180°

# Grizzly



# medimec®

Caratteristiche => sicurezza e comfort

## Sistema "IO CRESCO CON TE" :

- Permette di allungare lo schienale fino all'altezza massima di 70 cm;
- Permette di estendere la profondità della seduta fino alla profondità massima di 37 cm.

Regolazioni rapide e semplici senza l'utilizzo di attrezzi - progettate per adattarsi ed evolversi!



# Grizzly



# medimec®

Caratteristiche => sicurezza e comfort

## SISTEMA DI STABILIZZAZIONE:

Un sistema di stabilizzazione completo composto da 4 supporti indipendenti (testa, tronco, bacino e lato) garantisce la massima possibilità di regolazione, di confort e sicurezza durante il viaggio.



# Grizzly



# medimec®

## POSIZIONE NANNA

Con un sedile e un poggiatesta completamente regolabili puoi trasformare rapidamente il passeggino in un comodo lettino, perfetto per un breve riposo o un pisolino.



# Grizzly



# medimec®

## SUPPORTO ALLA GUIDA E SEDUTA REVERSIBILE FRONTE MAMMA

Il passeggino è dotato di sospensione ammortizzante su tutte e quattro le ruote e di sospensioni posteriori regolabili nelle ruote posteriori.

Le ruote anteriori sono piroettanti con possibilità di blocco.

GRIZZLY è inoltre dotato di freno centralizzato e levetta per facilitare l'alzata sul gradino.

Il design del passeggino consente di ruotare facilmente il sedile e posizionarlo «fronte mamma».

Grazie a questa funzione è possibile tenere il bambino sempre sotto controllo.



# Grizzly



# medimec

Grazie agli elementi smontabili e richiudibili (telaio, seduta e ruote) GRIZZLY è molto facile da riporre



# Grizzly



# medimec®




Canopy with window



Safety barrier

hips / side / torso / head pads

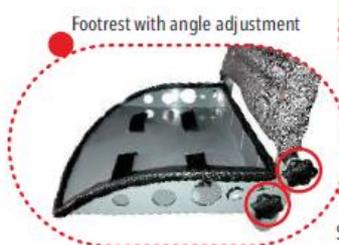

Footrest with angle adjustment



Swivel front castor wheels  
with option to lock



Quick release mount on all 4 wheels



- Cappottina con finestra
- Supporti testa e tronco
- Kit riduzione seduta
- Barra di sicurezza
- Pedana regolabile
- Ruote piroettanti con possibilità di blocco
- Facile estrazione delle ruote

# Grizzly



# medimec®

Lunghezza totale aperto / chiuso	97 - 115 cm / telaio 80 cm – seduta 72 cm
Larghezza totale aperto / chiuso	65 cm / telaio 64 cm – seduta 43 cm
Altezza totale aperto / chiuso	108 - 123 cm / telaio 35 cm – seduta 47 cm
Peso totale (min-max)	20 – 28 kg
Peso massimo utente	45 kg
Profondità seduta	25 – 37 cm
Larghezza seduta	18* - 40 cm
Altezza schienale	57 - 70 cm
Larghezza schienale	18* - 34 cm
Distanza tra pedana poggiapiedi e seduta - numero delle regolazioni	23-40,5 cm – 7 posizioni
Altezza min/max utente	85 – 140 cm

\* valori che si ottengono con il kit di riduzione della seduta o con le imbottiture

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso.

Tolleranza dei valori di misura indicati +/- 20 mm, +/- 1,5 kg