

SERIE Q700[®]

The Ultimate Experience



Q Series
Powerchairs

Ingegneria d'avanguardia. Personalizzata per voi.



Q700
SEDEO PRO



Q700
SEDEO PRO ADVANCED



Q700 UP
SEDEO PRO ADVANCED UP



INGEGNERIA D'AVANGUARDIA PERSONALIZZATA PER VOI.

QUICKIE®, SEDEO® JAY®, WHITMYER® e SWITCH-IT® vi offrono la gamma più completa di carrozzine elettroniche di alta qualità, innovative e tecnicamente avanzate, ciascuna creata esattamente per voi, qualunque siano le vostre necessità cliniche e di vita.

THE POWER OF QUICKIE®

NUOVE QUICKIE Q

LE NUOVE

CARROZZINE ELETTRONICHE QUICKIE® DELLA LINEA Q

Dalla mobilità di base alle problematiche più complesse. Un'ampia gamma di basi, tipi di trazione, sedute, elettronica, comandi ed accessori che possono essere combinati per creare la carrozzina perfetta per qualunque necessità.

ESIGENZE CLINICHE



Q50

SEDUTA
TELO SEDUTA

BASE
RWD



Q100

SEDUTA
TELO SEDUTA

BASE
RWD



Q200

SEDUTA
TELO SEDUTA

BASE
RWD



Q300

SEDUTA
SEDEO LITE
KIDS
TEENS

BASE
MWD



Q400

SEDUTA
SEDEO LITE

BASE
MWD
FWD
RWD



Q500

SEDUTA
SEDEO PRO

BASE
MWD
FWD
RWD
HWD



Q700

SEDUTA
SEDEO PRO
SEDEO PRO ADV.
SEDEO PRO per HD

BASE
MWD
FWD
RWD



Q700-UP

SEDUTA
SEDEO PRO ADV. UP

BASE
MWD
FWD

□ RWD: Trazione posteriore □ MWD: Trazione centrale □ FWD: Trazione anteriore □ HWD: Trazione ibrida

PERFORMANCE DELLE BASI

TUTTA LA GAMMA

SERIE Q700

Tre eccezionali sistemi di seduta (SEDEO PRO, SEDEO PRO ADVANCED e SEDEO PRO ADVANCED UP) in grado di rispondere ad ogni esigenza posturale con la possibilità di scegliere fra tre differenti basi di trazione (posteriore, centrale ed anteriore) per adattarsi alle esigenze e allo stile di vita di ogni utente. Un'ampia gamma di comandi avanzati (R-Net e SWITCH-IT) e Q700 M HD con una maggiore portata massima completano l'offerta.



TRAZIONE POSTERIORE



TRAZIONE CENTRALE





TRAZIONE ANTERIORE



Q700 CON
SEDEO PRO

Q700 CON
**SEDEO PRO
ADVANCED**

Q700 CON
**SEDEO PRO
ADVANCED UP**

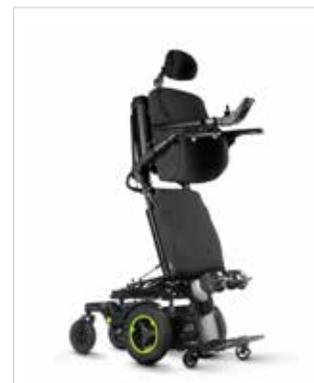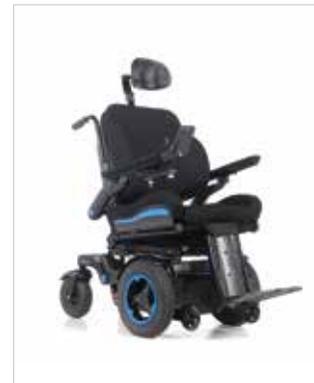

CARROZZINE ELETTRONICHE HIGH PERFORMANCE

Questa guida è stata pensata per darvi una visione d'insieme delle opzioni e delle caratteristiche che la nuova Serie QUICKIE Q700 è in grado di offrirvi. Passate in un attimo da una base di trazione all'altra così da scoprire il potenziale della vostra carrozzina individuando il tipo di seduta più adatto alle vostre esigenze cliniche.

Funzione C-Me

Guarderete tutto con i vostri occhi: con C-Me, l'altezza della seduta può essere regolata fino a 300 mm e potrete comunque andare a una velocità di 4,8 km/h.



BASI DI TRAZIONE

Q700 M: centrale

Q700 R: posteriore

Q700 F: anteriore

SISTEMI DI SEDUTA

SEDEO PRO ADVANCED UP

SEDEO PRO ADVANCED

SEDEO PRO

SEDEO PRO per HD

COMANDI E CONNETTIVITA'

App REMOTE SEATING

Comandi R-NET

Comandi SWITCH-IT

Sistema di montaggio LINK-IT

STILE RAFFINATO

DESIGN ELEGANTE e ampia scelta di colori

BASI DI TRAZIONE

SCEGLIETE LA BASE ADATTA A VOI

TRAZIONE ANTERIORE, POSTERIORE O CENTRALE

	Q700 R	Q700 M	Q700 F
Tipo di trazione	Posteriore	Centrale	Anteriore
Raggio di curva	950 mm	560-630 mm	735 mm
Ruote motrici	14"	14"	14"
Ruote piroettanti e direzionali	9" e 10"	6"	9"
Velocità massima	10 Km/h standard - 12,5 Km/h opzionale		
Batterie	80 Ah (60 Ah opzionale)		
Raggio di sterzata	1285 mm	1100 mm	1240 mm
Pendenza massima superabile	6°	6°	6°
Superamento massimo ostacoli	100 mm con salicordoli 80 mm senza salicordoli	100 mm 75 mm Q700 M HD 80 mm Q700-UP M	70 mm
Autonomia (ISO 7176-4)	40 km	40 km 25 km Q700 M HD	40 km
Larghezza totale	640 mm	622-660 mm	640 mm
Lunghezza totale max	1180 mm - 1370 mm	1190 mm - 1100 mm	1340 mm

La scelta della base influisce sulle prestazioni della carrozzina nelle diverse situazioni e nei diversi ambienti. QUICKIE Q700 offre la più ampia gamma di basi di trazione in modo tale che ogni utente possa scegliere la soluzione migliore in relazione alle proprie preferenze personali, alla propria esperienza, alle proprie necessità cliniche, allo stile di vita e all'ambiente in cui vive ogni giorno.

Q700 R **A TRAZIONE POSTERIORE**

Il modello a trazione posteriore offre una base stabile con una buona capacità di superamento ostacoli. Facile da guidare, permette un buon controllo con comandi non proporzionali.



Tutti i modelli Q700 offrono superbe prestazioni in esterni combinando potenti motori a 4 poli, ruote larghe per superare facilmente gli ostacoli, velocità fino a 12,5 Km/h, batterie fino a 80 Ah e sospensioni su tutte le ruote per un grande comfort e per una trazione ottimale.

Q700 M **A TRAZIONE CENTRALE**

Il modello a trazione centrale offre una manovrabilità impareggiabile ed è più compatta dei modelli a trazione posteriore e anteriore; ha un raggio di sterzata molto ridotto ed è estremamente intuitivo da guidare e controllare.



Q700 F **A TRAZIONE ANTERIORE**

Il modello a trazione anteriore offre grandi prestazioni in esterni, una buona manovrabilità in interni ed è estremamente stabile sui terreni in pendenza. Per la guida potrebbe richiedere una esperienza maggiore.




BASI DI TRAZIONE

Q700 M


A TRAZIONE CENTRALE

La Q700 a trazione centrale alza l'asticella dell'innovazione tecnologica per le carrozzine elettroniche. Viaggiate oltre i vostri limiti e sentitevi sicuri di poter sfidare ogni tipologia di terreno.

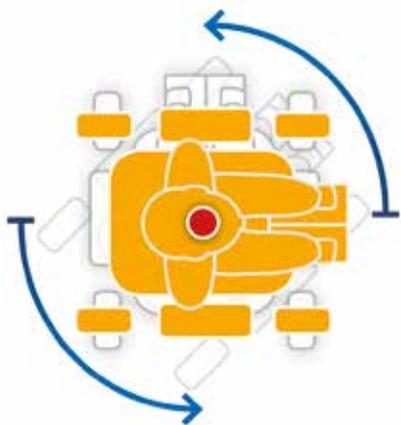

PROGETTATA PER ESSERE MANEGGEVOLE ALL'INTERNO

Girando sul fulcro centrale è semplice da gestire anche in spazi ridotti: la larghezza totale minima è di 622 mm, il raggio di sterzata è 1100 mm. Potrete avvicinarvi facilmente ai tavoli e accedere a vetture attrezzate grazie alla ridotta altezza della seduta da terra di soli 415 mm con SEDEO PRO e 430 mm con SEDEO PRO ADVANCED.

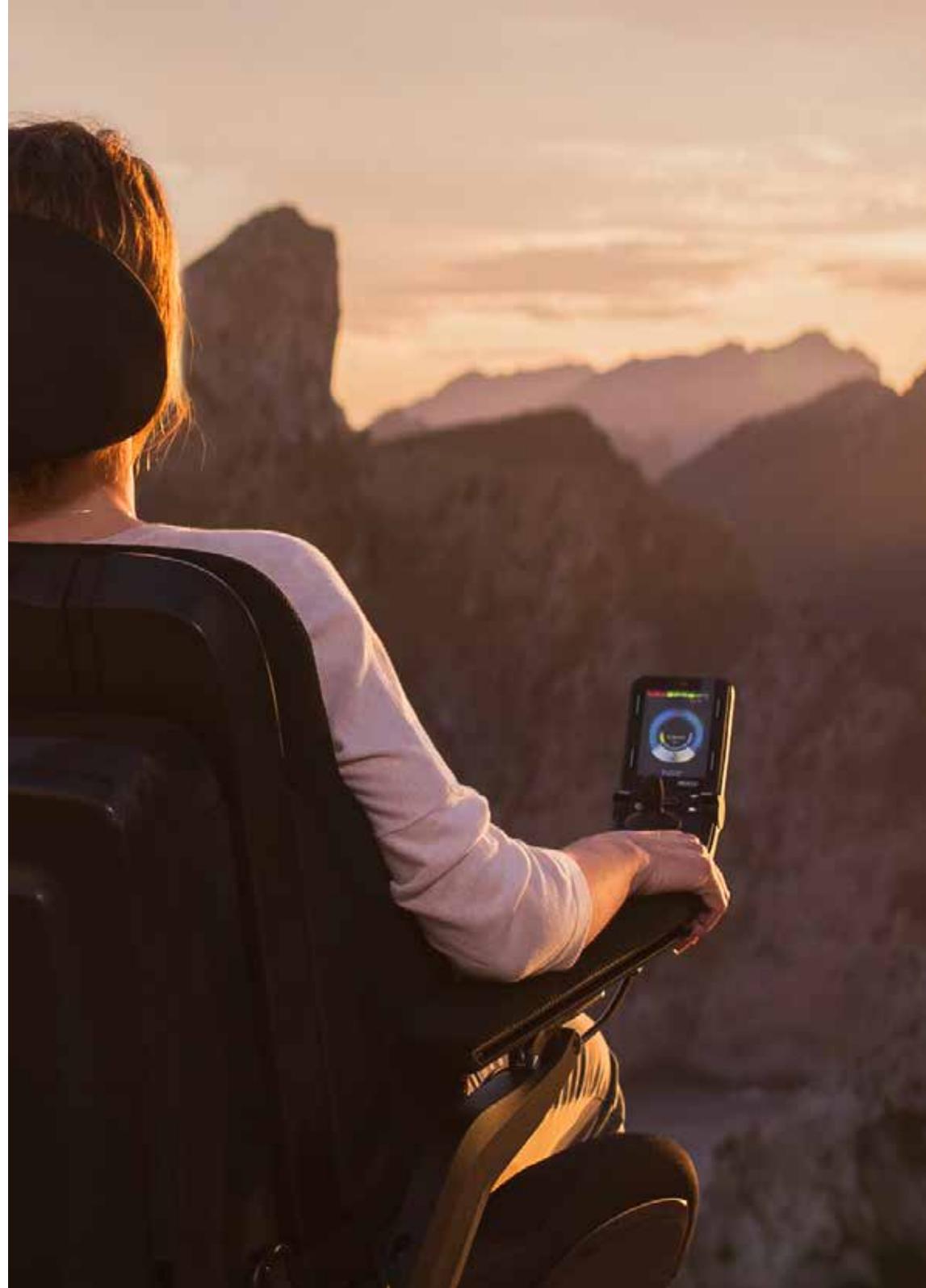

COSTRUITA PER AFFRONTARE QUALUNQUE TERRENO

Sentitevi sicuri anche sui terreni più impegnativi grazie al sistema di sospensioni estremamente affidabile e alla sua azione indipendente su tutte e 6 le ruote. Un'esperienza di guida che non avete mai provato prima.




SOSPENSIONI AFFIDABILI

Sale gradini di 75 mm in maniera incredibilmente fluida ed è ancora più sicura e affidabile grazie alle rivoluzionarie sospensioni. Grazie al movimento indipendente delle 6 ruote la Q700 M supera gradini e pendenze fino a 10° con grande facilità, mantenendo sempre tutte le ruote a contatto con il terreno.



MASSIMA LIBERTA'

Con i suoi motori a 4 poli che garantiscono un'elevata potenza di trazione e alte prestazioni con velocità da 10 o 12,5 km/h e le batterie da 60 Ah o 80 Ah che massimizzano l'autonomia, potrete sempre viaggiare in totale sicurezza e affidabilità.

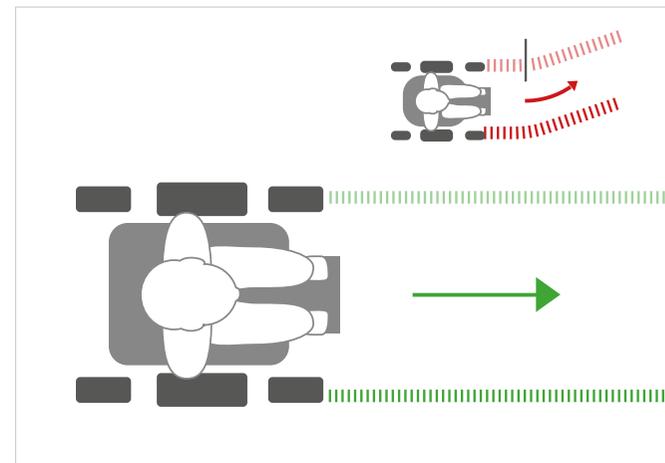

MANTENETE LA TRAIETTORIA CON IL GYRO CONTROL

Il sistema opzionale Gyro Control (standard sulla trazione anteriore) ti assiste durante la guida e corregge automaticamente involontarie deviazioni. Vi mantiene nella traiettoria corretta e riduce la necessità di effettuare continui aggiustamenti con il joystick (particolarmente consigliato in abbinamento a comandi speciali).

BASI DI TRAZIONE

Q700 F A TRAZIONE ANTERIORE

Grazie ai supporti per le forcelle rivolti verso l'interno, Q 700 F è particolarmente reattiva ed assai a proprio agio in spazi interni.

Sia Q700 F sia Q700 R offrono un'altezza da terra (415 mm in SEDEO PRO e 430 mm in SEDEO PRO ADVANCED) che favorisce l'accesso sui mezzi predisposti per il trasporto di carrozzine, sotto i tavoli ed in molte altre situazioni.

Q700 R A TRAZIONE POSTERIORE

Q700 a trazione posteriore è facile da gestire ed intuitiva da guidare grazie alla posizione delle ruote motrici. Può superare ostacoli di 100 mm con il salicordoli ed è dotata di un sistema di sospensioni davvero unico per una guida fluida e confortevole.



PERFORMANCE ECCEZIONALE IN ESTERNI

Il design di Q700 F e Q700 R, insieme alle eccezionali sospensioni su tutte e quattro le ruote, alla tecnologia autolivellante e ai potenti motori, offre un ottimo comfort, una notevole facilità di controllo ed una grande capacità di trazione per impareggiabili prestazioni in esterni.



SOSPENSIONI INDIPENDENTI SU TUTTE LE RUOTE

Comfort ottimale con le sospensioni su tutte le ruote. Con Full Track Suspension System potrete superare tutti gli ostacoli quasi senza accorgervene; il comfort di guida è ottimizzato dalle sospensioni realizzate in elastomero tecnicamente avanzato che consentono alle ruote piroettanti di assorbire tutte le asperità del terreno.




TECNOLOGIA STABILIZZANTE

Massima trazione grazie alla tecnologia stabilizzante davvero unica. Le due ruote di trazione sono collegate da una barra a fare da perno che assorbe la naturale tendenza ad andare da una parte durante l'attraversamento in velocità di pendenze e in curva. In questo modo entrambe le ruote mantengono la massima capacità di trazione in ogni momento.



MASSIMA LIBERTA'

Grazie alle ruote grandi, al motore a 4 poli da 10 o 12,5 Km/h a coppia elevata ed alla possibilità di scegliere le batterie da 60 o 80 Ah per ottimizzare l'autonomia, con Q700 F e Q700 R potrete viaggiare più lontano in totale sicurezza e affidabilità.

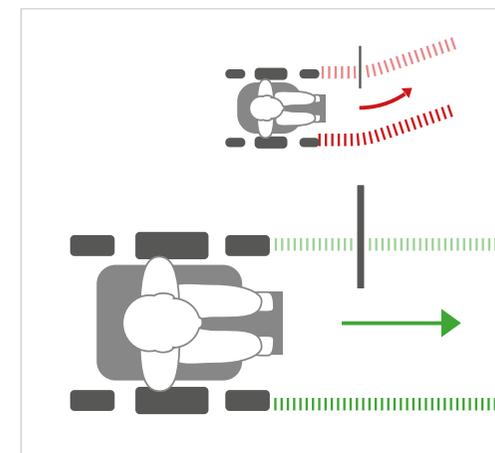

MANTENETE LA TRAIETTORIA CON GYRO CONTROL

Il sistema Gyro Control (standard nella trazione anteriore) vi assiste durante la guida e corregge automaticamente involontarie deviazioni. Vi mantiene sulla traiettoria corretta e riduce la necessità di effettuare continui aggiustamenti con il joystick (particolarmente consigliato in abbinamento a comandi speciali).

SCEGLIETE IL VOSTRO SISTEMA DI SEDUTA:

SEDEO PRO, SEDEO PRO ADVANCED, SEDEO PRO ADVANCED UP.

	SEDEO PRO	SEDEO PRO ADVANCED	SEDEO PRO ADVANCED UP
Funzione C-Me	Sì	Sì	No
Esigenze cliniche utente	Medie	Da medie ad alte	Alte/Verticalizzazione
Larghezza seduta	380-560 mm 500-660 mm Q700 M HD	380-560 mm	380-560 mm
Profondità seduta	400-560 mm 460-560 mm Q700 M HD	400-560 mm	400-540 mm
Altezza schienale	530-720 mm	510-760 mm	510-760 mm
Verticalizzazione	-	-	Sì
Posizione sdraiata	-	Sì	Sì
Posizioni memorizzabili	-	Sì	Sì
Angolo dello schienale	da 90° a 150°	da 85° a 175°	da 85° a 175°
Movimento anti-scivolamento dello schienale	100 mm (opzionale)	180 mm	180 mm
Avvisi per cambiare posizione	-	Sì	Sì
Basculamento della seduta	30°/50°	50°	22°
Elevazione seduta	300 mm NON per Q700 M HD	300 mm	200 mm
Remote Seating app	-	Sì	Sì
Portata massima	160 kg 205 kg Q700 M HD	160 kg	120 kg

SEDEO PRO

Telaio di seduta altamente regolabile e configurabile con una vasta gamma di cuscini comfort e di opzioni di posizionamento. Grazie all'ampia offerta di braccioli, imbottiture per i braccioli, pedane, cuscini e schienali, appoggiatesta ed accessori per il posizionamento, SEDEO PRO offre grande flessibilità per soddisfare le esigenze degli utenti ed è disponibile anche su Q700 M HD per persone con peso fino a 205 kg.



SEDEO PRO ADVANCED

Sistema di seduta intelligente con sistema di Riposizionamento Biometrico, con 6 posizioni di seduta memorizzabili. SEDEO PRO ADVANCED risponde alle esigenze cliniche più complesse con lo schienale anti-scivolamento che trasla di 180 mm, la funzione di riposizionamento biometrico, la seduta e lo schienale regolabili con continuità, il sistema easy entry per i trasferimenti, l'angolo delle ginocchia di 90° in posizione seduta e il promemoria per lo scarico pressorio.

**SEDEO PRO ADVANCED UP**

Tutti i benefici della seduta SEDEO PRO ADVANCED con l'aggiunta della posizione verticalizzata sia con base a trazione centrale che anteriore. SEDEO PRO ADVANCED UP consente di verticalizzare la vostra carrozzina fino a 85° con un modulo per la verticalizzazione estremamente rigido grazie alla tecnologia modulare estremamente avanzata. Inoltre offre un sistema di seduta intelligente con sistema di Riposizionamento Biometrico, programmabile in 6 posizioni di seduta, compresa la funzione di verticalizzazione.



SISTEMI DI SEDUTA

SEDEO PRO

Il sistema di seduta SEDEO PRO combina un telaio altamente regolabile e configurabile con un'ampia scelta di opzioni di supporto e di posizionamento, tra cui una vasta gamma di cuscini e schienali SEDEO PRO per rispondere ad esigenze da moderate a medie.

Il sistema di seduta SEDEO PRO è molto comodo e favorisce l'indipendenza dell'utente nella vita quotidiana.

FACILE E VELOCE DA REGOLARE

SEDEO PRO offre grande flessibilità in quanto è completamente regolabile. Tutte le regolazioni possono essere effettuate in modo molto semplice e veloce utilizzando una sola chiave ed anche con l'utente seduto in carrozzina. SEDEO PRO può essere facilmente personalizzata ed anche velocemente adattata alle esigenze che possono mutare.



Sistema di seduta altamente configurabile



SCHIENALE ANTISCIVOLAMENTO

Venite a scoprire il nuovo schienale anti scivolamento reclinabile elettronicamente con un range di movimento di 100 mm: lo schienale rimane in contatto con la schiena evitando l'attrito con la cute e offrendo così grande comfort all'utente. SEDEO PRO è disponibile inoltre con schienale fisso o reclinabile sia in modo meccanico che con attuatori.

SCHIENALE RECLINABILE ELETTRONICAMENTE

Lo schienale reclinabile elettronicamente aiuta a ridurre il rischio di sviluppare piaghe da decubito, favorisce il riposo, dona sollievo e aumenta il comfort. SEDEO PRO consente di reclinare elettronicamente lo schienale a 40° e 60°.

IMBOTTITURA SCHIENALE FLEXIBLE

Per il sistema di seduta SEDEO PRO è disponibile un'ampia gamma di cuscini e schienali che includono l'imbottitura per lo schienale Flexible con fasce regolabili e supporti laterali per un comfort davvero unico e un facile posizionamento.


PEDANE ELEVABILI ELETTRONICAMENTE

La pedana elevabile elettronicamente e con meccanismo di compensazione della lunghezza vi consente di raggiungere la posizione migliore. E' disponibile montata centralmente e nella versione swing away. Potrete scegliere la pedana centrale, le pedane a 70° swing away o elevabile manualmente.

SISTEMI DI SEDUTA

SEDEO PRO ADVANCED

E' un sistema di seduta di prima classe per soddisfare gli utilizzatori più esigenti! SEDEO PRO ADVANCED con sistema di Riposizionamento Biometrico brevettato è più efficiente di ogni altro sistema di seduta nel gestire i cambi di posizione autonomi durante l'arco della giornata.

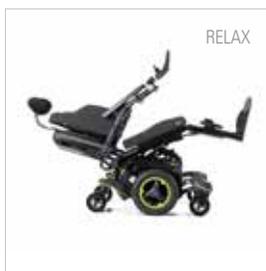

MEMORIZZAZIONE DELLE POSIZIONI

Ottenete il massimo dal sistema di seduta SEDEO PRO ADVANCED con la memorizzazione delle posizioni brevettata. Con SEDEO PRO ADVANCED potete programmare fino a 6* posizioni personalizzabili della seduta e passare da una all'altra semplicemente premendo un pulsante. Sia che desideriate coricarvi, che cucinare o guardare la TV, ogni posizione potrà essere personalizzata per voi.

SEDUTA INTELLIGENTE RICCA DI TECNOLOGIA INNOVATIVA

REGOLABILE PER ADATTARSI A VOI PERFETTAMENTE

Su SEDEO PRO ADVANCED, larghezza e profondità seduta sono regolabili con continuità. Inoltre, le larghezze della seduta e dello schienale possono essere regolate in modo indipendente l'una dall'altra. Anche l'altezza e l'inclinazione dei braccioli sono semplici da regolare e, se necessario, l'appoggiatesta può essere facilmente regolato o rimosso.



RIPOSIZIONAMENTO BIOMETRICO

Ritornando in posizione di guida da una posizione reclinata è necessario passare da una posizione intermedia basculata per evitare di perdere il corretto posizionamento. Con il sistema brevettato di Riposizionamento Biometrico, quando si vuole passare dalla posizione reclinata alla posizione seduta, SEDEO PRO ADVANCED raggiunge una posizione intermedia basculata, utilizzando così la gravità per allineare il bacino con un unico movimento fluido e privo di sforzo.

AMPIO RANGE DI RECLINAZIONE DELLO SCHIENALE

Lo schienale reclinabile aiuta a ridurre il rischio di sviluppare piaghe da decubito, consente di riposarsi, offre sollievo e migliora il comfort. SEDEO PRO ADVANCED offre il più ampio range di reclinazione con 150° e 165° - 175°.

MECCANISMO ANTISCIVOLAMENTO AVANZATO

Il passaggio alla e dalla posizione reclinata non deve necessariamente essere poco confortevole. SEDEO PRO ADVANCED è supportato da un meccanismo antiscivolamento di 180 mm **BREVETTATO** per mantenere in posizione corretta il capo e perfino il comando a mento durante la reclinazione.

JAY SYNCRA E CRYO FLUID

Il nuovo cuscino JAY Syncra, progettato esclusivamente per SEDEO PRO ADVANCED è una soluzione coerente ed elegante ideata in modo specifico per supportare il basculamento e la reclinazione della seduta. Il cuscino Syncra è stato progettato in modo ingegneristico per accogliere i movimenti del bacino durante il movimento di reclinazione mentre lo schienale sagomato incoraggia una postura migliore e insieme alla tecnologia Cryo **BREVETTATA**, JAY Syncra è la soluzione ideale per il posizionamento in carrozzina elettronica di coloro che soffrono di danni da pressione

PROMEMORIA PER LO SCARICO PRESSORIO

Il promemoria **BREVETTATO** per lo scarico pressorio avvisa quando è il momento di cambiare posizione. Il referente clinico può collegarsi tramite una applicazione e monitorare l'attività

NUOVO BRACCIOLO RIBALTABILE MULTI-REGOLABILE

Il nuovo bracciolo ribaltabile multi-regolabile avvolge lo schienale mantenendo così l'intera struttura estremamente compatta e facilitando i trasferimenti.

PEDANA FINO AL SUOLO

Grazie alla possibilità di arrivare sino al suolo con la pedana, i trasferimenti da e per la carrozzina sono facilitati.

SISTEMI DI SEDUTA

SEDEO PRO ADVANCED UP


Vivete la vita da un nuovo punto di vista, venite a scoprire SEDEO PRO ADVANCED UP.

Unite ai benefici del sistema di seduta SEDEO PRO ADVANCED la possibilità di verticalizzarvi quando volete.



MEMORIZZAZIONE DELLE POSIZIONI

Ottenete il massimo dalle opzioni elettroniche di SEDEO PRO ADVANCED UP grazie alla memorizzazione delle posizioni. Potete programmare fino a 6 posizioni personalizzabili della seduta e passare da una all'altra semplicemente premendo un pulsante.

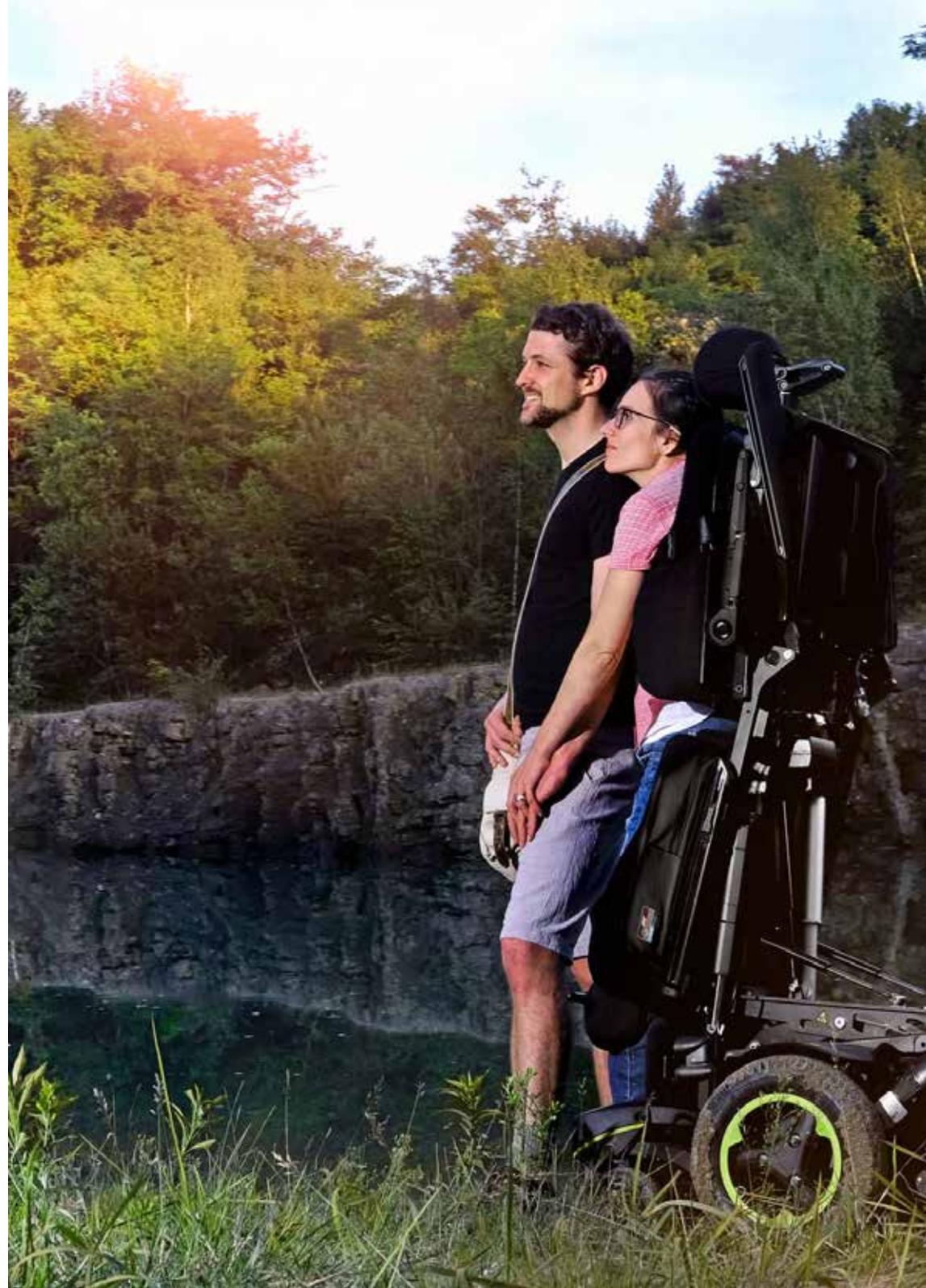

I BENEFICI DELLA VERTICALIZZAZIONE



Con la verticalizzazione fino a 85° così stabile, SEDEO PRO ADVANCED UP consente di alzarvi ogni volta che volete, con numerosi benefici per la vostra salute e per il vostro stile di vita.

I BENEFICI DELLA VERTICALIZZAZIONE

- migliora lo scarico pressorio per coloro che non hanno possibilità di cambiare posizione autonomamente
- migliora la funzionalità e l'autonomia nelle attività della vita quotidiana
- riduce le contrazioni muscolari e tendinee, aumentando la possibilità di cambiare posizione
- favorisce l'attività del metabolismo, la respirazione, la digestione e l'attività della vescica
- promuove il benessere della struttura ossea e riduce l'incidenza di deformità scheletriche
- rilassa il tono muscolare e la spasticità

ANGOLO DELLE GINOCCHIA A 90°

La pedana centrale permette di flettere le ginocchia sino a 90° nella posizione seduta. I supporti anatomici per le ginocchia sono regolabili in profondità.

JAY[®] E WHITMYER[®]

SOLUZIONI PER IL POSIZIONAMENTO

Un'ampia gamma di appoggiatesta WHITMYER e di cuscini e schienali JAY può essere abbinata ai sistemi di seduta SEDEO PRO ADVANCED, SEDEO PRO ADVANCED UP e SEDEO PRO per soddisfare le esigenze posturali ed ottenere il miglior posizionamento possibile.




APPOGGIATESTA WHITMYER

Creati per rispondere a varie esigenze di posizionamento, dalle più semplici alle più complesse, sono disponibili in numerose forme e misure per garantire il supporto ed il comfort adeguati.

CUSCINI E SCHIENALI JAY

Progettati per stabilizzare il bacino, proteggere la cute e assicurare il comfort necessario, i cuscini, gli schienali e gli elementi per il posizionamento JAY richiedono pochissima manutenzione, sono personalizzabili e disponibili in moltissime versioni per soddisfare qualunque esigenza.

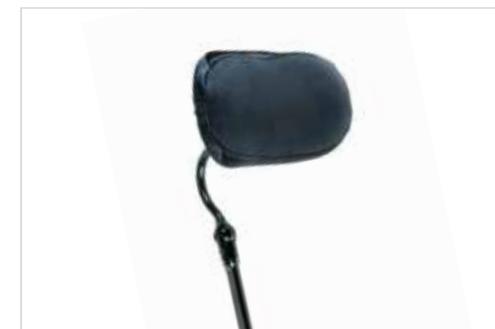

SWITCH-IT[®]


REMOTE SEATING APP




L'app Remote Seating gioca un ruolo molto importante nel controllo della pressione. Con questa app potete monitorare da soli la corretta gestione dello scarico pressorio e condividere i dati con il vostro caregiver. L'app monitora le posizioni fondamentali come basculamento, reclinazione ed elevazione delle pedane, e la durata di queste posizioni.

INFORMAZIONI. QUANDO E DOVE NE AVETE BISOGNO.

La Remote Seating App* della Switch-It misura gli angoli della seduta e rileva il tempo nel quale l'utente è rimasto in una stessa posizione con l'obiettivo di implementare la corretta gestione dello scarico pressorio.

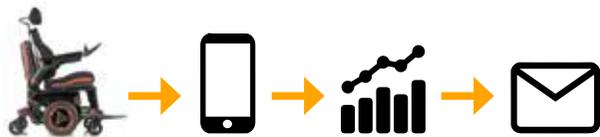

- Utilizza la tecnologia Bluetooth per connettersi alla carrozzina
- Trasmette rilevazioni live degli angoli della seduta e delle tempistiche relative a basculamento, reclinazione ed elevazione delle gambe
- I report possono essere inviati ai terapeuti e al personale clinico di riferimento via e-mail
- Aiuta a generare protocolli per la gestione dello scarico pressorio
- Avvisa l'utilizzatore quando deve cambiare posizione

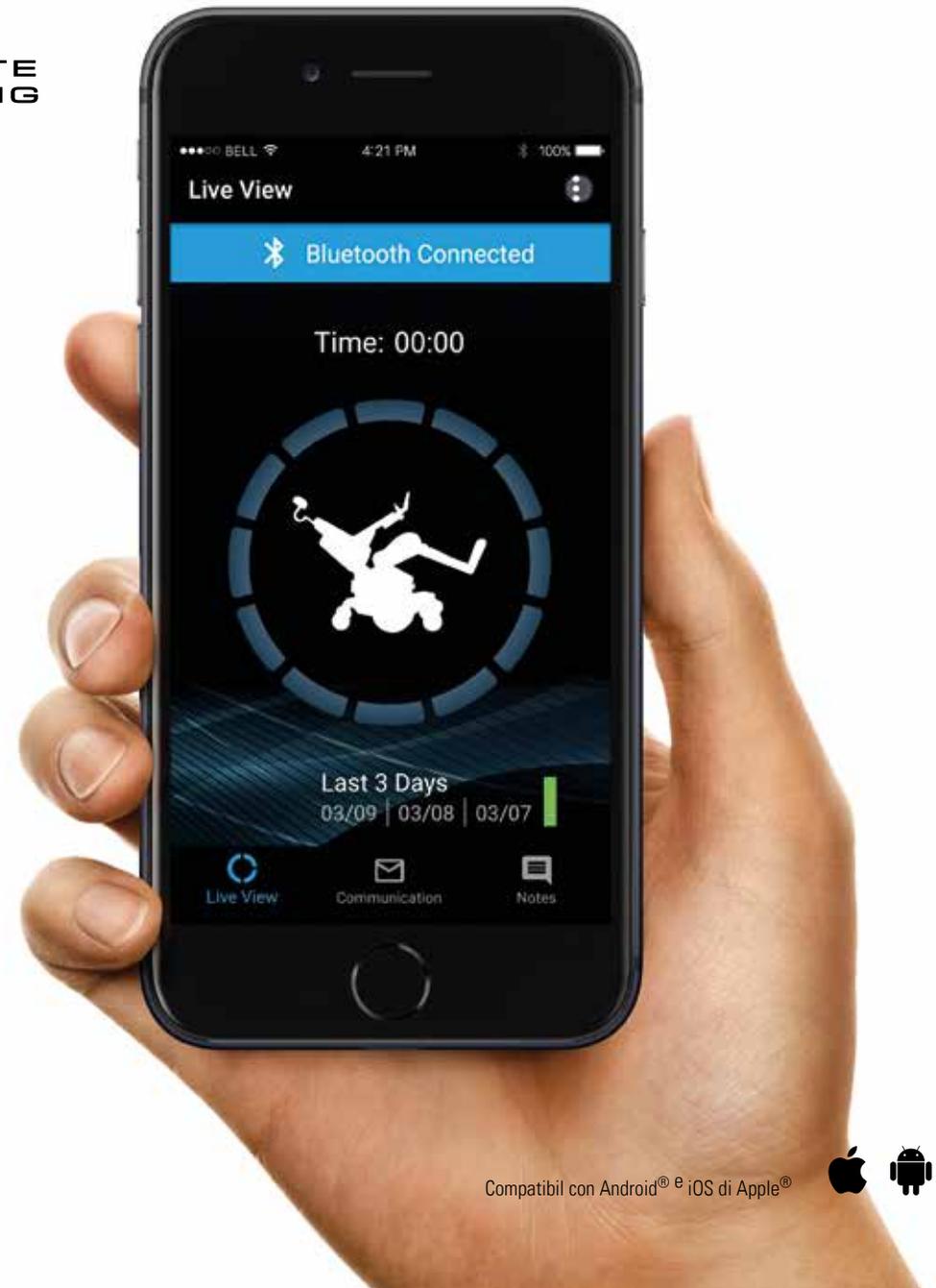

COMANDI E CONNETTIVITA'

IL CONTROLLO A PORTATA DI POLPASTRELLO

Gestite l'ambiente che vi circonda con il joystick di ultimissima generazione delle carrozzine della serie Q700 M.

Non solo potete far fare alla carrozzina ciò che volete, ma anche a tutti i dispositivi a lei connessi come controlli ambientali, smartphone, tablet e computer.



R-NET

JOYSTICK ADVANCED

Le carrozzine della serie Q700 possono essere corredate dal joystick R-NET ADVANCED, facile da visualizzare grazie all'ampio schermo HD e intuitivo da gestire.

CONNETTIVITA' A INFRAROSSI

Gestite il controllo ambientale tramite la connessione a infrarossi integrata. Controllate TV, DVD, docking station e qualunque altro dispositivo elettronico semplicemente dal vostro joystick.

CONNETTIVITA' BLUETOOTH

Controllate il vostro smartphone, il computer, il tablet ed ogni altro dispositivo Bluetooth e i-device (Android e iOS) grazie al modulo Bluetooth aggiuntivo. Connettetevi e controllate fino a 4 dispositivi.

BREVETTO ESCLUSIVO QUICKIE PER L'ASSEGNAZIONE DEI PULSANTI

Modificate la funzione di ogni pulsante del joystick per utilizzare il comando che desiderate, grazie ai pulsanti assegnabili **BREVETTATI** di QUICKIE. Potrete assegnare una seconda funzione ad ogni pulsante (pressione prolungata), avendo così accesso in modo semplice e veloce alle funzioni che utilizzate più spesso senza bisogno di azionare il joystick.



SWITCH-IT

CONTROLLI INNOVATIVI

Switch Box Ctrl5 consente di accedere ad ogni funzione semplicemente premendo un pulsante o una levetta e si abbina perfettamente alla possibilità di memorizzare sino a 5 posizioni personalizzabili della seduta.



COMANDI ALTERNATIVI

Se la guida con un comando tradizionale risulta difficoltosa, i comandi alternativi vi consentono di valutare varie esperienze di guida per trovare la soluzione ideale alle vostre esigenze.



LINK-IT

SISTEMA DI MONTAGGIO

Avete necessità di utilizzare switch aggiuntivi o comandi speciali? Nessun problema, è facile applicarli alla carrozzina utilizzando il sistema universale di montaggio LINK-IT.

Combinando i vari componenti potete creare un infinito numero di soluzioni per ottenere ciò che vi serve. LINK-IT è facile da realizzare e da posizionare garantendo un'elevata stabilità e tenuta nel tempo, senza compromettere il design minimalista della vostra carrozzina. Perciò se vi serve applicare un comando speciale al bracciolo, uno switch allo schienale o all'appoggiatesta, è tutto molto semplice, LINK-IT!






QUICKIE



ASPETTO E DESIGN

STILE INCONFONDIBILE

Con la serie Q700 M abbiamo portato lo stile ad un livello superiore. La base di colore nero opaco, gli eleganti dettagli colorati e le accurate fodere di rivestimento definiscono un design unico e inconfondibile.

Voglia di cambiare?

E' possibile scegliere diverse tinte per i dettagli colorati, tutte si abbinano perfettamente al colore nero opaco della scocca. Dovrete semplicemente sostituire i dettagli colorati. Cambiare lo stile della vostra carrozzina non è mai stato così facile.



INFORMAZIONI NORMATIVE

Serie Q700

Crash test:	Sì - approvata per il trasporto in senso di marcia in un veicolo (ISO 7176-19). Fissaggio: 4 punti fissi sulla carrozzina con 2 cinghie doppie dietro e 2 cinghie doppie davanti. Valutazione complessiva del posizionamento della cinture di sicurezza secondo ISO 7176-19:2008 Annex D=A. Non sono ammesse cinture di sicurezza ancorate. La facilità di accesso al veicolo e la manovrabilità al suo interno dipendono dalle dimensioni della carrozzina.
DAHL:	Q700 M con SEDEO PRO ADVANCED, Q700 M con SEDEO PRO & Q700 R con SEDEO PRO approvati con sistema DAHL e portata massima di 136 kg.
Trasporto senza utente:	Fissare la carrozzina in modo sicuro sul veicolo (per es. automobile o aereo).
Destinazione e condizioni uso:	Per persone dotate di mobilità limitate, per guida autonoma o con l'aiuto di un assistente, per utilizzo in interni e in esterni. Carrozzina classe B.



Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it

Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d'ordine presente sul nostro sito web. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical.

Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it

