

# SERIE Q400<sup>®</sup>

Advanced Outdoor/Indoor Performance



Q-Series  
Powerchairs

Ingegneria d'avanguardia. Personalizzata per voi.



Q400 R



Q400 M



Q400 F

# INGEGNERIA D'AVANGUARDIA PERSONALIZZATA PER VOI.

QUICKIE®, SEDEO®, JAY®, WHITMYER® e SWITCH-IT® vi offrono la gamma più completa di carrozzine elettroniche di alta qualità, innovative e tecnicamente avanzate, ciascuna creata esattamente per voi, qualunque siano le vostre necessità cliniche e di vita.



NUOVA SERIE Q

## THE POWER OF QUICKIE

Dalla mobilità di base alle problematiche più complesse. Un'ampia gamma di basi, tipi di trazione, sedute, elettronica, comandi ed accessori che possono essere combinati per creare la carrozzina perfetta per qualunque necessità.

ESIGENZE CLINICHE



Q100

SEDUTE  
SEDEO SLING

BASI  
RWD



Q200

SEDUTE  
SEDEO SLING

BASI  
RWD



Q400

SEDUTE  
SEDEO LITE

BASI  
MWD  
FWD  
RWD



Q500

SEDUTE  
SEDEO PRO

BASI  
MWD  
FWD  
RWD  
HWD



Q700

SEDUTE  
SEDEO ERGO  
SEDEO PRO

BASI  
MWD  
FWD  
RWD



Q700-UP

SEDUTE  
SEDEO ERGO UP

BASI  
MWD  
FWD

□ RWD: Trazione posteriore □ MWD: Trazione centrale □ FWD: Trazione anteriore

PERFORMANCE DELLE BASI

TUTTA LA GAMMA

# SERIE Q400

Grazie alla possibilità di scegliere tra tre diverse basi di trazione con la seduta multi-regolabile SEDEO LITE (con la possibilità di applicare i sistemi di postura JAY e gli appoggiatesta WHITMYER) e un'ampia gamma di comandi avanzati, potrete adattare la Q400 alle vostre esigenze e al vostro stile di vita.



**Q400 F** con  
**SEDEO LITE**  
TRAZIONE ANTERIORE



**Q400 M** con  
**SEDEO LITE**  
TRAZIONE CENTRALE



**Q400 R** con  
**SEDEO LITE**  
TRAZIONE POSTERIORE



# CARROZZINE ELETTRONICHE HIGH PERFORMANCE

La nuova QUICKIE Q400 offre grandi prestazioni in esterni insieme ad una buona manovrabilità in interni e ad uno stile inconfondibile. Tutto questo combinato con il sistema di seduta multi-regolabile SEDEO LITE per rispondere alle vostre esigenze cliniche.



TUTTA LA GAMMA

## BASI DI TRAZIONE

Q400 M: centrale

Q400 R: posteriore

Q400 F: anteriore

## SISTEMI DI SEDUTA

SEDEO LITE

JAY e WHITMYER

## COMANDI E CONNETTIVITA'

Comando VR2

Comandi RNET

Comandi SWITCH-IT

Sistema di montaggio LINK-IT

## STILE RAFFINATO

DESIGN ELEGANTE e ampia scelta di colori

# SCEGLIETE LA BASE ADATTA A VOI

## TRAZIONE ANTERIORE, POSTERIORE O CENTRALE

	Q400 R	Q400 M	Q400 F
<b>Tipo di trazione</b>	Posteriore	Centrale	Anteriore
<b>Raggio di curva</b>	950 mm	560-630 mm	735 mm
<b>Ruote motrici</b>	13" - 14"	13"	13" - 14"
<b>Ruote piroettanti e direzionali</b>	9" / 10"	7"	9"
<b>Velocità massima</b>	10 Km/h	10 Km/h	10 Km/h
<b>Batterie</b>	50 Ah, 60 Ah, 80 Ah	50 Ah, 60 Ah, 80 Ah	50 Ah, 60 Ah, 80 Ah
<b>Raggio di sterzata</b>	1258 mm	1100 mm	1240 mm
<b>Pendenza massima superabile</b>	6°	6°	6°
<b>Superamento massimo ostacoli</b>	100 mm con salicordoli 80 mm senza salicordoli	75 mm	70 mm
<b>Colori dettagli</b>	4	4	4
<b>Autonomia (ISO 7176-4)</b>	40 km	40 km	40 km
<b>Altezza seduta da terra</b>	415 mm (con batterie da 60 Ah)		

Tutte le basi della Serie Q400 offrono una guida veramente confortevole e grandi prestazioni all'aperto grazie alla velocità a 10 Km/h, alle batterie disponibili sino a 80 Ah, ai motori a 2 poli standard (a 4 poli optional) e alle sospensioni con elastomeri per le ruote motrici.

### Q400 R

#### A trazione posteriore

Il modello a trazione posteriore offre una base stabile con una buona capacità di superamento ostacoli. Facile da guidare, permette un buon controllo con comandi non proporzionali.



La scelta della base influisce sulle prestazioni della carrozzina nelle diverse situazioni e nei diversi ambienti. QUICKIE Q400 offre un'ampia gamma di basi di trazione in modo tale che ogni utente possa scegliere la soluzione migliore in relazione alle proprie preferenze personali, alla propria esperienza, alle proprie necessità cliniche, allo stile di vita e all'ambiente in cui vive ogni giorno.

### Q400 M

#### A trazione centrale

Il modello a trazione centrale offre una manovrabilità impareggiabile ed è più compatta dei modelli a trazione posteriore e anteriore; ha un raggio di sterzata molto ridotto ed è estremamente intuitivo da guidare e controllare.



### Q400 F

#### A trazione anteriore

Il modello a trazione anteriore offre grandi prestazioni in esterni, una buona manovrabilità in interni ed è estremamente stabile sui terreni in pendenza. Per la guida potrebbe richiedere una esperienza maggiore.



# Q400 M

## A TRAZIONE CENTRALE

QUICKIE Q400 M a trazione centrale bilancia in modo perfetto una grande manovrabilità in esterni con ottime prestazioni in interni. I suoi motori uniti alle 6 ruote dotate di sospensioni, alla tecnologia anti-beccheggio di QUICKIE e ad un raggio di curva molto compatto, vi assicureranno un'esperienza di guida eccezionale.

### ECCEZIONALE MANOVRABILITA' IN INTERNI

Potrete attraversare senza difficoltà anche passaggi stretti e salire in ascensore, grazie al raggio di curva compatto e alle ridotte dimensioni della base. I trasferimenti saranno più facili e potrete accedere senza sforzo anche ai mezzi predisposti per il trasporto di carrozzine e sotto i tavoli grazie all'altezza dalla seduta a terra più bassa di sempre, 415 mm completa di modulo per il basculamento della seduta.



# PERFORMANCE ECCEZIONALE IN ESTERNI



### SOSPENSIONI SU TUTTE LE RUOTE

Potrete godere di una guida fluida e stabile, anche su terreni sconnessi, grazie al sistema di sospensioni su tutte e sei le ruote brevettato da QUICKIE. Supererete ostacoli fino a 100 mm e vi sentirete sempre sicuri, anche quando dovrete superare pendenze fino a 8 gradi.



### TECNOLOGIA ANTI-BECCHIEGGIO

La tecnologia anti-beccheggio di QUICKIE elimina l'oscillazione quando si affrontano strade in pendenza e poichè tutto il vostro peso è posizionato direttamente sopra le ruote motrici per massimizzare la trazione, vi sentirete sicuri come mai.



### MASSIMA LIBERTÀ

Con l'affidabile motore a 2 poli da 10 Km/h (a 4 poli opzionale) e la possibilità di scegliere le batterie da 50, 60 o 80 Ah per ottimizzare l'autonomia, potrete sempre viaggiare in totale sicurezza e affidabilità con la vostra Q400 M.

BASI DI TRAZIONE

# Q400 F

## A TRAZIONE ANTERIORE

Q400 F offre un'altezza da terra di 415 mm che favorisce l'accesso sui mezzi predisposti per il trasporto di carrozzine, sotto i tavoli ed in molte altre situazioni.

### OTTIMA MANOVRABILITÀ IN INTERNI

Q400 F, grazie ai supporti per le forcelle rivolti verso l'interno, è particolarmente reattiva ed assai a proprio agio in spazi interni.



BASI DI TRAZIONE

# PERFORMANCE ECCEZIONALE IN ESTERNI

Il robusto telaio di Q400 F, unito alle affidabili sospensioni con elastomeri di cui sono dotate le ruote motrici, vi offrirà una guida facile e confortevole su ogni tipo di terreno.




### SOSPENSIONI SULLE RUOTE MOTRICI

Grazie alle sospensioni con elastomeri Q400 F offre una guida molto confortevole.



### MASSIMA LIBERTÀ

Con l'affidabile motore a 2 poli da 10 Km/h (a 4 poli opzionale) e la possibilità di scegliere le batterie da 50, 60 o 80 Ah per ottimizzare l'autonomia, potrete sempre viaggiare in totale sicurezza e affidabilità con la vostra Q400 F.

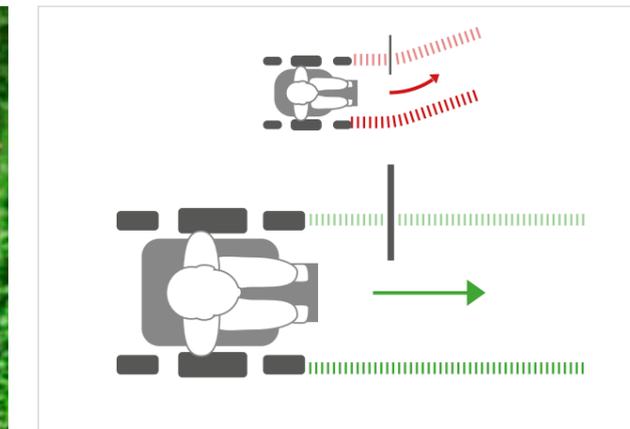

### MANTENETE LA TRAIETTORIA CON IL GYRO CONTROL

Il sistema opzionale Gyro Control (standard sulla trazione anteriore) ti assiste durante la guida e corregge automaticamente involontarie deviazioni. Vi mantiene nella traiettoria corretta e riduce la necessità di effettuare continui aggiustamenti con il joystick (particolarmente consigliato in abbinamento a comandi speciali).

**BASI DI TRAZIONE**

# Q400 R

## A TRAZIONE POSTERIORE

Q400 R offre un'altezza da terra di 415 mm che favorisce l'accesso sui mezzi predisposti per il trasporto di carrozzine, sotto i tavoli ed in molte altre situazioni.

### **FACILE ED INTUITIVA**

Q400 R vi offre una guida facile ed intuitiva grazie alla posizione delle ruote motrici.



**BASI DI TRAZIONE**

# PERFORMANCE ECCEZIONALE IN ESTERNI

Il robusto telaio di Q400 R, unito alle affidabili sospensioni con elastomeri di cui sono dotate le ruote motrici, vi offrirà una guida facile e confortevole per trascorrere il vostro tempo all'aperto.




### **SOSPENSIONI SULLE RUOTE MOTRICI**

Con le sospensioni con elastomeri Q400 R offre una guida molto confortevole.



### **MASSIMA LIBERTÀ**

Con l'affidabile motore a 2 poli da 10 Km/h (a 4 poli opzionale) e la possibilità di scegliere le batterie da 50, 60 o 80 Ah per ottimizzare l'autonomia, potrete sempre viaggiare in totale sicurezza e affidabilità con la vostra Q400 R.

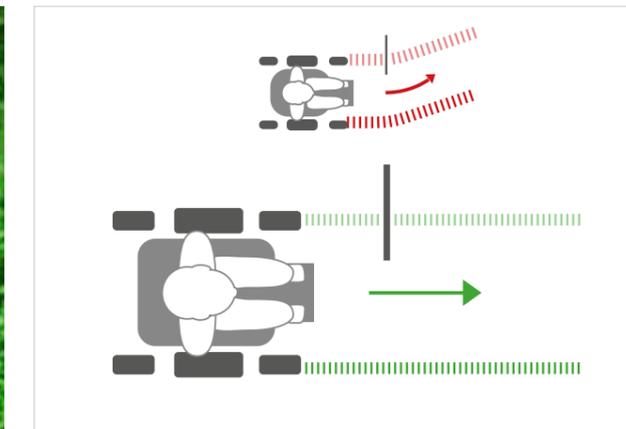

### **MANTENETE LA TRAIETTORIA CON IL GYRO CONTROL**

Il sistema opzionale Gyro Control (standard sulla trazione anteriore) ti assiste durante la guida e corregge automaticamente involontarie deviazioni. Vi mantiene nella traiettoria corretta e riduce la necessità di effettuare continui aggiustamenti con il joystick (particolarmente consigliato in abbinamento a comandi speciali).

# SEDEO LITE

Il sistema di seduta SEDEO LITE è molto confortevole e consente all'utente maggiore indipendenza nella vita di tutti i giorni. Il telaio multi-regolabile include la possibilità di integrare il sistema con parti aggiuntive e un'ampia gamma di opzioni per rispondere ad esigenze cliniche da lievi a moderate.

## VELOCE E FACILE DA REGOLARE

Tutte le regolazioni di SEDEO LITE possono essere fatte in modo facile e veloce grazie alle indicazioni autoesplicative e utilizzando un unico attrezzo. Le varie parti possono essere regolate, riposizionate o ruotate per creare il supporto migliore per l'utente e per adattarsi ai suoi cambiamenti nel tempo.



# SEDUTA MULTI-REGOLABILE

## TELO SCHIENALE CON IMBOTTITURA COMFORT

SEDEO LITE offre un telo schienale regolabile in altezza dotato di fasce tensionabili e un'ampia gamma di imbottiture e schienali comfort dotati di cinghie e di sagomature differenti per ottenere il miglior comfort e il miglior posizionamento.

I cuscini e gli schienali JAY sono compatibili con il telaio di SEDEO LITE per coprire qualunque necessità clinica.

## BRACCIOLI RIBALTABILI

I braccioli ribaltabili all'indietro facilitano i trasferimenti. Potrete scegliere tra la versione rimovibile o reclinabile. Tutti disponibili con varie imbottiture.

## PEDANE SWING AWAY CON COMPENSAZIONE DELLA LUNGHEZZA

Le pedane swing away con compensazione della lunghezza consentono di raggiungere la posizione migliore. E' disponibile anche un'ampia gamma di pedane swing away o di pedane montate centralmente, sia con meccanismo manuale sia in versione elettronica.

## NUOVO DESIGN PER L'APPLICAZIONE DELL'APPOGGIATESTA

Il sistema di montaggio dell'appoggiatesta inaugura nuovi standard in regolazione e design. Compatibile con appoggiatesta SEDEO e WHITMYER.

## ELEMENTI PER IL POSIZIONAMENTO E BINARIO DELLA SEDUTA INTEGRATO

Vari elementi per il posizionamento sono disponibili come i supporti laterali swing away per il torace, i supporti laterali per le cosce e per le ginocchia. Sono tutti facilmente ribaltabili e asportabili. Il telaio con binario integrato consente di posizionare i vari elementi.



## JAY® & WHITMYER® PER UNA CORRETTA POSTURA


Un'ampia gamma di appoggiatesta WHITMYER e di cuscini e schienali JAY può essere abbinata al sistema di seduta SEDEO LITE per soddisfare le esigenze posturali ed ottenere il miglior posizionamento possibile.

### APPOGGIATESTA WHITMYER

Creati per rispondere a varie esigenze di posizionamento, dalle più semplici alle più complesse, sono disponibili in numerose forme e misure per garantire il supporto ed il comfort adeguati.

### CUSCINI E SCHIENALI JAY

Progettati per stabilizzare il bacino, proteggere la cute e assicurare il comfort necessario, i cuscini, gli schienali e gli elementi per il posizionamento JAY richiedono pochissima manutenzione, sono personalizzabili e disponibili in moltissime versioni per soddisfare qualunque esigenza.

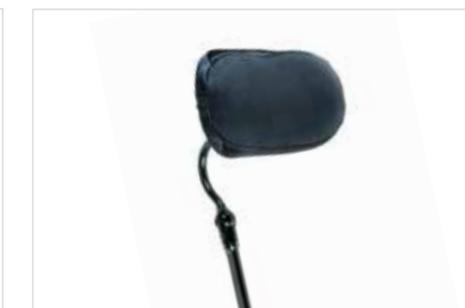

## IL CONTROLLO A PORTATA DI POLPASTRELLO

Gestite l'ambiente che vi circonda con il joystick di ultimissima generazione delle carrozzine della serie Q400.

Non solo potete far fare alla carrozzina ciò che volete, ma anche a tutti i dispositivi a lei connessi come controlli ambientali, smartphone, tablet e computer.

**SEDEO**  
LITE

## VR2, R-NET, R-NET ADVANCE: L'ultima generazione di joystick

Con ogni carrozzina della serie Q400 potrete scegliere tra il joystick VR2, R-NET e R-Net ADVANCE, facile da visualizzare grazie all'ampio schermo HD ed intuitivo da gestire.

### CONNESSIONE

Gestite il controllo ambientale tramite la connessione a infrarossi integrata. Controllate TV, DVD, docking station e qualunque altro dispositivo elettronico semplicemente dal vostro joystick.

### BLUETOOTH & IDRIVE

Controllate il vostro smartphone, il computer, il tablet ed ogni altro dispositivo Bluetooth e i-device (Android e iOS) grazie al modulo Bluetooth aggiuntivo. Connettetevi e controllate fino a 4 dispositivi.

### BREVETTO ESCLUSIVO QUICKIE PER L'ASSEGNAZIONE DEI PULSANTI

Date ai pulsanti del vostro joystick qualunque funzione desideriate grazie ai pulsanti assegnabili, brevetto esclusivo di QUICKIE. Potrete attribuire ad ogni pulsante anche una seconda funzione (utilizzando una pressione prolungata), così da ottenere un accesso facile e veloce alle funzioni che utilizzate più frequentemente.



## SWITCH-IT CONTROLLI INNOVATIVI

Switch Box Ctrl5 consente di accedere ad ogni funzione semplicemente premendo un pulsante o una levetta e si abbina perfettamente alla possibilità di memorizzare sino a 5 posizioni personalizzabili della seduta.

### COMANDI ALTERNATIVI


Se la guida con un comando tradizionale risulta difficoltosa, i comandi alternativi vi consentono di valutare varie esperienze di guida per trovare la soluzione ideale alle vostre esigenze.



## LINK-IT SISTEMA DI MONTAGGIO

Avete necessità di utilizzare switch aggiuntivi o comandi speciali? Nessun problema, è facile applicarli alla carrozzina utilizzando il nuovo sistema universale di montaggio LINK-IT.

Combinando i vari componenti potete creare un infinito numero di soluzioni per ottenere ciò che vi serve. LINK-IT è facile da realizzare e da posizionare garantendo un'elevata stabilità e tenuta nel tempo, senza compromettere il design minimalista della vostra carrozzina. Perciò se vi serve applicare un comando speciale al bracciolo, uno switch allo schienale o all'appoggiatesta, è tutto molto semplice, LINK-IT!

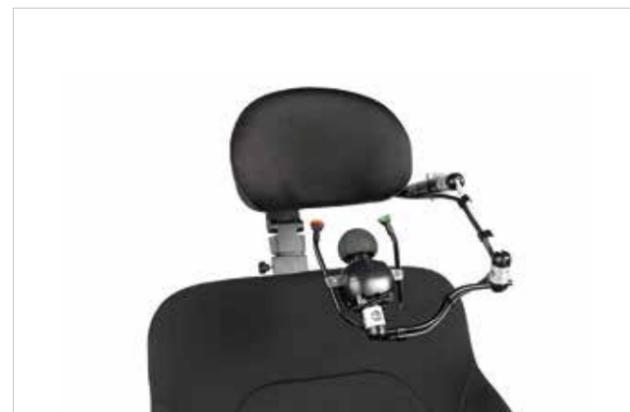




ASPETTO E DESIGN

## STILE INCONFONDIBILE

Con la serie Q400 abbiamo portato lo stile ad un livello superiore. La base di colore nero opaco, i cablaggi perfettamente nascosti e gli eleganti dettagli colorati definiscono un design unico e inconfondibile.

### Voglia di cambiare?

Per la vostra Q400 SEDEO LITE è possibile scegliere 4 diverse tinte per i dettagli, tutte si abbinano perfettamente al colore nero opaco della scocca. Non vi preoccupate, i dettagli sono rimovibili, potrete cambiare in ogni momento lo stile della vostra carrozzina elettronica.

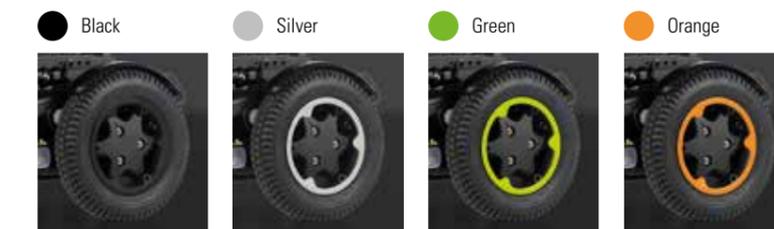

## DATI TECNICI / Q400 R - Q400 M - Q400 F CON SEDEO LITE

	<b>Q400 R</b>	<b>Q400 M</b>	<b>Q400 F</b>		<b>Q400 R</b>	<b>Q400 M</b>	<b>Q400 F</b>
<b>Portata massima</b>	136 kg	136 kg	136 kg	<b>Velocità massima</b>	10 Km/h	10 Km/h	10 Km/h
<b>Larghezza seduta</b>	385-510 mm	385-510 mm	385-510 mm	<b>Batteria</b>	50 Ah; 60 Ah; 80 Ah	50 Ah; 60 Ah; 80 Ah	50 Ah; 60 Ah; 80 Ah
<b>Profondità seduta</b>	410-560 mm	410-560 mm	410-560 mm	<b>Elettronica</b>	VR2, R-Net	VR2, R-Net	VR2, R-Net
<b>Altezza seduta</b>	415-490 mm	415-490 mm	415-490 mm	<b>Raggio di curva</b>	950 mm	560-630 mm	735 mm
<b>Altezza schienale</b>	460-510 mm	460-510 mm	460-510 mm	<b>Raggio di sterzata</b>	1258 mm	1100 mm	1240 mm
<b>Larghezza totale</b>	640 mm	610-620 mm	640 mm	<b>Pendenza massima superabile</b>	6°	6°	6°
<b>Lunghezza totale</b>	Max. 1370 mm	Max. 1130 mm	Max. 1340 mm	<b>Superamento massimo ostacoli</b>	80 mm (100 mm con salicordoli)	75 mm	70 mm
<b>Altezza totale</b>	Max. 1400 mm	Max. 1400 mm	Max. 1400 mm	<b>Ruote motrici</b>	13" - 14"	13"	13" - 14"
<b>Reclinazione elettronica</b>	da 85° a 120°	da 85° a 120°	da 85° a 120°	<b>Ruote direzionali e piroettanti</b>	9" / 10"	7"	9"
<b>Basculamento della seduta</b>	30°/50°	30°/50°	30°/50°	<b>Colori dettagli</b>	4	4	4
<b>Funzioni della seduta</b>	Basculamento, elevazione e basculamento, reclinazione			<b>Autonomia (ISO 7176-4)</b>	Max. 40 km	Max. 40 km	Max. 40 km
				<b>Peso della carrozzina (senza batterie)</b>	da 130 kg	da 130 kg	da 130 kg



PB\_Quickie\_Q400\_IT\_Rev3

Sunrise Medical S.r.l.  
Via Riva, 20 - Montale  
29122 Piacenza - Italia  
Tel.: +39 0523 573111  
Fax: +39 0523 570060  
e-mail: info@sunrisemedical.it  
www.SunriseMedical.it

Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d'ordine presente sul nostro sito web. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical.

Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito [www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)

