

Q500[®] SERIES

Make your own adventure



Q Series
Powerchairs

Ingegneria d'avanguardia. Personalizzata per voi.



Q500 R



Q500 M



Q500 F



Q500 H



**INGEGNERIA D'AVANGUARDIA
PERSONALIZZATA PER VOI.**

QUICKIE, JAY, WHITMYER e SWITCH-IT offrono la gamma più completa di carrozzine elettroniche di alta qualità, innovative e tecnicamente avanzate, ciascuna creata esattamente per voi, qualunque siano le vostre necessità cliniche e di vita.

NUOVE QUICKIE Q

THE POWER OF QUICKIE® LE NUOVE CARROZZINE ELETTRONICHE QUICKIE® DELLA LINEA Q

Dalla mobilità di base alle problematiche più complesse. Un'ampia gamma di basi, tipi di trazione, sedute, elettronica, comandi ed accessori che possono essere combinati per creare la carrozzina perfetta per qualunque necessità.

ESIGENZE CLINICHE



Q100

SEDUTE
SLING SEAT

BASI
RWD



Q200

SEDUTE
SLING SEAT

BASI
RWD



Q400

SEDUTE
SEDEO LITE

BASI
MWD
FWD
RWD



Q500

SEDUTE
SEDEO PRO

BASI
MWD
FWD
RWD
HWD



Q700

SEATING
SEDEO ERGO
SEDEO PRO

BASI
MWD
FWD
RWD



Q700 UP

SEATING
SEDEO ERGO UP

BASI
MWD
FWD

■ RWD: Trazione posteriore
 ■ MWD: Trazione centrale
 ■ FWD: Trazione anteriore
 ■ HWD: Trazione ibrida

PERFORMANCE DELLE BASI

SERIE Q500

Q500 CON
SEDEO PRO

TRAZIONE CENTRALE



TRAZIONE POSTERIORE



TRAZIONE ANTERIORE



TRAZIONE IBRIDA



Come risultato di anni di esperienza da leader di mercato delle carrozzine elettroniche, dei sistemi di seduta e dei sistemi di controllo innovativi, QUICKIE® vi presenta la serie QUICKIE Q500. Esplorate il mondo con Q500 e create le vostre avventure!



CARROZZINE ROBUSTE, PERFETTE PER L'ESTERNO

Grazie alla possibilità di scegliere fra tre differenti basi di trazione (tutte dotate di sistema di sospensione avanzato e potenti motori), insieme all'eccezionale sistema di seduta personalizzabile SEDEO® PRO ed all'ampia gamma di comandi avanzati R-Net e SWITCH-IT, la vostra Q500 saprà adattarsi a qualunque vostra esigenza e al vostro stile di vita.



BASI DI TRAZIONE

Q500 M: centrale

Q500 R: posteriore

Q500 F: anteriore

Q500 H: ibrida

SISTEMI DI SEDUTA

SEDEO PRO

COMANDI E CONNETTIVITA'

App REMOTE SEATING

Comandi R-NET

Comandi SWITCH-IT

Sistema di montaggio LINK-IT

STILE RAFFINATO

DESIGN ELEGANTE e ampia scelta di colori

SCEGLIETE LA BASE ADATTA A VOI

TRAZIONE ANTERIORE, POSTERIORE, CENTRALE O IBRIDA

	Q500 R	Q500 M	Q500 F	Q500 H
Tipo di trazione	Posteriore	Centrale	Anteriore	Ibrida
Raggio di curva	950 mm	560-630 mm	735 mm	910 mm
Ruote motrici	13" & 14"	13"	13" & 14"	13" & 14"
Ruote piroettanti e direzionali	9" e 10"	7"	9"	9" (anteriori) / 4" (posteriori)
Velocità massima	10 km/h (12,5 km/h opzionale)			
Batteria	60 Ah (80 Ah opzionale)			
Raggio di sterzata	1258 mm	1100 mm	1240 mm	1260 mm
Pendenza massima superabile	10°	6°	6°	10°
Superamento massimo ostacoli	100 mm con salicordoli 80 mm senza salicordoli	75 mm	70 mm	85 mm
Colori dei dettagli	7 colori	7 colori	7 colours	7 colours
Autonomia (ISO 7176-4)	40 km	40 km	40 km	40 km
Altezza della seduta (dal piatto della seduta a terra)	415 mm con basculamento / 425 mm con basculamento e elevazione seduta (con batterie da 60 Ah)			

La scelta della base influisce sulle prestazioni della carrozzina nelle diverse situazioni e nei diversi ambienti. QUICKIE Q500 offre la più ampia gamma di basi di trazione in modo tale che ogni utente possa scegliere la soluzione migliore in relazione alle proprie preferenze personali, alla propria esperienza, alle proprie necessità cliniche, allo stile di vita e all'ambiente in cui vive ogni giorno.

Q500 R A TRAZIONE POSTERIORE

Il modello a trazione posteriore offre una base stabile con una buona capacità di superamento ostacoli.

Facile da guidare, permette un buon controllo con comandi non proporzionali.



Q500 M A TRAZIONE CENTRALE

Il modello a trazione centrale offre una manovrabilità impareggiabile ed è più compatto dei modelli a trazione posteriore e anteriore; ha un raggio di sterzata molto ridotto ed è estremamente intuitivo da guidare e controllare.



BASI DI TRAZIONE

SCEGLIETE LA BASE ADATTA A VOI

TRAZIONE ANTERIORE,
POSTERIORE, CENTRALE O
IBRIDA

Tutte le basi di trazione della serie Q500 offrono eccellenti prestazioni in esterni combinando potenti motori a 4 poli, ruote larghe, sospensioni sulle ruote di trazione per comfort e trazione eccezionali, velocità fino a 12,5 Km/h e batterie fino a 80 Ah.

Q500 F A TRAZIONE ANTERIORE

Il modello a trazione anteriore offre grandi prestazioni in esterni, una buona manovrabilità in interni ed è estremamente stabile sui terreni in pendenza. Per la guida potrebbe richiedere una esperienza maggiore.



Q500 H A TRAZIONE IBRIDA

Il modello a trazione ibrida è una combinazione unica tra trazione posteriore e trazione centrale che offre straordinarie prestazioni in esterni, grande manovrabilità in interni e comfort eccezionale.



BASI DI TRAZIONE


Q500 M

A TRAZIONE CENTRALE

La nuova Quickie Q500®M combina una straordinaria manovrabilità in spazi interni con prestazioni eccezionali all'esterno. I suoi potenti motori uniti alle sospensioni delle 6 ruote indipendenti e la tecnologia anti-beccheggio di QUICKIE vi assicureranno una guida eccezionalmente confortevole e sicura.

MANOVRABILITA' ECCELLENTE IN SPAZI INTERNI

Manovrabilità in ambienti interni eccelsa, grande facilità di passaggio attraverso porte strette anche 620 mm e di accesso ad ascensori, oltre alla semplicità di muoversi in spazi limitati: tutto questo grazie al raggio di sterzata compatto e alle dimensioni ridotte della base. È possibile accedere senza difficoltà ai veicoli e sotto i tavoli oltre ad effettuare i trasferimenti in carrozzina con grande facilità grazie all'altezza della seduta da terra più bassa di sempre, a partire da 415 mm con basculamento elettronico a mantenimento del centro di gravità o da 425 mm con il modulo combinato di basculamento/elevazione.

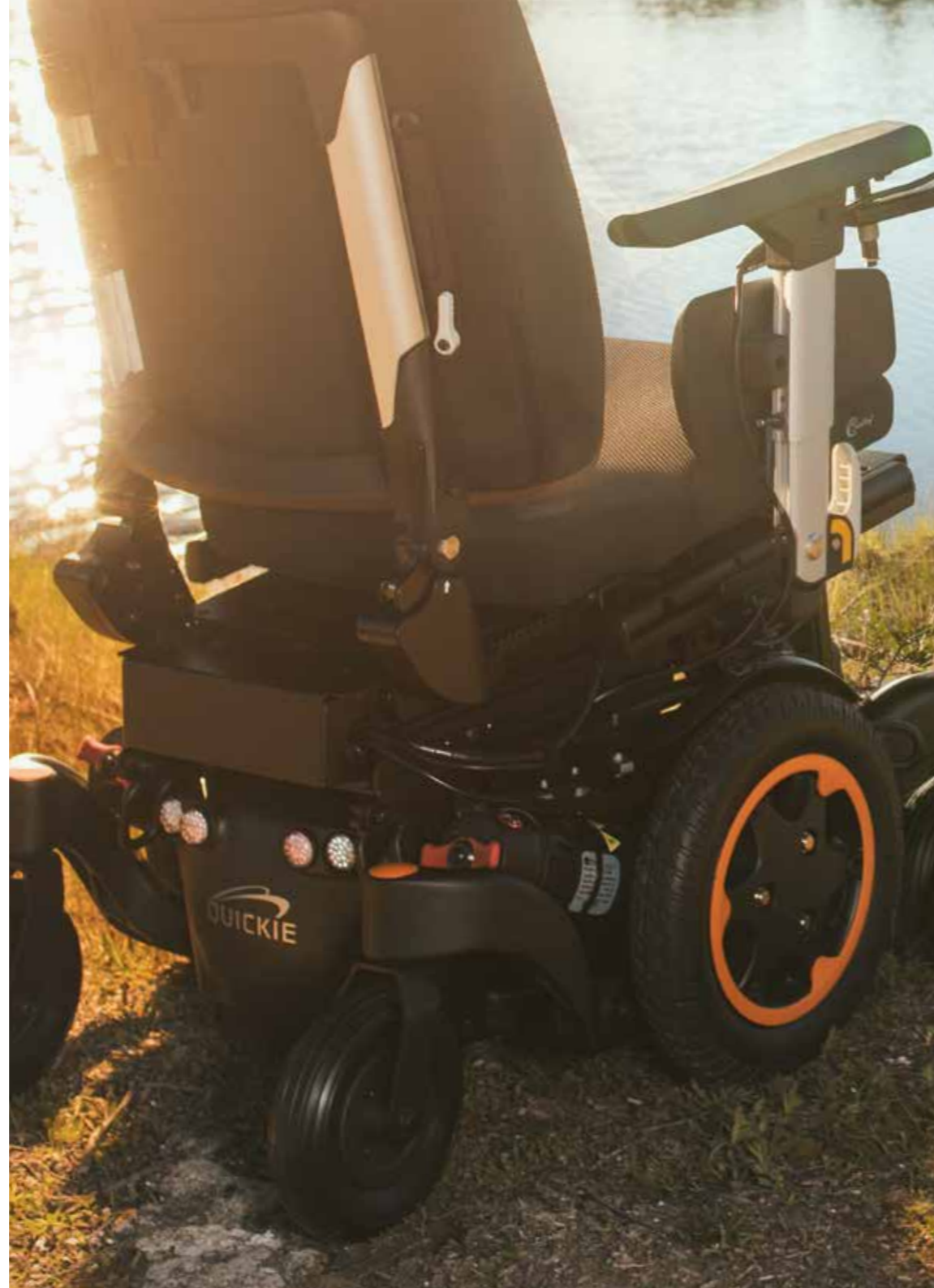

BASI DI TRAZIONE

SUPERBE PRESTAZIONI

ALL'ESTERNO



SOSPENSIONI SU TUTTE LE RUOTE

Godetevi una guida fluida e stabile, perfino su terreni sconnessi, con le sospensioni su tutte le ruote brevettate QUICKIE, 6 ruote dotate di sospensioni indipendenti capaci di assorbire tutte le asperità del terreno. Superate ostacoli alti fino a 100 mm e sfruttate la sua incredibile capacità di trazione su pendenze fino ad 8°.



TECNOLOGIA ANTI-BECCHEGGIO

La tecnologia anti-beccheggio di QUICKIE elimina il beccheggio quando vi trovate su terreni in pendenza e poiché tutto il vostro peso, per massimizzare la trazione, si trova sempre esattamente sopra le ruote motrici, avrete la sensazione di non esservi mai trovati in una posizione di guida più sicura.



MASSIMA LIBERTA'

Con i potenti motori a 4 poli dalla coppia elevata che vi consentono di raggiungere la velocità di 10 o 12,5 Km/h e le batterie da 60 o 80 Ah per massimizzare l'autonomia, potrete sempre viaggiare in tutta tranquillità con la vostra Q500 M.

BASI DI TRAZIONE

Q500 F A TRAZIONE ANTERIORE

Q500 F offre una seduta da terra di soli 415 mm per consentire un facile accesso ai veicoli adattati, ai tavoli e per agevolare la gestione della vita quotidiana in molte altre situazioni.

BUONA AGILITA' IN INTERNI

Q500 F, grazie ai supporti per le forcelle rivolti verso l'interno, è particolarmente reattiva ed assai a proprio agio in spazi interni.



BASI DI TRAZIONE

PERFORMANCE ECCEZIONALE IN ESTERNI

Q500 F offre una guida fluida e stabile su ogni tipo di terreno grazie ad una struttura robusta unita a motori potenti, tecnologia stabilizzante ed a sospensioni avanzate per le ruote motrici.




SOSPENSIONI AVANZATE PER LE RUOTE MOTRICI

Grazie al sistema di sospensioni Full Track potrete superare ogni ostacolo quasi senza accorgervene. Le sospensioni unite alla tecnologia stabilizzante vi assicurerà una guida fluida e confortevole su ogni tipo di terreno!




TECNOLOGIA STABILIZZANTE

Massima trazione grazie alla tecnologia stabilizzante davvero unica. Le due ruote di trazione sono collegate da una barra a fare da perno che assorbe la naturale tendenza ad andare da una parte durante l'attraversamento in velocità di pendenze e in curva. In questo modo entrambe le ruote mantengono la massima capacità di trazione in ogni momento.

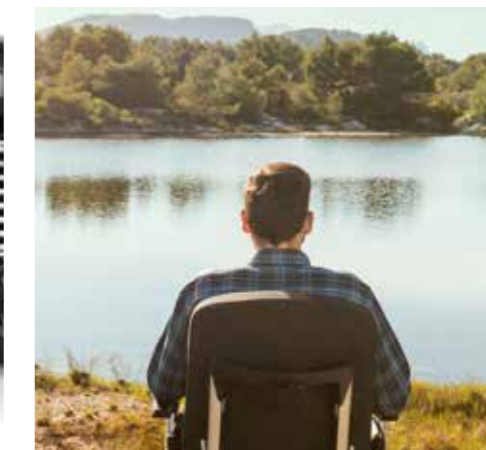

MASSIMA LIBERTA'

Grazie alle ruote grandi, al motore a 4 poli da 10 o 12,5 Km/h a coppia elevata ed alla possibilità di scegliere le batterie da 60 o 80 Ah per ottimizzare l'autonomia, con Q500 F potrete sempre viaggiare in totale sicurezza e affidabilità.

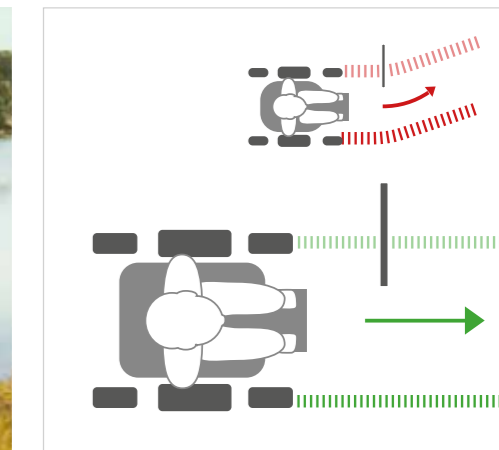

MANTENETE LA TRAIETTORIA CON GYRO CONTROL

Il sistema Gyro Control (standard nella trazione anteriore) vi assiste durante la guida e corregge automaticamente involontarie deviazioni. Vi mantiene sulla traiettoria corretta e riduce la necessità di effettuare continui aggiustamenti con il joystick (particolarmente consigliato in abbinamento a comandi speciali).

BASI DI TRAZIONE

Q500 R

A TRAZIONE POSTERIORE

Q500 R offre una seduta da terra di soli 415 mm per consentire un facile accesso ai veicoli adattati, ai tavoli e per agevolare la gestione della vita quotidiana in molte altre situazioni.

FACILE E INTUITIVA

Q500 R è facile ed intuitiva da guidare grazie alla posizione delle ruote motrici.



BASI DI TRAZIONE

COSTRUITA PER GRANDI PRESTAZIONI IN ESTERNI



SOSPENSIONI FULL TRACK

Grazie al sistema di sospensioni Full Track potrete superare ogni ostacolo quasi senza accorgervene. Le sospensioni unite alla tecnologia stabilizzante vi assicurerà una guida fluida e confortevole su ogni tipo di terreno!



TECNOLOGIA STABILIZZANTE


Massima trazione grazie alla tecnologia stabilizzante davvero unica. Le due ruote di trazione sono collegate ad una barra a fare da perno che assorbe la naturale tendenza ad andare da una parte durante l'attraversamento in velocità di pendenze e in curva. In questo modo entrambe le ruote mantengono la massima capacità di trazione in ogni momento.

Grazie al robusto design di Q500 R unito alle impareggiabili prestazioni del sistema di sospensioni Full Track, alla tecnologia stabilizzante e al sistema di controllo della trazione integrato, non dovrete mai scendere a compromessi tra una guida stabile e fluida e il pieno controllo sulla vostra carrozzina.



MASSIMA LIBERTA'

Grazie alle ruote grandi, al motore a 4 poli da 10 o 12,5 Km/h a coppia elevata ed alla possibilità di scegliere le batterie da 60 o 80 Ah per ottimizzare l'autonomia, con Q500 R potrete sempre viaggiare in totale sicurezza e affidabilità.

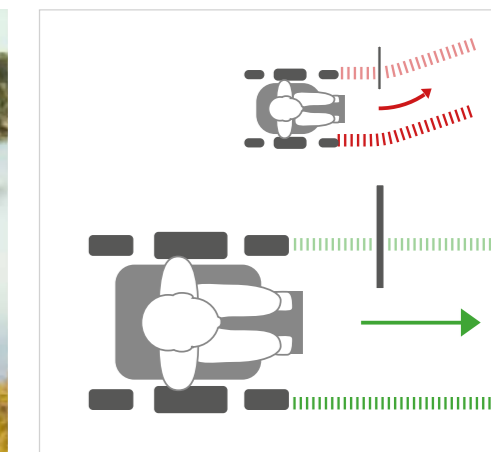

MANTENETE LA TRAIETTORIA CON GYRO CONTROL

Il sistema Gyro Control (standard nella trazione anteriore) vi assiste durante la guida e corregge automaticamente involontarie deviazioni. Vi mantiene sulla traiettoria corretta e riduce la necessità di effettuare continui aggiustamenti con il joystick (particolarmente consigliato in abbinamento a comandi speciali).

Q500 H

A TRAZIONE IBRIDA

La base di guida ibrida unisce la grande manovrabilità in interni di una carrozzina a trazione centrale con le prestazioni di guida di una carrozzina a trazione posteriore. Godetevi il comfort straordinario che la nostra Q500 M vi può offrire, ma anche la grande stabilità che potreste trovare in una Q500 R. Tutti questi benefici vanno di pari passo con l'eccezionale seduta offerta dal nostro sistema SEDEO PRO.

Q500 H è disponibile con motore a 4 poli, velocità massima di 10 o 12,5 Km/h e una grande capacità di superamento ostacoli.



PRESTAZIONI IMPRESSIONANTI IN ESTERNI




GRANDE STABILITA' DI GUIDA

I braccetti fissi delle ruote direzionali anteriori di Q500 H non consentono alla carrozzina di ribaltarsi in avanti, mentre il sistema di sospensioni dinamico mantiene sempre entrambe le ruote di guida e le ruote piroettanti posteriori in contatto con il terreno. Le ruote posteriori antiribaltamento intelligenti, assicurano che tutte e 6 le ruote rimangano in contatto con il terreno per trazione e stabilità ancora maggiori.



MAGGIORE MANOVRABILITA'

A differenza delle normali carrozzine a trazione posteriore, la nuova posizione delle ruote posteriori di Q500 H SEDEO PRO assicura un raggio di curva più stretto per una grande manovrabilità in interni senza compromettere stabilità e prestazioni in esterni.

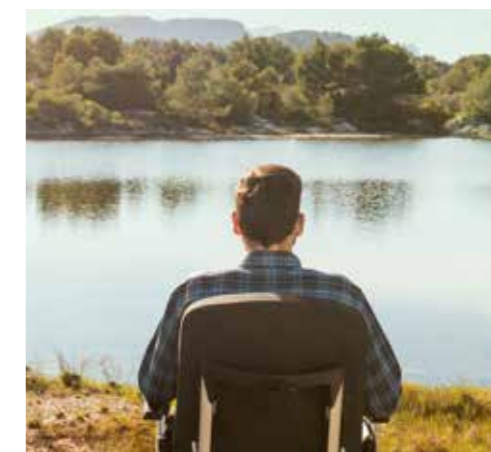

MASSIMA LIBERTA'

Grazie alle ruote grandi, al motore a 4 poli da 10 o 12,5 Km/h a coppia elevata ed alla possibilità di scegliere le batterie da 60 o 80 Ah per ottimizzare l'autonomia, con Q500 H potrete sempre viaggiare in totale sicurezza e affidabilità.



COMFORT ECCEZIONALE

Il sistema di sospensioni dinamico assorbe l'impatto con le asperità del terreno in modo attivo per migliorare il comfort di guida, la stabilità della seduta, ridurre la fatica e quindi consentire all'utente di trascorrere più tempo seduto in carrozzina.


SEDEO PRO

Il sistema di seduta SEDEO PRO combina un telaio altamente regolabile e configurabile con un'ampia scelta di opzioni di supporto e di posizionamento, tra cui una vasta gamma di cuscini e schienali SEDEO PRO per rispondere ad esigenze da moderate a medie.

Il sistema di seduta SEDEO PRO è molto comodo e favorisce l'indipendenza dell'utente nella vita quotidiana.

FACILE E VELOCE DA REGOLARE

SEDEO PRO offre grande flessibilità in quanto è completamente regolabile. Tutte le regolazioni possono essere effettuate in modo molto semplice e veloce utilizzando una sola chiave ed anche con l'utente seduto in carrozzina. SEDEO PRO può essere facilmente personalizzato ed anche velocemente adattato alle esigenze che possono mutare.

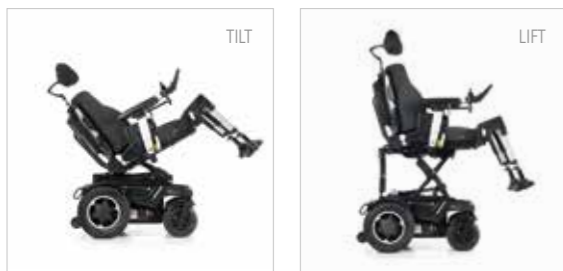

SISTEMA DI SEDUTA ALTAMENTE CONFIGURABILE



Schienale anti scivolamento

Venite a scoprire il nuovo schienale reclinabile elettronicamente con meccanismo anti scivolamento da 100 mm: rimane in contatto con la schiena evitando l'attrito con la cute. SEDEO PRO è disponibile inoltre con schienale fisso o reclinabile sia in modo meccanico che con attuatori.

Pedane elevabili elettronicamente

La pedana elevabile elettronicamente e con meccanismo di compensazione della lunghezza vi consente di raggiungere la posizione migliore. E' disponibile montata centralmente e nella versione swing away. Potrete scegliere la pedana centrale, le pedane a 70° swing away o elevabili manualmente.

Imbottitura schienale Flexible

Per il sistema di seduta SEDEO PRO è disponibile un'ampia gamma di cuscini e schienali che includono l'imbottitura per lo schienale Flexible con fasce regolabili e supporti laterali per un comfort davvero unico ed un facile posizionamento.

Elementi per il posizionamento

Sono disponibili molti elementi per il posizionamento come gli appoggiatesta SEDEO e WHITMYER, i supporti laterali per il tronco swing away, i supporti per le cosce e per le ginocchia. Tutti gli elementi per il posizionamento sono swing away ed estraibili.

Braccioli ribaltabili

I braccioli ribaltabili consentono facili trasferimenti e sono disponibili in versione rimovibile o reclinabile. Sono disponibili anche i braccioli rimovibili single post e tutti sono compatibili con 5 tipi di imbottiture.



JAY® & WHITMYER® PER UNA CORRETTA POSTURA

Un'ampia gamma di appoggiatesta WHITMYER e di cuscini e schienali JAY può essere abbinata ai sistemi di seduta SEDEO ERGO, SEDEO ERGO UP e SEDEO PRO per soddisfare le esigenze posturali ed ottenere il miglior posizionamento possibile.




APPOGGIATESTA WHITMYER

Creati per rispondere a varie esigenze di posizionamento, dalle più semplici alle più complesse, sono disponibili in numerose forme e misure per garantire il supporto ed il comfort adeguati.

CUSCINI E SCHIENALI JAY

Progettati per stabilizzare il bacino, proteggere la cute e assicurare il comfort necessario, i cuscini, gli schienali e gli elementi per il posizionamento JAY richiedono pochissima manutenzione, sono personalizzabili e disponibili in moltissime versioni per soddisfare qualunque esigenza.

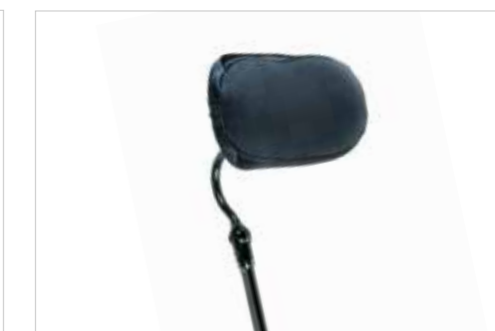

IL CONTROLLO A PORTATA DI POLPASTRELLO

Gestite l'ambiente che vi circonda con il joystick di ultimissima generazione delle carrozzine della serie Q500.

Non solo potete far fare alla carrozzina ciò che volete, ma anche a tutti i dispositivi a lei connessi come controlli ambientali, smartphone, tablet e computer.



R-NET JOYSTICK ADVANCE

Ogni carrozzina della serie Q500 è corredata dal comando R-Net Advance con un ampio schermo HD facile da leggere e intuitivo da gestire.

CONNESSIONE AD INFRAROSSI

Tenete sotto controllo l'ambiente in cui vivete utilizzando la funzionalità ad infrarossi integrata. Controllate televisori, lettori DVD e altri sistemi elettronici di intrattenimento utilizzando semplicemente il joystick.

CONNESSIONE BLUETOOTH

Controllate il vostro smartphone, il computer, il tablet ed ogni altro dispositivo Bluetooth e i-device (Android e iOS) grazie al modulo Bluetooth aggiuntivo. Connettetevi e controllate fino a 4 dispositivi.

BREVETTO ESCLUSIVO QUICKIE PER L'ASSEGNAZIONE DEI PULSANTI

Modificate la funzione di ogni pulsante sul vostro joystick per attribuire qualunque funzione desiderate, grazie alla tecnologia brevettata QUICKIE per i pulsanti assegnabili. Potrete assegnare anche una seconda funzione (con una pressione più lunga del pulsante), che vi consentirà di accedere in modo semplice e veloce alle funzioni che utilizzate più frequentemente senza dover utilizzare il joystick.



SWITCH-IT® CONTROLLI INNOVATIVI

Switch Box Ctrl5 consente di accedere ad ogni funzione semplicemente premendo un pulsante o una levetta e si abbina perfettamente alla possibilità di memorizzare sino a 5 posizioni personalizzabili della seduta.

COMANDI ALTERNATIVI


Se la guida con un comando tradizionale risulta difficoltosa, i comandi alternativi vi consentono di valutare varie esperienze di guida per trovare la soluzione ideale alle vostre esigenze.



LINK-IT SISTEMA DI MONTAGGIO

Avete necessità di utilizzare switch aggiuntivi o comandi speciali? Nessun problema, è facile applicarli alla carrozzina utilizzando il nuovo sistema universale di montaggio LINK-IT.

Combinando i vari componenti potete creare un infinito numero di soluzioni per ottenere ciò che vi serve. LINK-IT è facile da realizzare e da posizionare garantendo un'elevata stabilità e tenuta nel tempo, senza compromettere il design minimalista della vostra carrozzina. Perciò se vi serve applicare un comando speciale al bracciolo, uno switch allo schienale o all'appoggiatesta, è tutto molto semplice, LINK-IT!

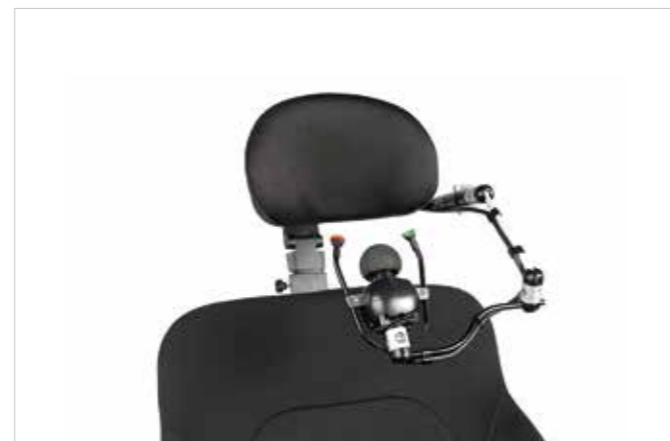



ASPETTO E DESIGN

STILE INCONFONDIBILE

Con la serie Q500 abbiamo portato lo stile ad un livello superiore. La base di colore nero opaco, il sistema di cablaggio completamente nascosto e i vari componenti uniti alle accurate fodere di rivestimento, donano alla Q500 un design elegante e moderno.

Voglia di cambiare?

E' possibile scegliere 7 diverse tinte per i dettagli colorati, tutte si abbinano perfettamente al colore nero opaco della scocca. Non vi preoccupate, i dettagli sono rimovibili, potrete cambiare in ogni momento lo stile della vostra carrozzina elettronica.



DATI TECNICI / Q500 R - Q500 M - Q500 F CON SEDEO PRO

Q500 R/M/F/H		Q500 R	Q500 M	Q500 F	Q500 H	
		Velocità massima	12,5 Km/h	12,5 Km/h	12,5 Km/h	12,5 Km/h
Portata massima	160 kg	Batteria	60/80 Ah	60/80 Ah	60/80 Ah	60/80 Ah
Larghezza seduta	380-560 mm	Elettronica	R-Net	R-Net	R-Net	R-Net
Profondità seduta	400-560 mm	Raggio di curva	950 mm	560-630 mm	735 mm	910 mm
Altezza seduta	415-490 mm	Raggio di sterzata	1258 mm	1100 mm	1240 mm	1260 mm
Altezza schienale	440-620 mm	Pendenza massima superabile	10°	6°	6°	10°
Altezza totale	Max. 1400 mm	Superamento massimo ostacoli	80 mm (100 mm con salicordoli)	75 mm	70 mm	85 mm
Schienale reclinabile elettronicamente	90°-150°	Ruote motrici	13" / 14"	13"	13" / 14"	13" / 14"
Movimento anti-scivolamento dello schienale	100 mm (opzionale)	Ruote anteriori	9" - 10"	7"	9"	9" ant. - 4" post.
Basculamento della seduta	30°/50°	Colori dettagli	7 Colori	7 Colori	7 Colori	7 Colori
Funzioni seduta	Basculamento, elevazione & basculamento, reclinazione	Larghezza totale della base	Max. 640 mm	Max. 620 mm	Max. 640 mm	Max. 640 mm
Crash test Si - approvato per trasporto su veicolo (ISO 7176-19). L'ancoraggio va effettuato sui 4 punti di fissaggio della carrozzina con due doppie cinghie posteriormente e due singole anteriormente. Valutazione complessiva della posizione della cintura secondo la norma ISO 7176-19: 2008 Annex D = A. Non è consentito l'uso delle cinture di sicurezza del veicolo. La facilità di accesso e la manovrabilità nel veicolo dipende dalle dimensioni della carrozzina.		Lunghezza totale	Max. 1370 mm	Max. 1280 mm	Max. 1340 mm	Max. 1195 mm
		Autonomia (ISO 7176-4)	Max. 40 km	Max. 40 km	Max. 40 km	Max. 40 km
		Peso della carrozzina	Da 133 kg	Da 130 kg	Da 133 kg	Da 133 kg
		Trasporto senza utente	Fissare la carrozzina in modo sicuro su un veicolo (ad esempio automobile o aeroplano)			
		Destinazione e condizioni d'uso	Per persone dotate di mobilità limitate, adulte o adolescenti, per spinta autonoma o con l'aiuto di un assistente, per utilizzo in interni e in esterni. Carrozzina classe B.			



Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
e-mail: info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it

Per maggiori informazioni sulle opzioni del prodotto consultare la scheda d'ordine presente sul nostro sito web. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di bisogno contattare Sunrise Medical.

Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it

