

CUSCINO JAY XTREME ACTIVE

Pelle protetta per utenti attivi







PELLE PROTETTA E STABILITÀ PER UTENTI ATTIVI

Il Cuscino JAY Xtreme Active è il cuscino leggero e sottile ideale per persone attive che effettuano frequenti trasferimenti.

Disegnato per offrire sollievo dalla pressione e stabilità agli utenti, questo cuscino è davvero facile da manutenere.

l' **imbottitura in fluido JAY** offre la massima la protezione per la pelle e riduce il rischio di piaghe da decubito per gli utenti più attivi.

Il **sistema a due fodere** consente un maggiore passaggio dell'aria ed aiuta a disperdere calore ed umidità in modo efficace.










Fodera interna

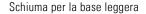





→ Fodera microclimatica



→ Fodera per incontinenza

TECNOLOGIA A DOPPIA FODERA

- Il Cuscino JAY Xtreme Active è dotato di un sistema a doppia fodera. Questa tecnologia innovativa che utilizza una fodera interna e una esterna consente una buona traspirazione e allo stesso tempo un'efficace gestione dell'incontinenza.
- Il materiale utilizzato per la fodera interna è impermeabile facile da pulire, mentre la cerniera Aqua-guard e la cucitura impermeabile assicurano che la base in schiuma non si bagni. Allo stesso tempo la fodera esterna microclimatica utilizza il tessuto 3DX™ per dissipare calore e umidità e per mantenere così l'integrità della pelle.
- Il Cuscino JAY Xtreme Active è disponibile anche con fodera stretch o da incontinenza. Tutti i cuscini sono dotati di un'utile tasca per accessori cucita alla fodera.
- Tutte le fodere sono lavabili in lavatrice a 60° C e si asciugano velocemente.



DATI TECNICI	
Larghezza cuscino	da 34 cm a 50 cm (con incrementi di 2 cm)
Profondità cuscino	da 34 cm a 50 cm (con incrementi di 2 cm)
Altezza cuscino	5 cm
Portata massima	150 kg
Peso cuscino	1,7 kg (40 x 40 cm)
Inserto	JAY Flow Fluid™
Fodera esterna	Microclimatica, stretch e per incontinenza

Per maggiori informazioni su specifiche tecniche, opzioni ed accessori fare riferimento alla scheda d'ordine. Tutte le informazioni possono essere soggette a modifiche senza notifica. Contattare Sunrise Medical per ogni dubbio. Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it.





Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale 29122 Piacenza - Italia Tel.: +39 0523 573111

Fax: +39 0523 573111

e-mail: info@sunrisemedical.it

www. Sunrise Medical. it