

AXKID ONE 2 REHA

Funzionalità



Installazione rapida e sicura in 30 secondi - Basta agganciare il sedile ai connettori ISOFIX del veicolo, aprire la base del supporto e fissare la barra di rimbalzo automatica. Fatto!




Le imbottiture laterali del tronco possono essere fissate con precisione tramite velcro all'ampio rivestimento in velluto per un migliore supporto della parte superiore del corpo.



Rivolto contro il senso di marcia dell'auto: la testa del bambino è protetta in modo ottimale in caso di impatto



Rotella centrale per regolare l'angolazione del sedile fino a 42 gradi, ideale per varie attività come giocare, riposare o dormire

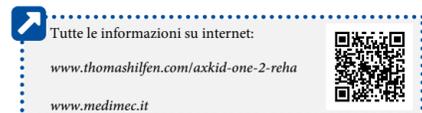

Caratteristiche



Blocco di abduzione rimovibile per una buona posizione seduta, impedisce alle gambe di ribaltarsi



La protezione dagli impatti laterali (ASIP) assorbe l'energia in caso di collisioni laterali. Facilmente montabile sul lato destro o sinistro.



Poggiatesta che cresce con il bambino, regolabile in altezza in 12 posizioni.



La tecnologia scorrevole del sedile e il sistema Sleep Well facilitano l'adattamento del sedile alle esigenze del bambino

Accessori



IMBOTTITURA AGGIUNTIVA PER LA TESTA
fornisce un migliore sostegno alla testa del bambino grazie all'inserito imbottito aggiuntivo




GILET ANTIFUGA
impedisce al bambino di divincolarsi dalla cintura



TAPPETINO PROTEZIONE SEDILE AUTO
con schienale, protegge il cuscino del sedile e offre tre pratici scomparti anteriori per giocattoli o simili

AXKID ONE 2 REHA

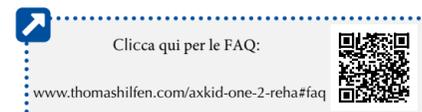

L'unico seggiolino per bambini Reha ISOFIX che consente la marcia rivolti all'indietro, fino ad un'altezza di 125 cm

Dimensioni	Axkid ONE 2 Reha
Profondità seggiolino (alla cinghia inguinale)	16 cm / 6,3"
Profondità seggiolino (al bordo anteriore)	28 cm / 11,0"
Larghezza seggiolino	21 - 29 cm / 8,3 - 11,4"
Altezza dello schienale (interna)	52 - 63 cm / 20,5 - 24,8"
Larghezza dello schienale (interna)	30 cm / 11,8"
Min. altezza schienale	29 - 42 cm / 11,4 - 16,5"
Max. altezza schienale	50 - 63 cm / 19,7 - 24,8"
Larghezza poggiatesta	16 cm / 6,3"
Altezza spalle (con guida della cintura)	26 - 37 cm / 10,2 - 14,6"
Larghezza spalle	32 cm / 12,6"
Reclinazione schienale (max.)	90 - 145°
Basculamento seggiolino (modello base)	45° / 65°
Altezza pelotte toracali (bordo superiore)	28 - 34 cm / 11,0 - 13,4"
Distanza pelotte toracali (bordo superiore)	18 cm / 7,1"
Divaricatore (L x A x P)	7 x 10 x 10 cm / 2,8 x 3,9 x 3,9"
Dimensioni max. complessive (L x A x P)	44 x 76 x 54 cm / 17,3 x 29,9 x 21,3"
Peso seggiolino (modello base)	9,9 kg / 21,8 lbs
Altezza utente	61 - 125 cm / 24,0 - 49,2"
Peso max. utente	23 kg / 50,7 lbs

HMV-Nr. 26.11.06.0900

Thomashilfen

Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG · Walkmühlenstraße 1 · D - 27432 Bremervörde
Phone +49 (0)4761 8860 · Fax: +49 (0)4761 886-19 · info@thomashilfen.de · www.thomashilfen.com



Axkid ONE 2 Reha

IL SEGGIOLINO AUTO RIVOLTO ALL'INDIETRO PER L'INFANZIA.

Seggiolini auto speciali per bambini con esigenze speciali.

Thomashilfen

THOMASHILFEN

Axkid ONE 2 Reha

"Axkid ONE 2 Reha è l'ultimo seggiolino auto dotato di ISOFIX che permette a bambini con disabilità **di star seduti rivolti all'indietro, fino a 125 cm.**

Grazie alla sua tecnologia innovativa, protegge in modo particolare la testa e il collo molto sensibili del bambino **offrendo allo stesso tempo un'installazione rapida e sicura** in soli 30 secondi - senza la necessità di cinture elaborate, evitando così pericolosi errori di installazione come un fissaggio errato della cintura, cinture attorcigliate o cinture che non si adattano correttamente, soprattutto quando si cambia veicolo

Stabilisce un nuovo standard per i seggiolini per bambini con disabilità e porta sicurezza e flessibilità nella vita quotidiana delle famiglie.



Pioneer

REHAB CAR SEATS

since
1988

Thomashilfen has the largest range of rehab car seats in the world and offers the right support for all ages and disabilities.

Da oltre 30 anni Thomashilfen offre seggiolini auto per bambini con esigenze speciali. Anche oggi utilizziamo il nostro know-how per sviluppare seggiolini auto per bambini e adulti. In essi confluisce tutta la nostra pluriennale esperienza attorno alle esigenze degli utenti e dei loro familiari.

Gunnar Thomas, Owner

Gunnar Thomas, Owner

CARATTERISTICHE UNICHE DI Axkid ONE 2 Reha

- Tecnologia del sedile scorrevole che offre il miglior spazio per le gambe sul mercato
- Programma di sicurezza durevole: è necessario un solo seggiolino auto per tutta l'infanzia
- Solo 30 secondi per l'installazione
- Sistema avanzato per il sonno con funzione di reclinazione continua

+ ACCESSORI inclusi:

- Divaricatore
- Guide per le anche
- Poggiatesta
- Pelotte toracali



protezione dagli impatti laterali ASIP

➤ Gli assorbitori di energia extra stabili sui lati riducono significativamente le forze di un impatto laterale. Montati sul lato destro o sinistro.

CINTURA A 5 PUNTI

Cintura integrata a 5 punti con regolatore centrale per un rapido settaggio della lunghezza della cintura; il pratico connettore impedisce la torsione delle cinture.

Fissaggio rapido senza cintura di sicurezza del veicolo.

A PRIMA VISTA

Dispone di un sistema di installazione semplice con 6 passaggi autoesplicativi. Il reboarder è inoltre dotato di una barra di rimbalzo automatica con suono integrato che ti consente di sapere quando il sedile è nella posizione ottimale.

- ➔ verde: settaggio corretto
- ➔ rosso: settaggio errato



SISTEMA DINAMICO PER LE GAMBE

Grazie alla sua esclusiva regolazione dello spazio per le gambe, può adattarsi dalla modalità ultra compatta, richiedendo solo 73 cm di spazio, fino a un massimo di 88 cm con il massimo spazio per le gambe. Da notare che la maggior parte dei bambini non avrà mai bisogno di quella quantità di spazio per le gambe, quindi il sedile raramente richiederà quella misura. La caratteristica fenomenale del sedile è che ha una flessibilità assoluta per adattarsi a tutti gli allestimenti dei veicoli, indipendentemente dalle dimensioni dell'abitacolo, con il semplice tocco di un pulsante.



TECNOLOGIA DI ASSORBIMENTO DEI COLPI

La geometria del poggiatesta e la scelta del materiale sono appositamente progettati per assorbire le forze d'urto prima che raggiungano il bambino.

Il poggiatesta è regolabile e può essere fissato in 12 posizioni, consentendo la piena capacità di soddisfare le esigenze di altezza e comfort.

REGOLAZIONI PRECISE

Per supportare una migliore postura della parte superiore del corpo, i pad laterali per il tronco (1) e le guide per le anche (2) possono essere regolati per adattarsi al bambino.



BARRA DI RIMBALZO AUTOMATICA

Facilita l'installazione e garantisce che il seggiolino auto sia fissato saldamente. Garantisce la sicurezza del seggiolino auto in caso di qualsiasi tipo di incidente automobilistico, compresi gli incidenti di ribaltamento. Oltre all'aspetto della sicurezza, la barra di rimbalzo automatica offre ulteriore spazio per le gambe e consente una facile installazione in meno di 30 secondi.

SISTEMA PER UN BUON SONNO

L'inclinazione del sedile a variazione continua fino a 42 gradi può essere rapidamente regolata in posizione di riposo o di sonno.



Massima sicurezza

La posizione rivolta all'indietro aiuta a ridurre lo sforzo sulla colonna vertebrale quando la testa viene spinta in avanti durante uno scontro frontale. La tecnologia di assorbimento della forza nel poggiatesta protegge la testa e il collo sensibili del bambino in caso di impatto.

Quando il bambino è seduto nel reboarder, il rischio di lesioni gravi si riduce del 92%.



L'unico seggiolino riabilitativo per bambini con ISOFIX sul mercato con approvazione i-Size fino a 125 cm/ 23 kg.

Installazione rapida e sicura in 30 secondi.

YouTube

Guarda il video:
Come installare
Axkid ONE 2 Reha nell'auto

