

CORZINO Basic

Passeggino chiudibile



- Design elegante
- 4 misure
- Portata massima elevata (fino a 75 kg)



Angolo schienale regolabile


Appoggiapiedi regolabili in altezza



Passeggino ripiegato



Appoggiapiedi separati ribaltabili BASIC

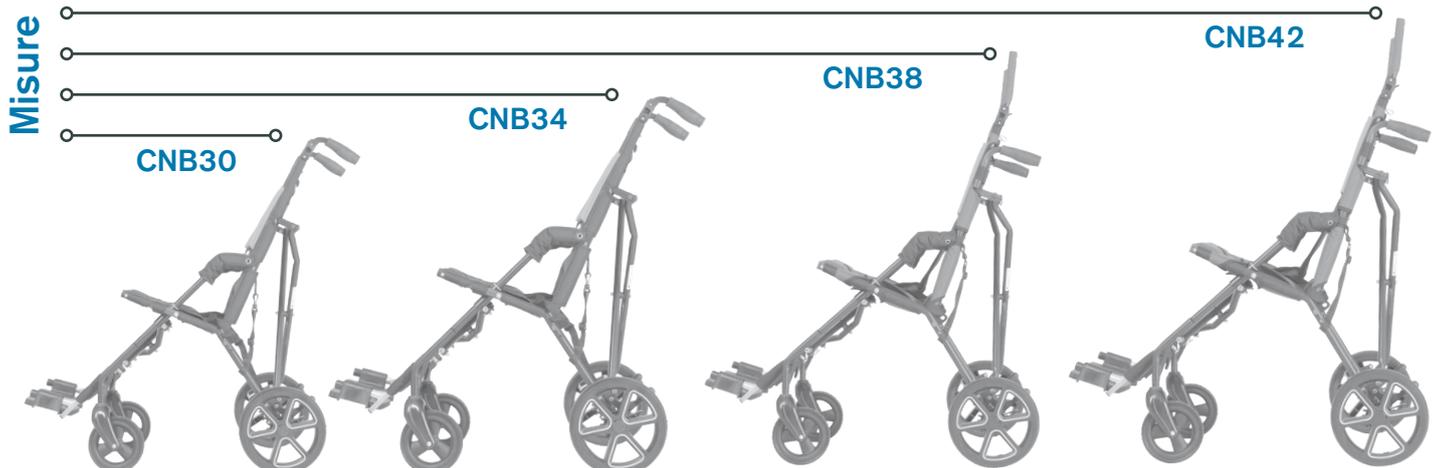

COLORI



G02 Ruby red



G03 Dark blue



G06 Grass green



G07 Black

Il Corzino Basic è un passeggino proposto in 4 misure di telaio (30, 34, 38 e 42 cm), previsto per un utilizzo per brevi periodi di tempo, ad esempio durante gli spostamenti, da parte di bambini con esigenze particolari. Il telaio della gamma Corzino Basic è una derivazione rivisitata della nota gamma Corzo. Il telaio completamente ripiegabile, dal design originale, è realizzato con materiali leggerissimi e verniciato a polvere. Il passeggino, oltre ad essere facilmente richiudibile, ha in dotazione un nuovissimo rivestimento della seduta ergonomico ed imbottito, ruote da 175/265 mm, un telaio leggero, una cintura a 5 punti che garantisce un alto livello di sicurezza ed una facile gestione e ha inoltre un'elevata portata massima (fino a 75 Kg per la misura 38 e 42). Queste caratteristiche rendono Corzino Basic ideale per gli ambienti urbani, per il trasporto sui mezzi pubblici e per le attività all'aperto non impegnative. Corzino Basic offre anche alcune caratteristiche per seguire il bimbo nella crescita: appoggiatesta regolabili in lunghezza e prolunga estraibile dello schienale (solo per la misura 38 e 42). L'ampia gamma di misure e di regolazioni fa sì che il passeggino Corzino Basic possa essere adattato alle esigenze di varie tipologie di utenti. Per le informazioni sull'uso corretto del prodotto, rivolgersi al proprio tecnico/riabilitatore di riferimento. Corzino Basic è conforme ai più recenti standard CE e risponde pienamente ai requisiti igienici, tecnici e di sicurezza.

Configurazione standard:

- appoggiatesta pieghevoli e regolabili in altezza
- schienale regolabile (2 posizioni)
- cintura a 5 punti, con fascia inguinale e imbottitura per le spalle
- prolunga dello schienale (solo per le taglie 38 e 42)
- ruote piene da 175/265 mm
- teli di rivestimento e telaio colorati (fare riferimento alla scheda d'ordine)

Accessori:

- cappottina
- appoggiatesta, cuneo abduttore, sostegni laterali per il tronco, pettorina, bretellaggio ad H e altri accessori per il posizionamento (fare riferimento alla scheda d'ordine)

Codici:

CORZINO Basic 30	CNB30RP02
CORZINO Basic 34	CNB34RP02
CORZINO Basic 38	CNB38RP02
CORZINO Basic 42	CNB42RP02

	CNB 30	CNB34	CNB38	CNB 42
Altezza schienale [mm]	550	650	650 (820)	660 (830)
Profondità seduta [mm]	280	330	380	380
Larghezza seduta [mm]	300	340	380	420
Distanza tra seduta e pedana [mm]	290-420	300-440	300-440	330-490
Angolo dello schienale	91° - 93°	91° - 94°	90° - 93°	90° - 93°
Angolo della seduta	22° - 21°	23° - 22°	22° - 21°	23° - 22°
Lunghezza totale [mm]	980	980	1050	1050
Larghezza totale [mm]	530	590	620	650
Altezza totale con maniglione di spinta regolabile in altezza [mm]	970	1040	1230	1270
Freno	a piede	a piede	a piede	a piede
Peso	12,5 kg	12,6 kg	14,5 kg	15,5 kg
Portata massima	45,0 kg	55,0 kg	75,0 kg	75,0 kg
Lunghezza del sistema di seduta ripiegato [mm]	1160	1180	1200	1200
Larghezza del sistema di seduta ripiegato [mm]	340	340	370	400
Altezza del sistema di seduta ripiegato [mm]	350	370	360	360