

TOM 5 Streeter

Sistema di seduta pieghevole completamente regolabile



- telaio 100% in ALUX high-tech
- 3 misure - MINI, STD, MAXI
- design unico MONOSLIDE
- eccellente gamma di colori
- ampia gamma di accessori

Misure



Il nuovo telaio di alluminio nero High-Tech del sistema di seduta TOM 5 è prodotto adottando l'innovativa metodologia di costruzione in ALUX High-Tech che utilizza una combinazione di giunti di lega di alluminio e di titanio temprati. Questa metodologia garantisce la leggerezza e l'alta durata del telaio. La riprogettazione dell'interfaccia tra seduta e telaio rende il telaio completamente ripiegabile e comprende un sistema di frenata sicuro, sospensioni a molla e maniglione di spinta ergonomico regolabile in altezza.

Inoltre, anche il sedile è prodotto in 100% ALUX usando la metodologia ALUX High-Tech. L'unità di seduta è estraibile, ribaltabile e completamente regolabile in dimensioni e posizione. E' dotata non solo dell'innovativo sistema di regolazione MONOSLIDE, ma anche di un meccanismo di basculamento ad alta efficienza molto semplice e di un sistema flessibile certificato per l'applicazione del bretellaggio e per il posizionamento degli accessori. La struttura della seduta è ricoperta da una fodera molto imbottita con un elegante rivestimento in tessuto. La facilità di gestione viene ulteriormente garantita dalla possibilità di ripiegare completamente il TOM 5 anche senza dover togliere la seduta.

Il sistema di seduta TOM 5 è stato disegnato da un team di progettisti professionisti e di specialisti della postura: è quindi un prodotto eccellente, non solo dal punto di vista del design, ma anche per la sua funzionalità: si tratta di uno dei sistemi di seduta più leggeri della sua categoria. Inoltre, le ruote piane da 265 mm (175/265 mm) consentono di utilizzarlo non solo in ambiente urbano ma anche nel corso di attività all'aperto non impegnative.

Configurazione standard:

- Unità di seduta estraibile ed invertibile
- Schienale regolabile in altezza
- Seduta regolabile in profondità e in larghezza
- Unità di seduta basculante
- Schienale completamente reclinabile, con sostegni laterali
- Appoggiatesta regolabile in inclinazione e in altezza
- Pedana ad angolazione regolabile
- Ruote piane 260 mm (175/260 mm)
- Barra di sicurezza estraibile con copertura
- Maniglione di spinta ergonomico e regolabile in altezza
- Tessuto di rivestimento con elementi di sicurezza riflettenti
- Cestino, fianchetti regolabili, imbottiture laterali per il telaio

- Per i colori disponibili, fare sempre riferimento all'ultima revisione della scheda d'ordine scaricabile dal nostro sito.



Sistema di seduta ripiegato

Opzioni e accessori:



Appoggiatesta CLASSIC



Supporto per il collo CLASSIC



Supporti laterali per il tronco CLASSIC



Cestino HD (in acciaio)



Imbottiture per fissare gambe e polpacci




Cintura toracica a 4 punti COMFORT



Cuneo abduttore



Pettorina COMFORT TBX

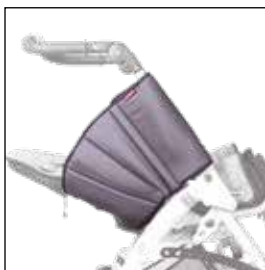

Imbottitura laterale estesa per il telaio



Cintura pelvica a 2 punti




Parasole COMFORT



Copertura parapioggia



Telaio per interni High-Low CLASSIC

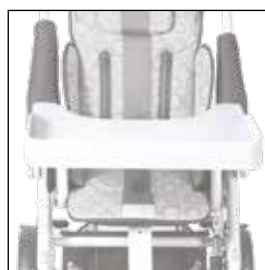

Tavolino CLASSIC

... e tanti altri accessori!

fare riferimento alla scheda d'ordine

Perfetto per la crescita



Schienale regolabile in altezza



Posizionamento completo



Completamente regolabile

Maniglione di spinta regolabile

Schienale reclinabile

Seduta basculante

Angolo della pedana regolabile

Angolo dell'appoggiapiedi regolabile



Seduta invertibile

COLORI



R54 Slate grey



R55 Denim blue



R56 Peas green



R57 Antik pink



R58 Papaya orange



R59 Ruby red

CRASH TEST SUPERATO CON SUCCESSO



Il prodotto è stato sottoposto a Crash Test ed è risultato conforme ai requisiti della norma EN ISO 7176-19. Significa quindi che questo sistema di seduta è un prodotto ideale per l'utilizzo quotidiano e anche per il trasporto su veicoli a motore idonei e dotati dei punti di ancoraggio e degli elementi di fissaggio idonei.

Codici:

TOM 5 Streeer MINI:	T5S30RP00
TOM 5 Streeer STD:	T5S34RP00
TOM 5 Streeer MAXI:	T5S38RP00
TOM 5 Streeer MAXI-XLG:	T5S38RP0G

	MINI	STD	MAXI	MAXI-XLG
Altezza schienale [mm]	450-570	510-680	550-770	610-790
Profondità seduta [mm]	(185) 200-270	230-330	290-400	340-450
Larghezza seduta [mm]	230-300	250-340	270-380	270-380
Distanza tra seduta e pedana [mm]	120-280	120-360	120-390	120-430
Angolo dello schienale	90° - 165°	90° - 180°	90° - 180°	90° - 180°
Angolo della seduta	+46/-30°	+38/-32°	+43/-33°	+43/+10°
Lunghezza totale [mm]	760	760	760	760
Larghezza totale [mm]	595	630	670	670
Altezza totale con maniglione di spinta regolabile in altezza [mm]	1000	1000	1070	1100
Freno	a piede	a piede	a piede	a piede
Peso	18,4 kg	20,0 kg	21,0 kg	22,5 kg
Portata massima	40,0 kg	40,0 kg	50,0 kg	50,0 kg
Lunghezza del sistema di seduta ripiegato [mm]	840	850	880	930
Larghezza del sistema di seduta ripiegato [mm]	595	630	670	670
Altezza del sistema di seduta ripiegato [mm]	360	370	390	440